


Оклюзійна пов'язка на грудну клітку



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомоги.

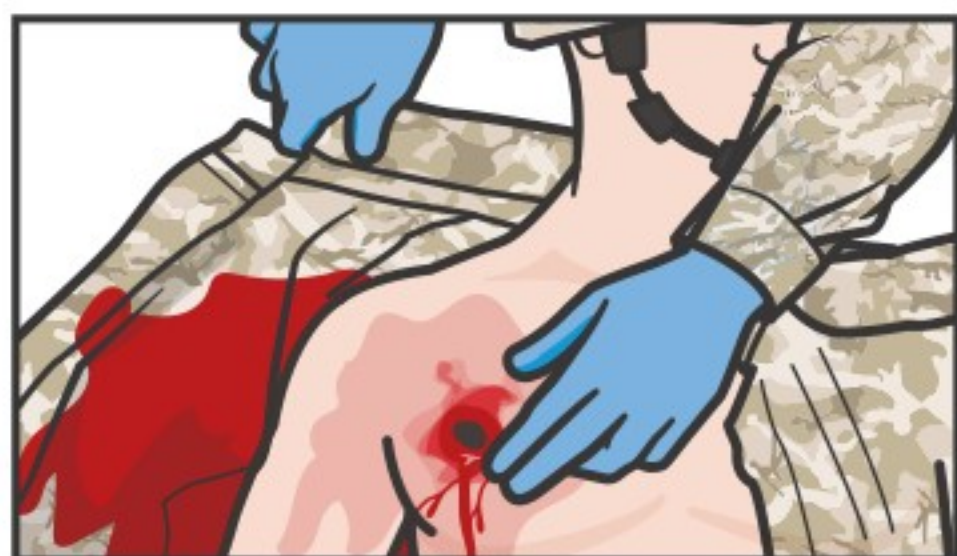

01 ВИКРИТИ будь-які рани грудей, задню та передню.

ПРИМІТКА. Якщо виявлено кілька ран, обробіть їх у тому порядку, в якому вони були знайдені.



02 Перевірте наявність ознак відкритих ран грудей.

Якщо ви не впевнені, що рана повністю проходить через стінку грудної клітки, розглядайте як відкритий пневмоторакс.



03 МІСЦЕ покладіть руку на відкриту рану грудної клітки, щоб сформувати тимчасове ущільнення.



04 ВІДКРИТИ упаковку, тримаючи вентилявану нагрудну прокладку.

Якщо вентилявана нагрудна прокладка недоступна, використовуйте невентильовану прокладку.




05 Використовуючи марлю з упаковки грудного бинта або іншу марлю, очистіть ділянку від будь-якого бруду або рідини.



06 ВИКРИТИ клейку частину герметизуючої пов'язки.



07 РОЗМІЩІТЬ клейку сторону безпосередньо над отвором, коли поранений видихає, міцно натискаючи, щоб закріпити пов'язку. Латка повинна закривати отвір на 5 см.

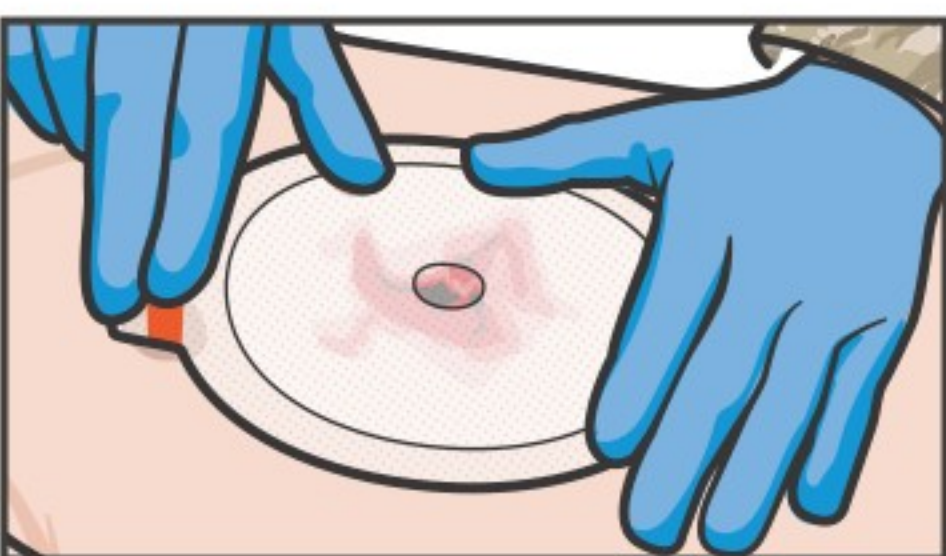

08 ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО клейкий край повністю прикріплений до шкіри.

ПРИМІТКА. Стрічка може бути використана для кріплення вентиляваної перев'язної подушечки, якщо це необхідно.



09 ОЦІНИТИ ефективність вентиляваної пов'язки під час дихання пораненого.

КРОК 9. ДИВІТЬСЯ ДОДАТКОВІ ІНСТРУКЦІЇ НИЖЧЕ.

КРОК 9 ВАЖЛИВО. Вентильована прокладка повинна перешкоджати проникненню повітря в грудну клітку під час вдиху та дозволити повітрю виходити під час видиху.

продовження на наступній сторінці...