


Внутрішньокістковий великогомілковий EZ-IO

Tibia Intraosseous EZ-IO




Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

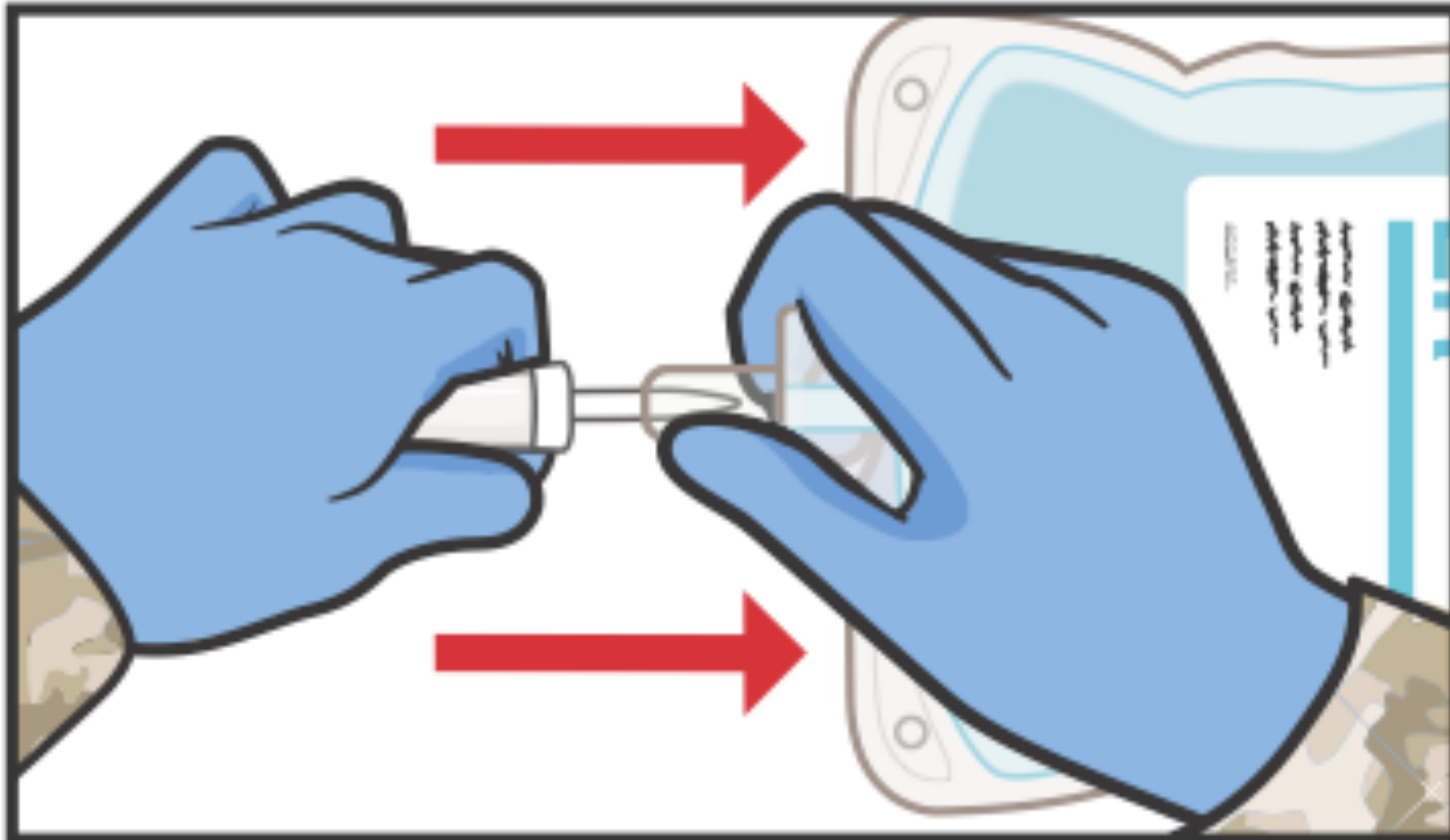

02 Підготуйте трубку, прикріпіть до пакета для внутрішньовенної інфузії.




03 Заповніть подовжувальну трубку стерильним розчином для внутрішньовенного введення. Замініть фізіологічний розчин стерильним розчином.

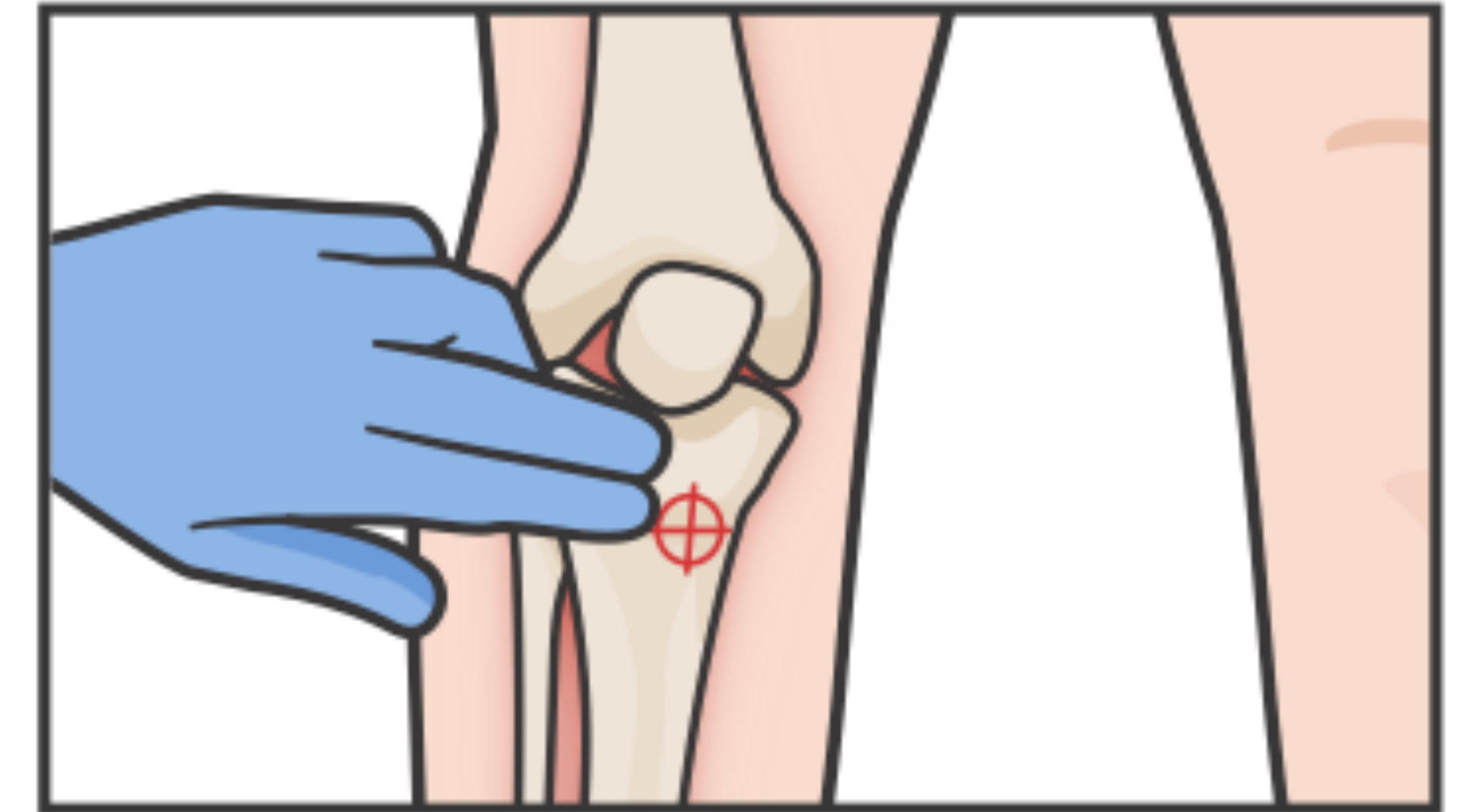


01 Зберіть і підготуйте обладнання. Огляньте його на недоліки.


04 Знайдіть правильне місце введення EZ-IO на ширину одного пальця медіально від проксимального горбка великогомілкової кістки. Зазвичай приблизно на 3 см нижче колінної чашечки.

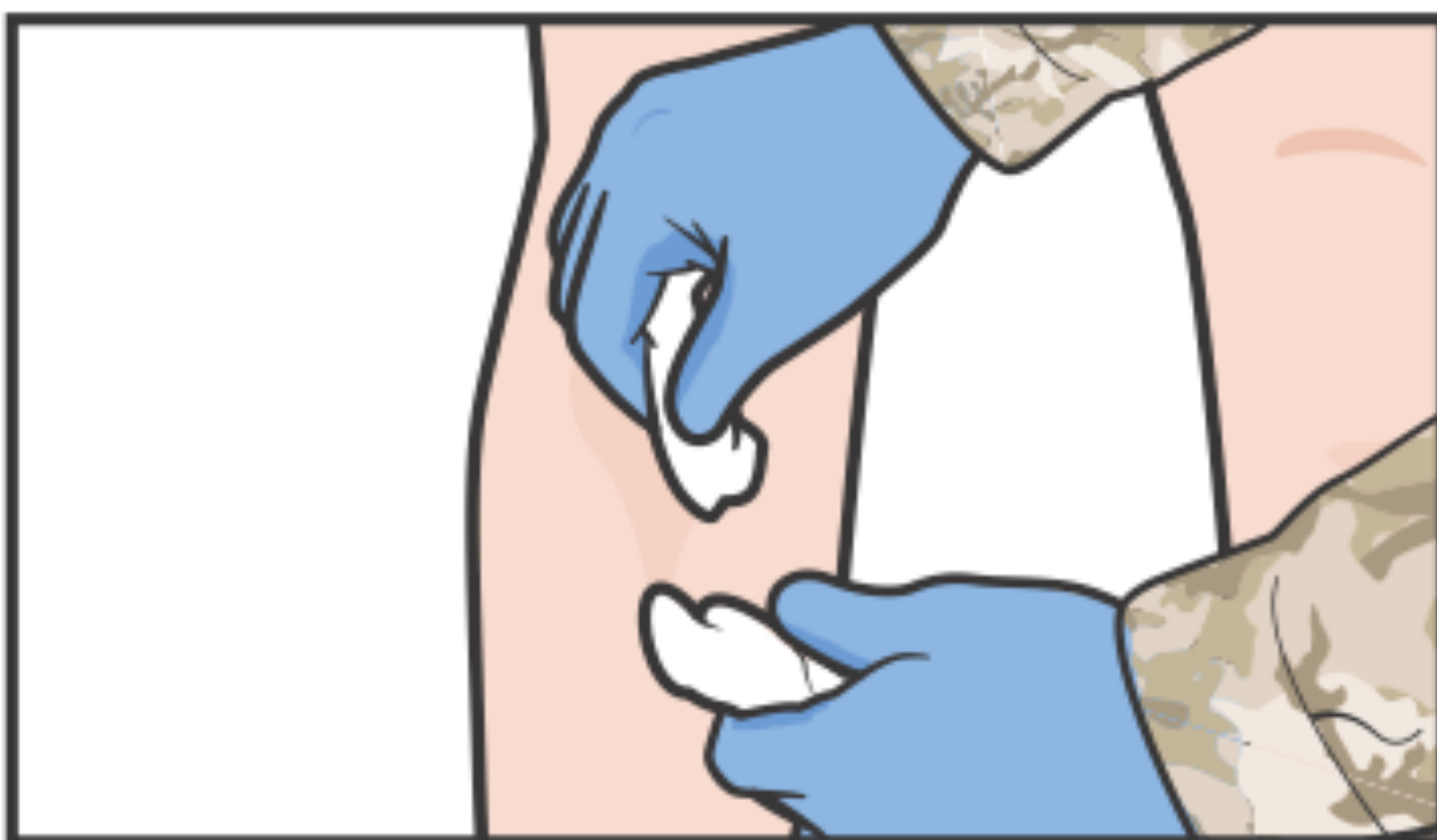

05 Очистіть місце спиртом або повідон-йодом.

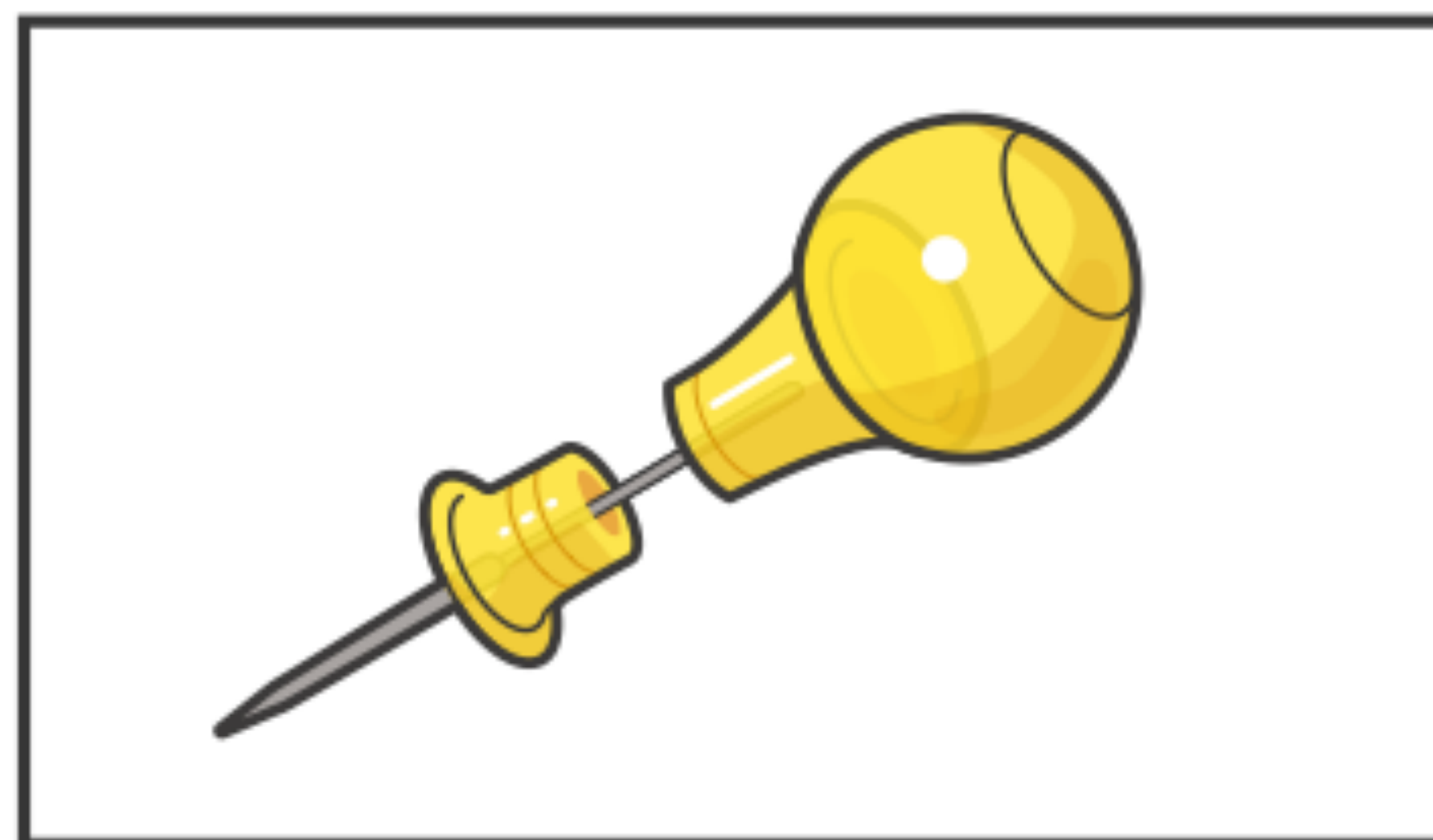


06 Знайдіть відповідну Внутрішньокісткова голка EZ-IO. Якщо використовується механічний драйвер, буде клацання від магнітного кріплення.

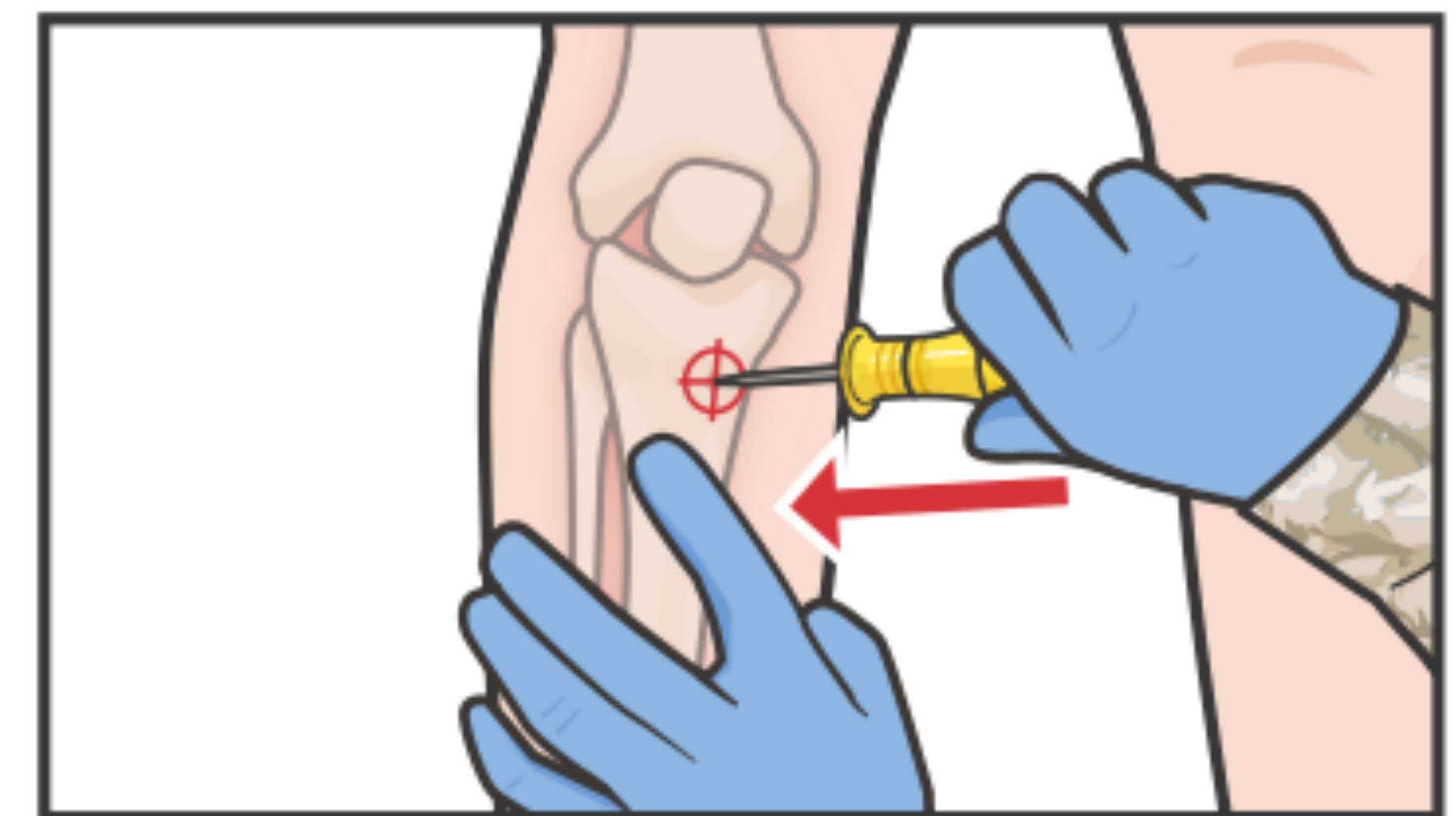

07 Підготуйте ручну внутрішньокісткову голку EZ-IO, знявши запобіжний ковпачок. Якщо ви використовуєте електродріль, увімкніть її на короткий час, міцно тримаючи запобіжний ковпачок.

ВАЖЛИВО - Тримайте пальці подалі від голки.


ПРИМІТКА КРОК 6. Жовтий - це дорослий розмір EZ-IO. Пройдіть подальше навчання щодо правильного вибору внутрішньокісткової голки EZ-IO. Успіх може визначатися багатьма факторами.

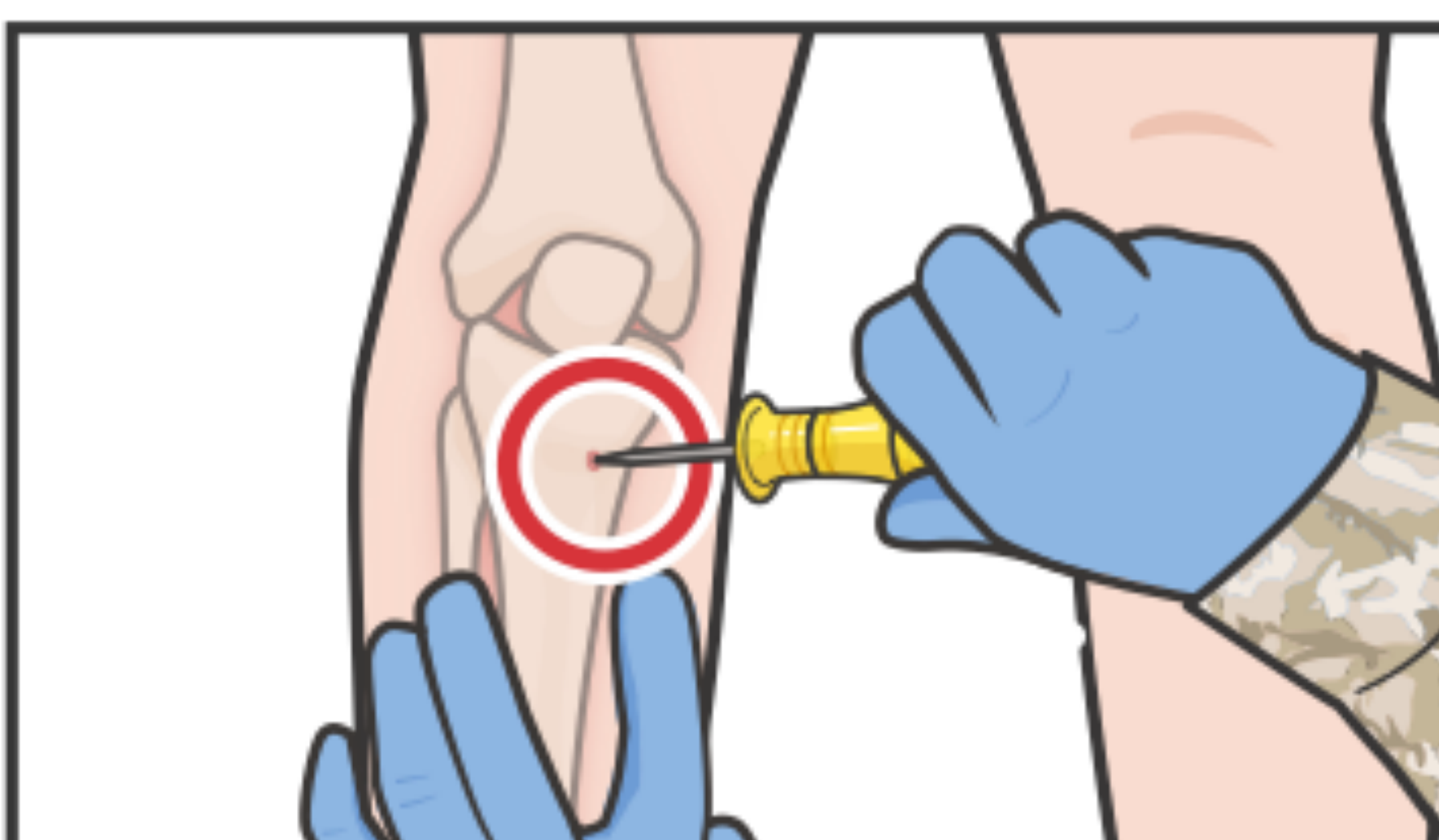

08 Тримайте механічний драйвер або голку в домінуючій руці, тримаючи іншу руку непорушно біля місця розміщення.

09 Внутрішньокісткова голка EZ-IO драйвер або голка повинні знаходитися під кутом 90 градусів до поверхні кістки.


ПРИМІТКА. Тримайте кінцівку пораненого нерухомо під час процедури не домінуючою рукою.

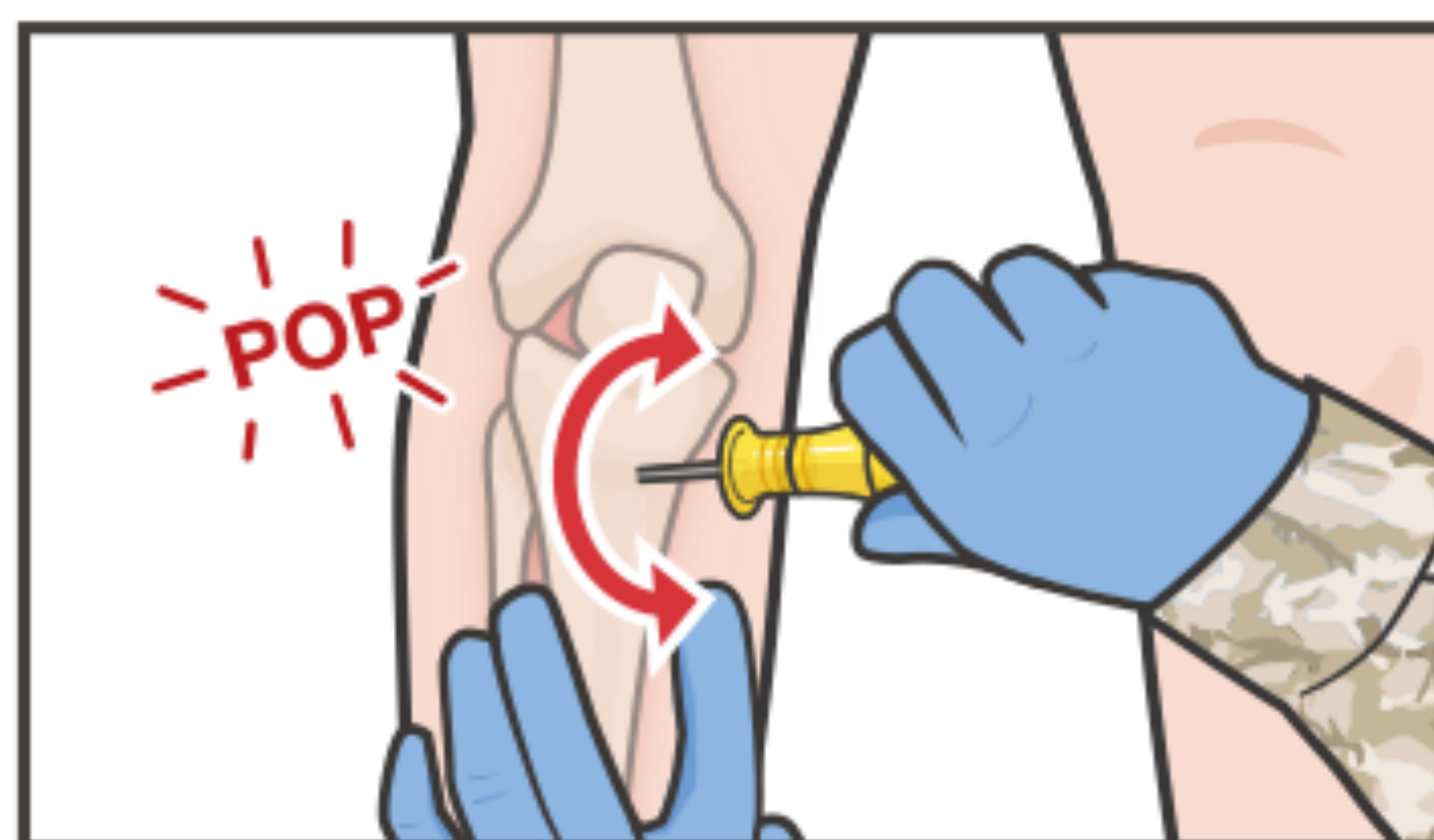

10 Обережно проколите шкіру, рухаючи рукою або електроінструментом, поки кінчик голки не торкнеться кістки.

11 Постійно натискаючи вниз, рухайте голкою вперед і назад (або використовуйте електроінструмент), доки не проникне в кортекс кістки.

КРОК 11. Коли досягнуто бажаної глибини, відчувається очевидний стрибок.

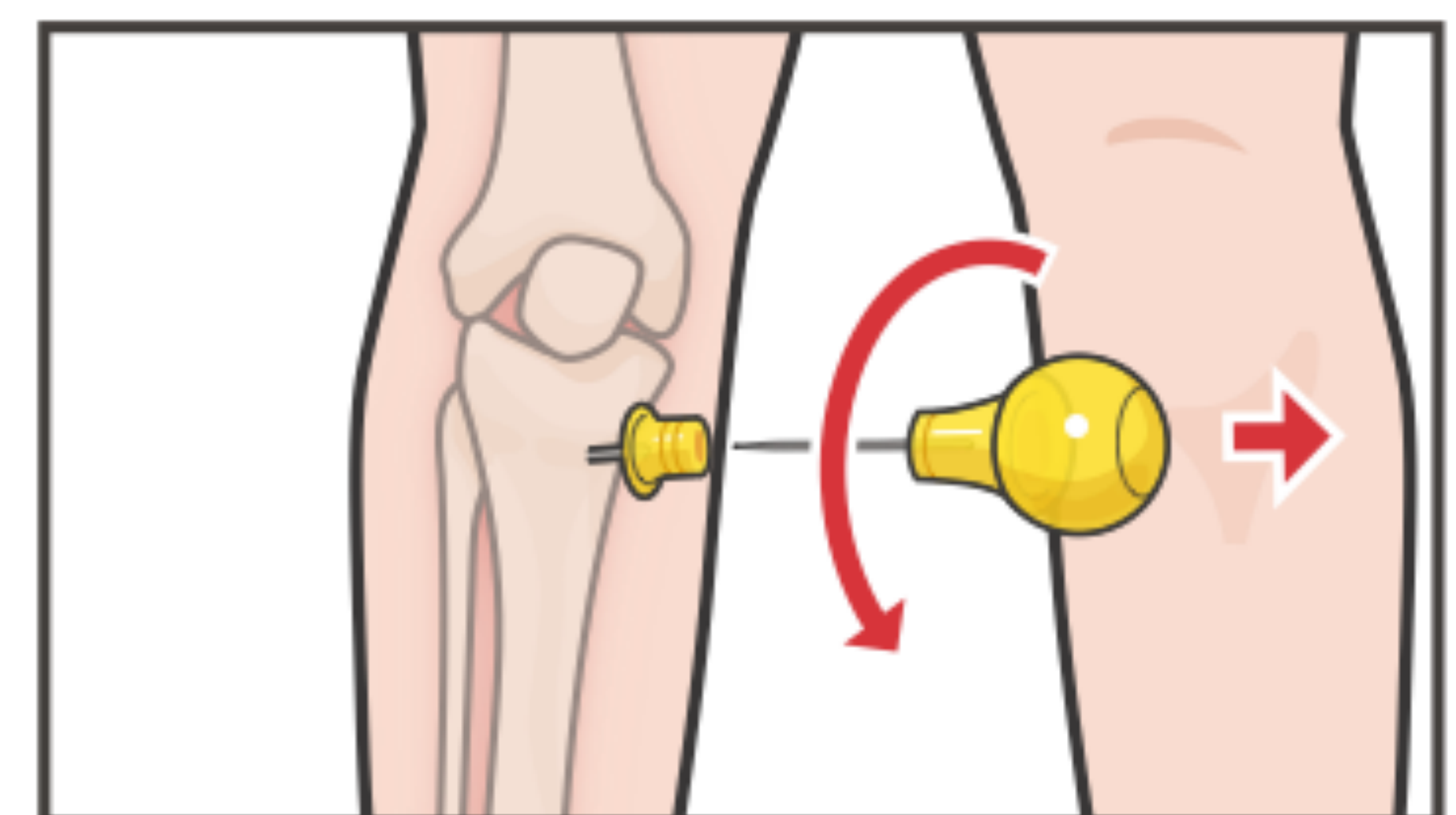

12 Відкрутіть округлий аплікатор, обертаючи проти годинникової стрілки, і вийміть його з катетера - або обережно зніміть свердло з голки.

продовження на наступній сторінці...