















## ВУЗЛОВИЙ ТУРНІКЕТ JETT (JUNCTIONAL EMERGENCY TREATMENT TOOL)

**ПРИМІТКА:** Вузлові турнікети повинні накладатися після належного тампонування рани.




ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.

ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

01

РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі.

**ПРИМІТКА:** Можливо, вам буде потрібно зрізати одяг, щоб належним чином відкрити доступ до рани.

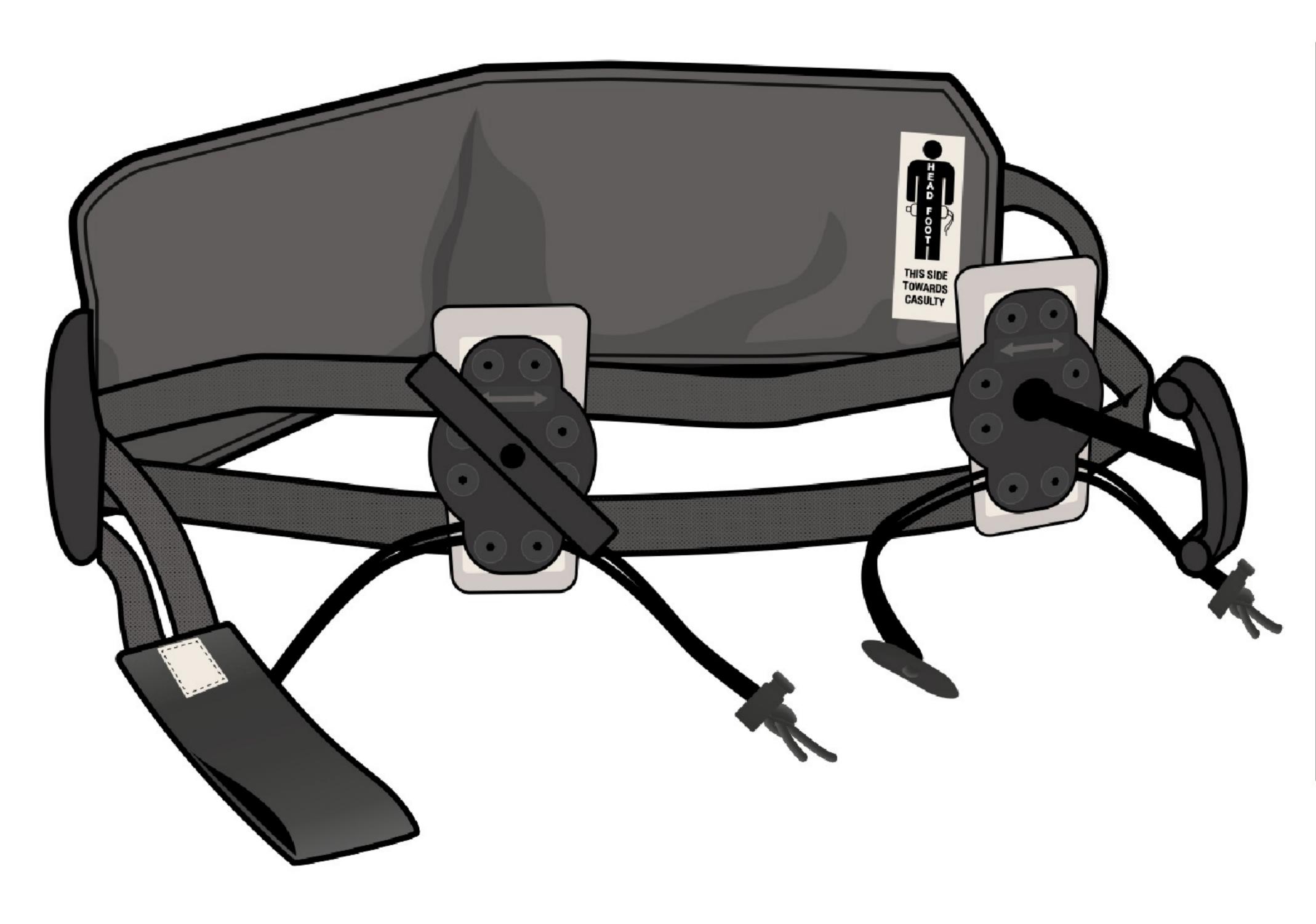




Якщо це можливо, ЗАСТОСУЙТЕ прямий тиск на джерело найбільш активної кровотечі.



ВИЙМІТЬ все з кишень пораненого та приберіть всі речі з ділянки таза.

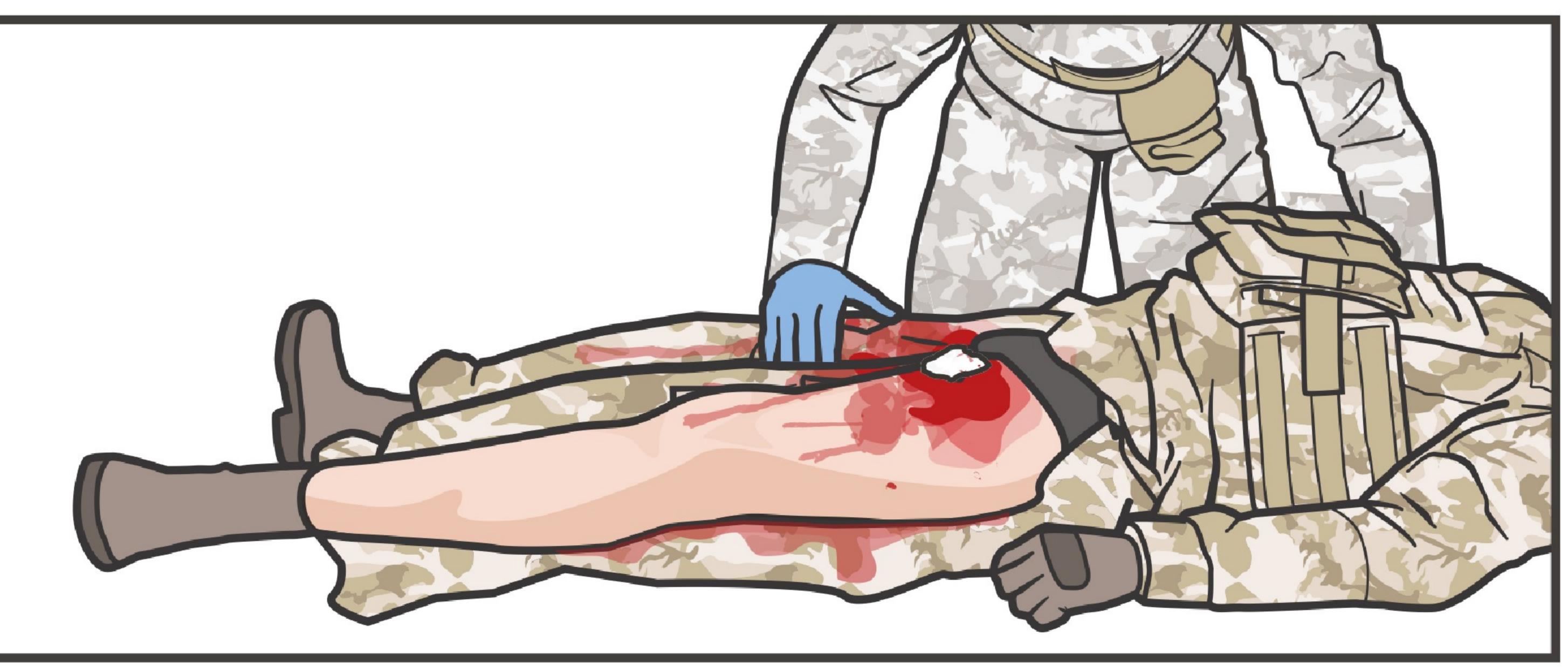


ПОКЛАДІТЬ пораненого в положення лежачи на спині.




ЗАСТОСУЙТЕ прямий тиск на місце пальпації пульсу на стегні.

ВІДКРИЙТЕ та РОЗКРУТІТЬ пристрій і підготуйте його до застосування.

**ПРИМІТКА:** Переконайтеся, що етикетка з написом «Цією стороною до пораненого» спрямована догори і до пораненого.

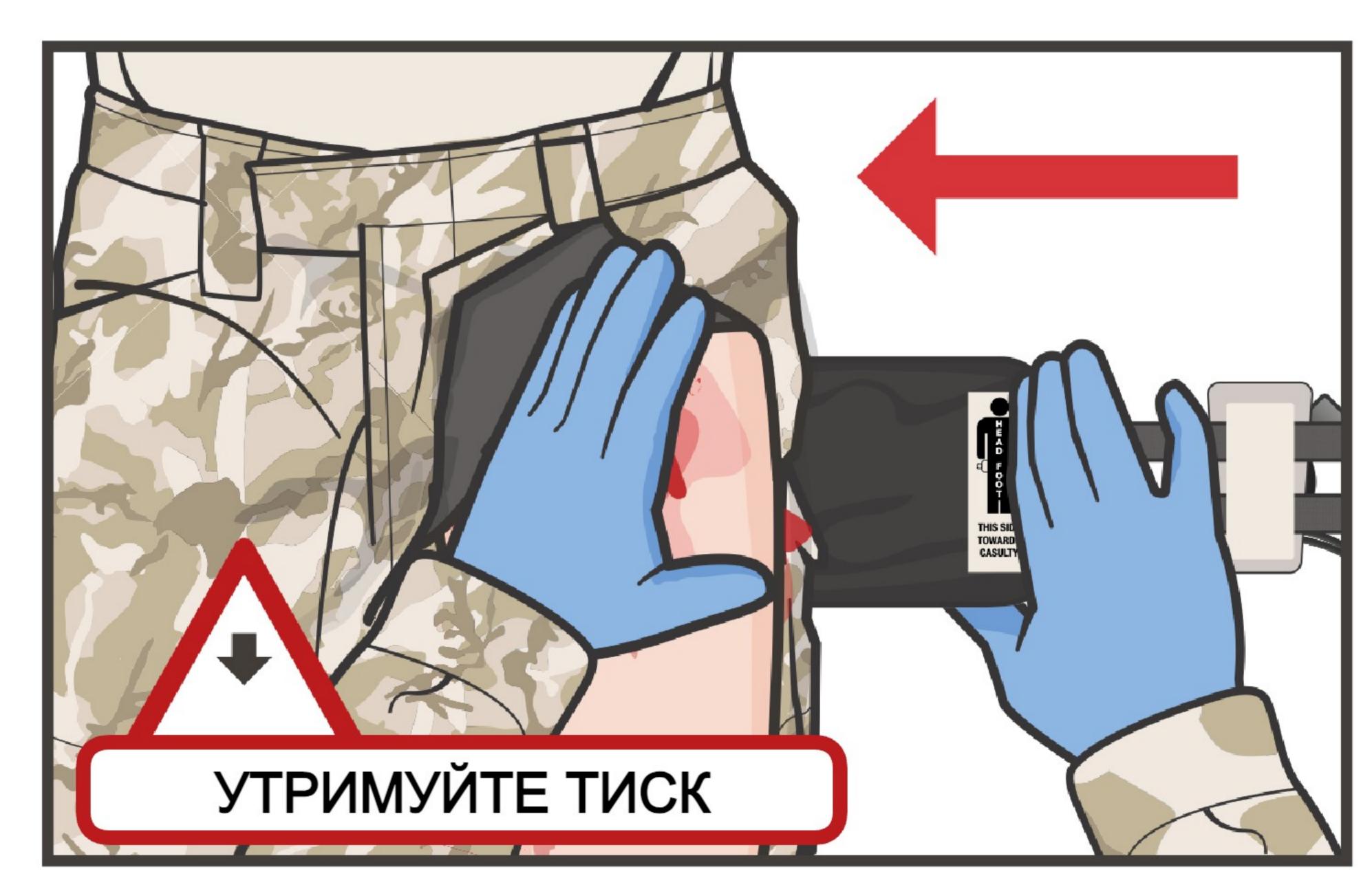

17 ПРОСУНЬТЕ ремінь під поперек або сідниці пораненого.

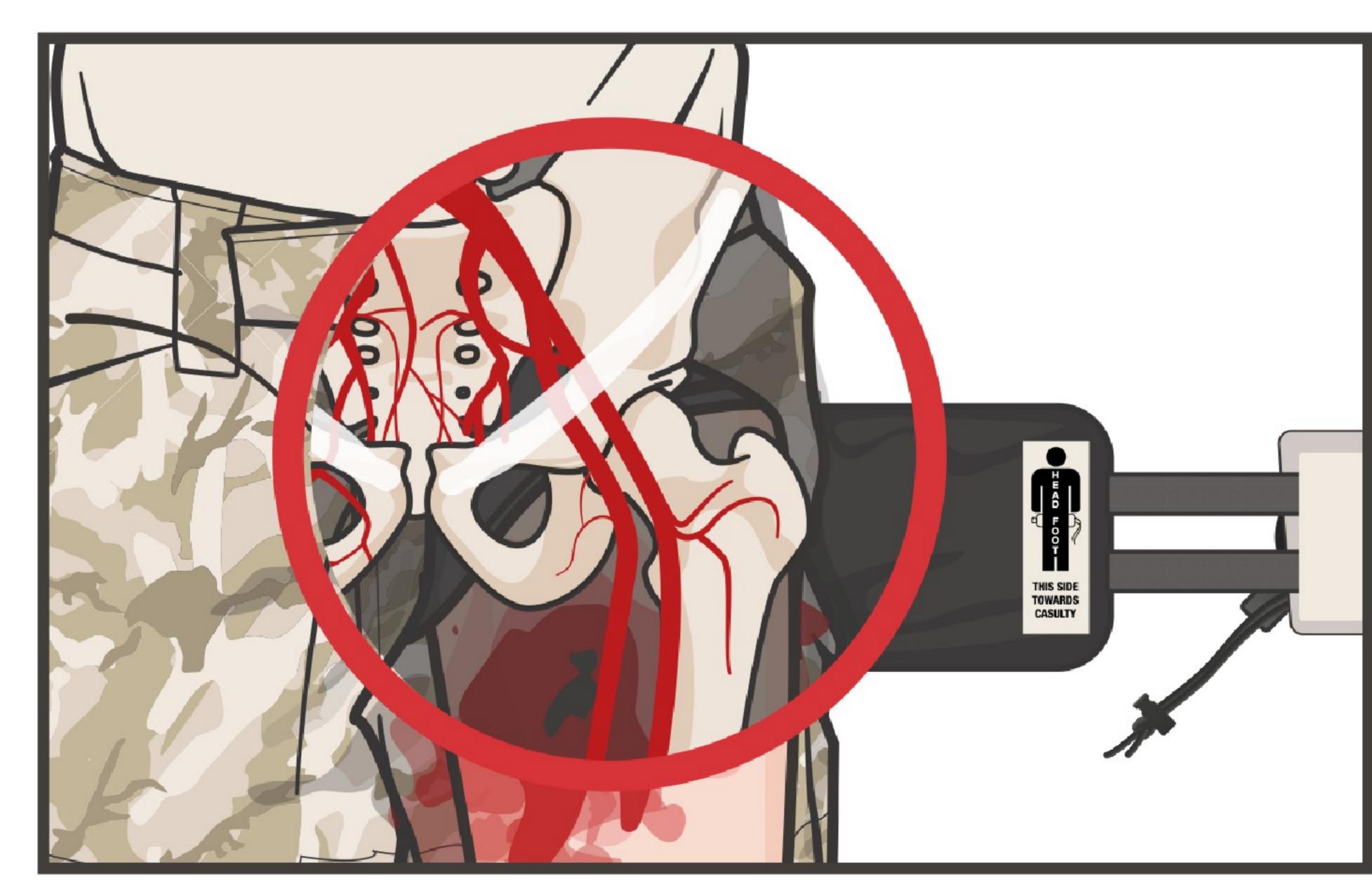

3НАЙДІТЬ пульс на стегні, безпосередньо під паховою зв'язкою, яка йде від верхнього гребеня клубової кістки до лобкової кістки, щоб правильно розташувати пристрій.



ВИКОРИСТОВУЮЧИ рухи вперед-назад, просуньте ремінь під сідниці так, щоб сіднична підкладка розташувалася під постраждалим, дозволяючи розмістити накладки для створення тиску трохи нижче пахвинної зв'язки.

Продовження на наступній сторінці...