

Екстрена кінцівка джгут

Продовження зі сторінки 1




07 ТРИМАЙТЕ брашпиль над центром вузла і завершіть зав'язування квадратного вузла, затагнувши його над пристроєм.



08 ОБРАТАЙТЕ брашпиль, доки кровотеча не зупиниться і пульс НЕ буде прощупуватися під місцем накладання джгута.




09 ТРИМАННЯ НА МІСЦІ, зав'яжіть квадратний вузол, щоб брашпиль залишався на місці. Якщо використовується кільце, прикріпіть його до брашпиля для утримання.

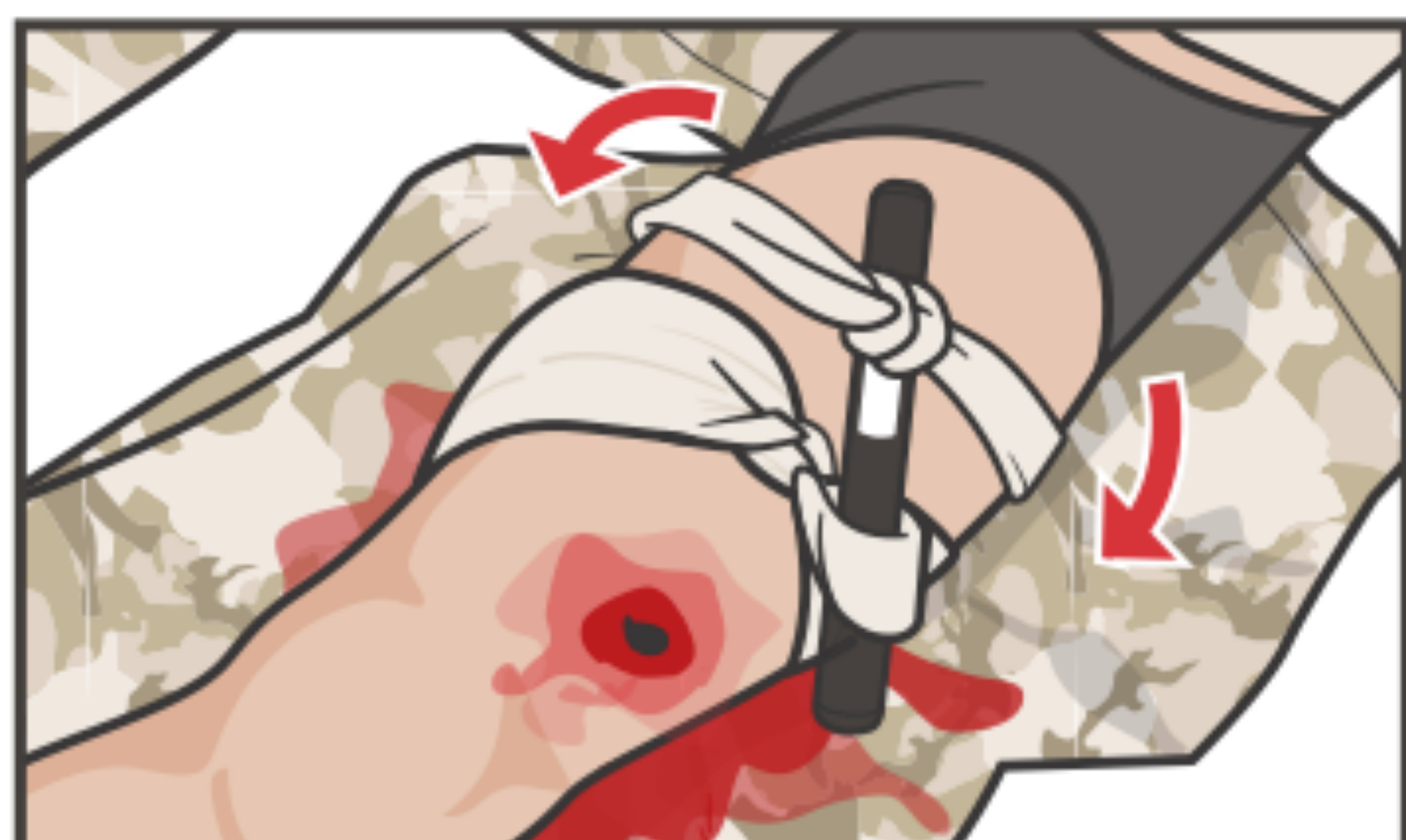

10 ЗАКРІПІТЬ брашпиль, якщо не використовуєте кільце.



11 ДОКУМЕНТУВАТИ час накладання джгута на обличчя пораненого.

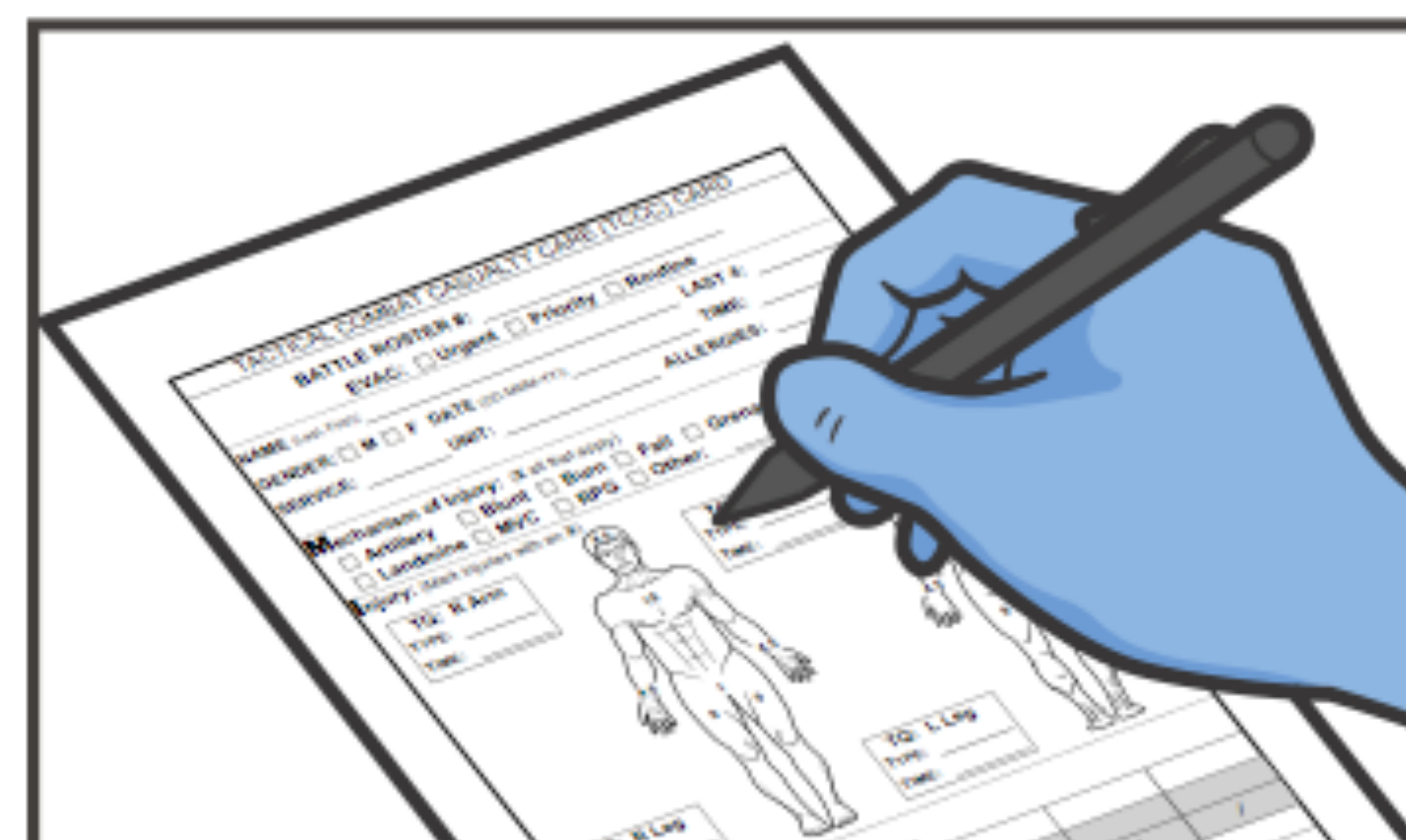

12 ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.