

















## накладання турнікета з зуочастим механізмом двома руками

## (ДОПОМОГА ПІД ВОГНЕМ, CUF)

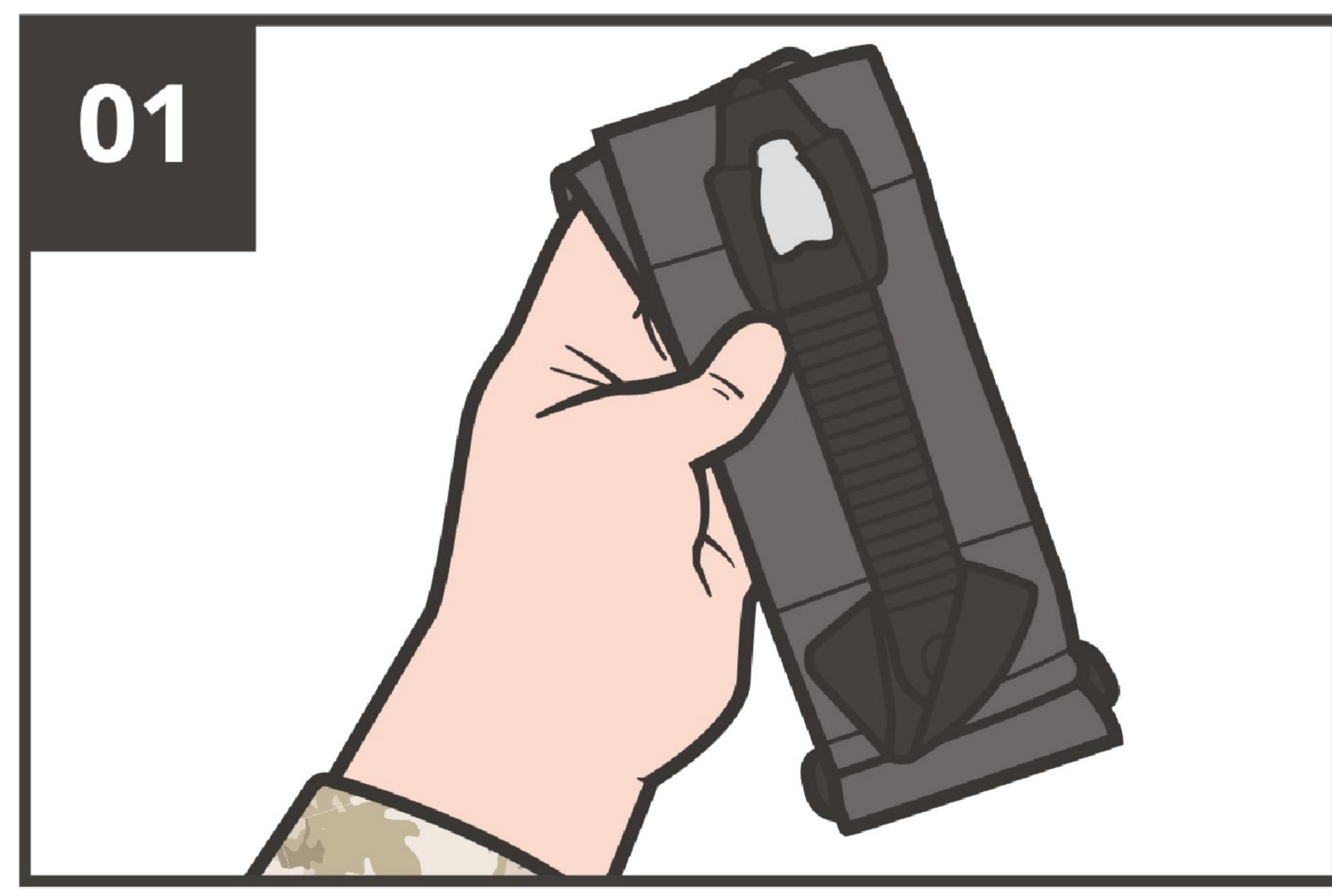


ДІСТАНЬТЕ турнікет із тактичної індивідуальної аптечки пораненого та/або з підсумка.

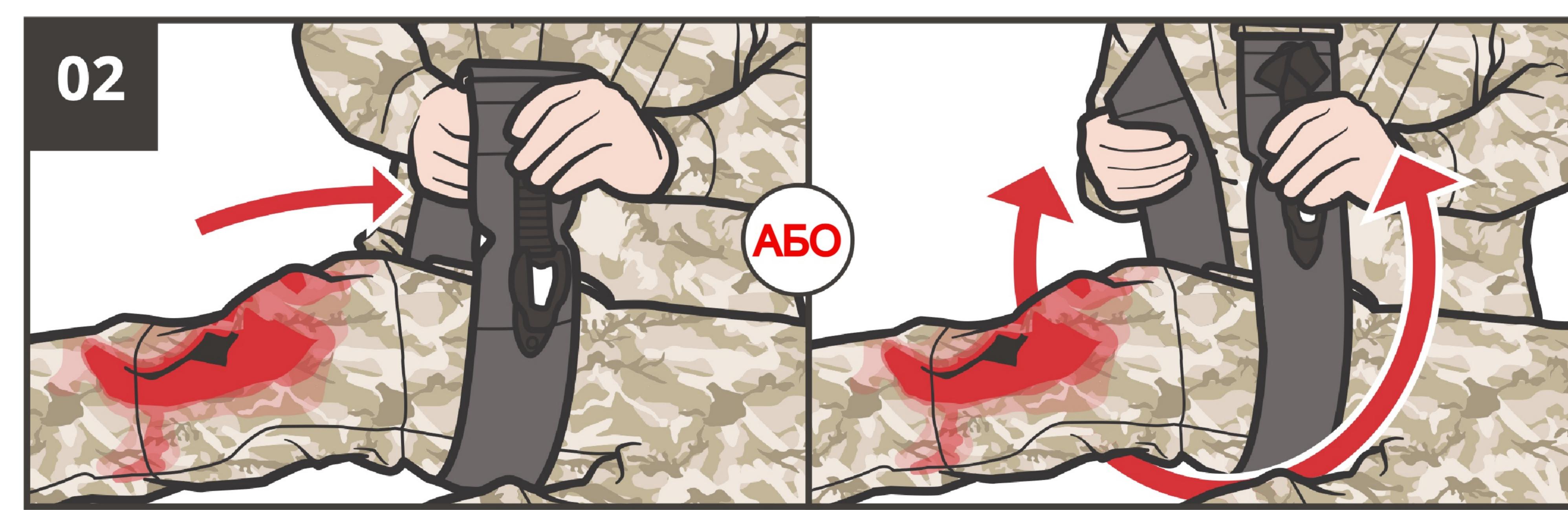


ПРОСУНЬТЕ поранену кінцівку крізь петлю, яку утворює самоклеюча стрічка (турнікет у вигляді замкнутої петлі).

ОБГОРНІТЬ ремінь навколо кінцівки; просуньте його кінець крізь отвір пряжки.

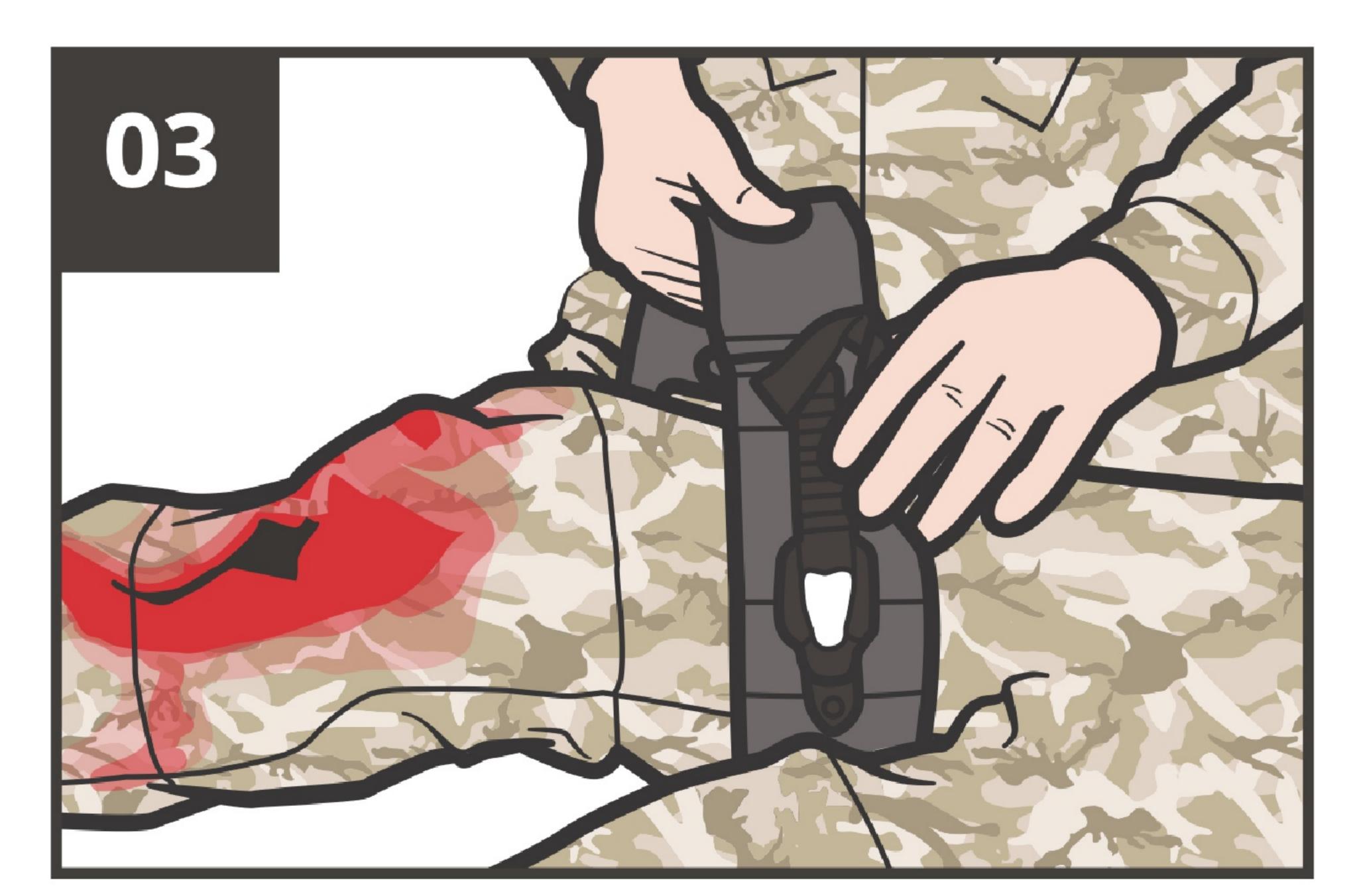


РОЗМІСТІТЬ турнікет над місцем кровотечі, високо на кінцівці поверх одягу/уніформи.

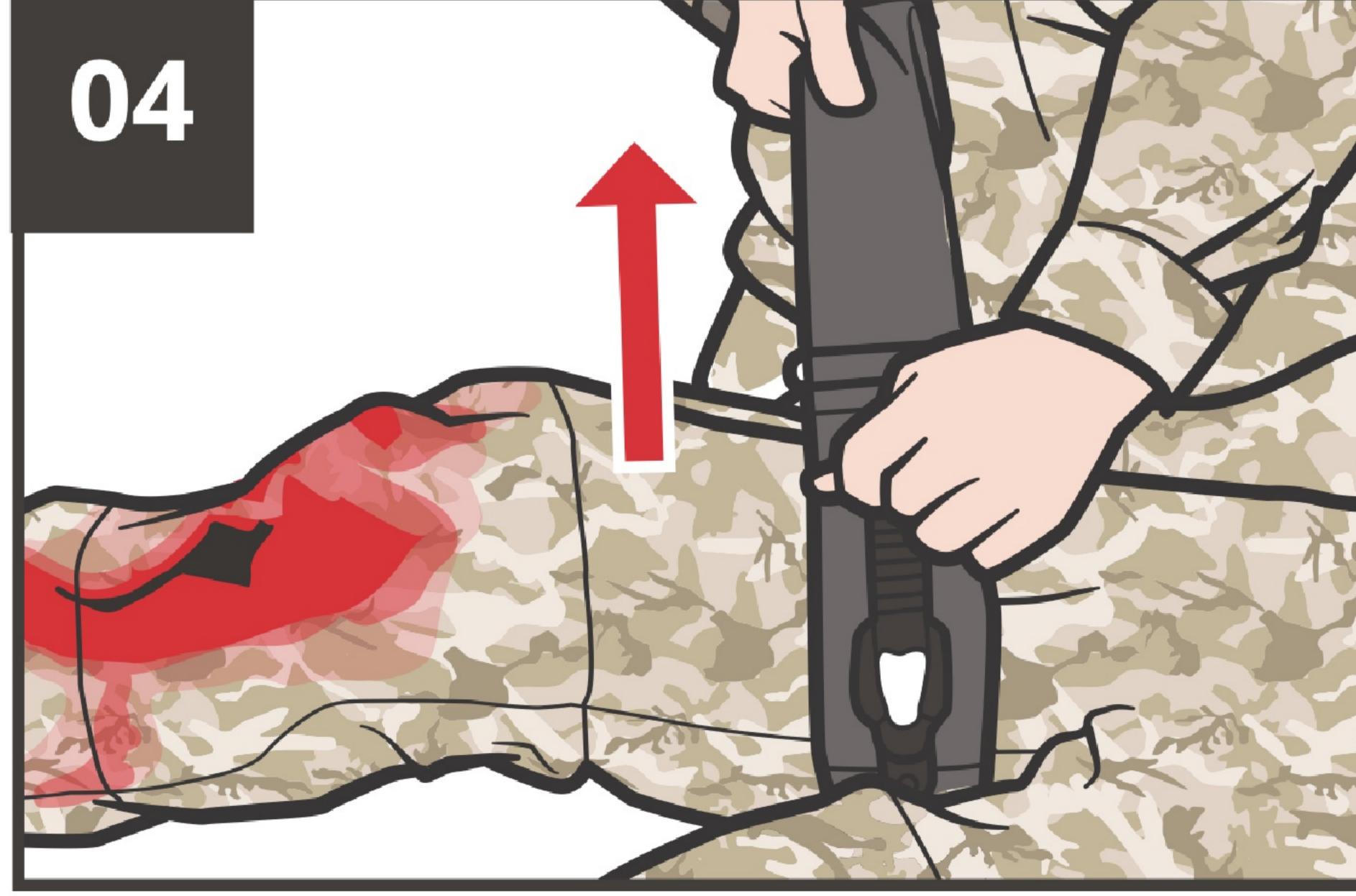

ЗАТЯГНІТЬ ремінь якомога сильніше, усуваючи будь-які провисання.



ЗАТЯГНІТЬ зубчастий механізм якомога щільніше до зупинки кровотечі (виконайте кроки 1-5 менш, ніж за 1 хвилину).

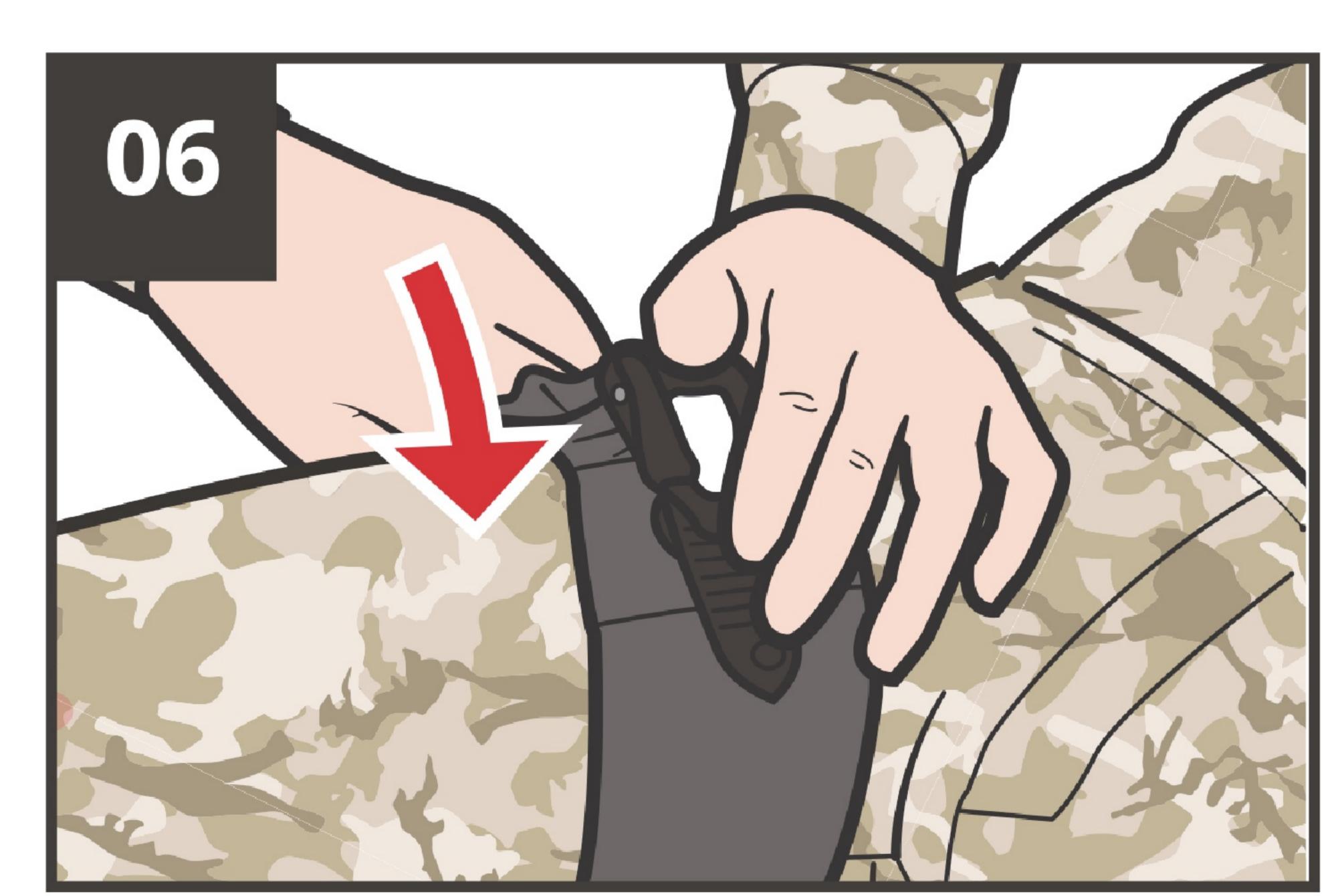

ЗАФІКСУЙТЕ зубчастий механізм (він стане на місце з характерним клацанням).



Якщо відсутня інша значна кровотеча, ПЕРЕМІСТІТЬ ПОРАНЕНОГО В УКРИТТЯ.