


# Плечова внутрішньокісткова EZ-IO

## EZ-IO Humeral Intraosseous




Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

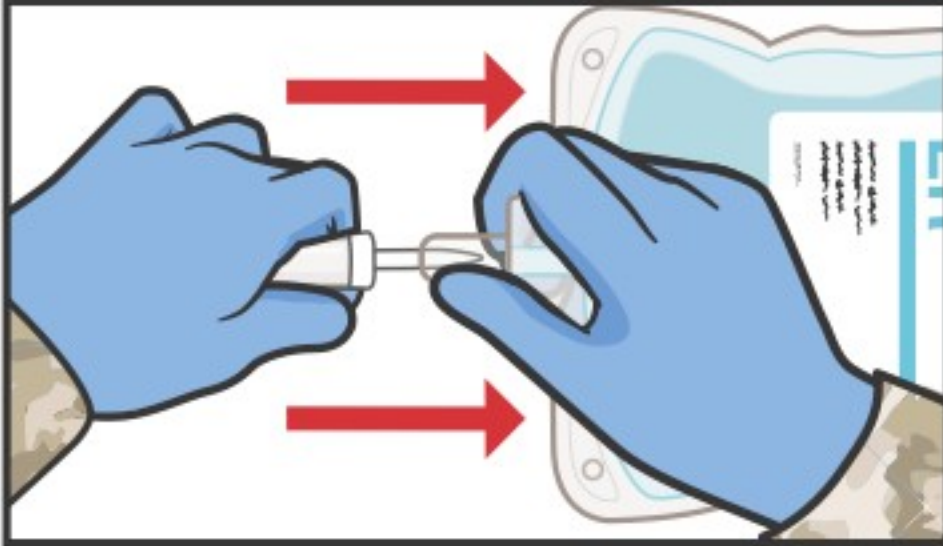

**02** Підготуйте трубку, прикріпіть до пакета для внутрішньовенної інфузії.




**03** Заповніть подовжувальну трубку стерильним розчином для внутрішньовенного введення. Замініть фізіологічний розчин стерильним розчином.

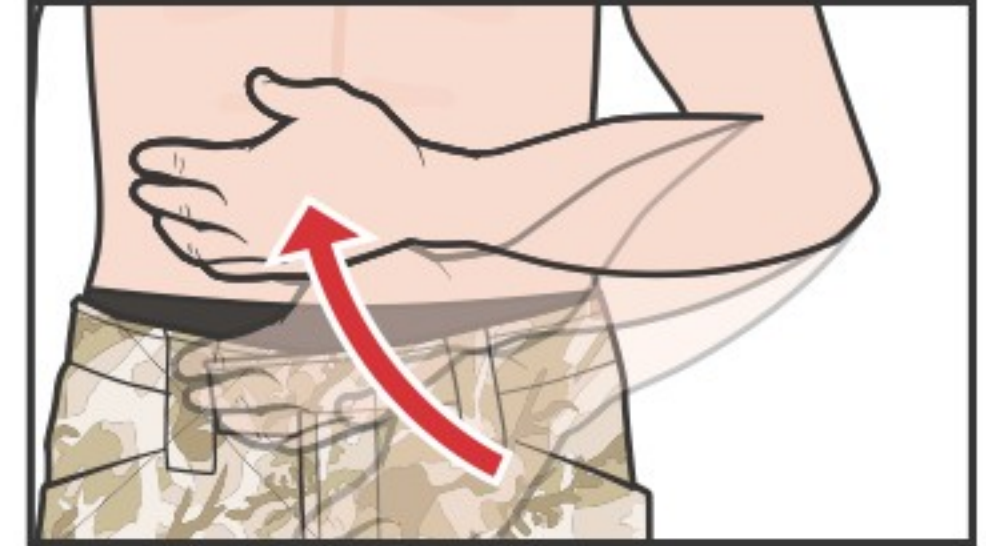

**04** Попросіть потерпілого покласти руку на живіт і аддукт, підняти лікоть, щоб плечова кістка була більш виразною.

**КРОК 4. Медіальна ротація ліктя допоможе поставити спицю плечової кістки.**

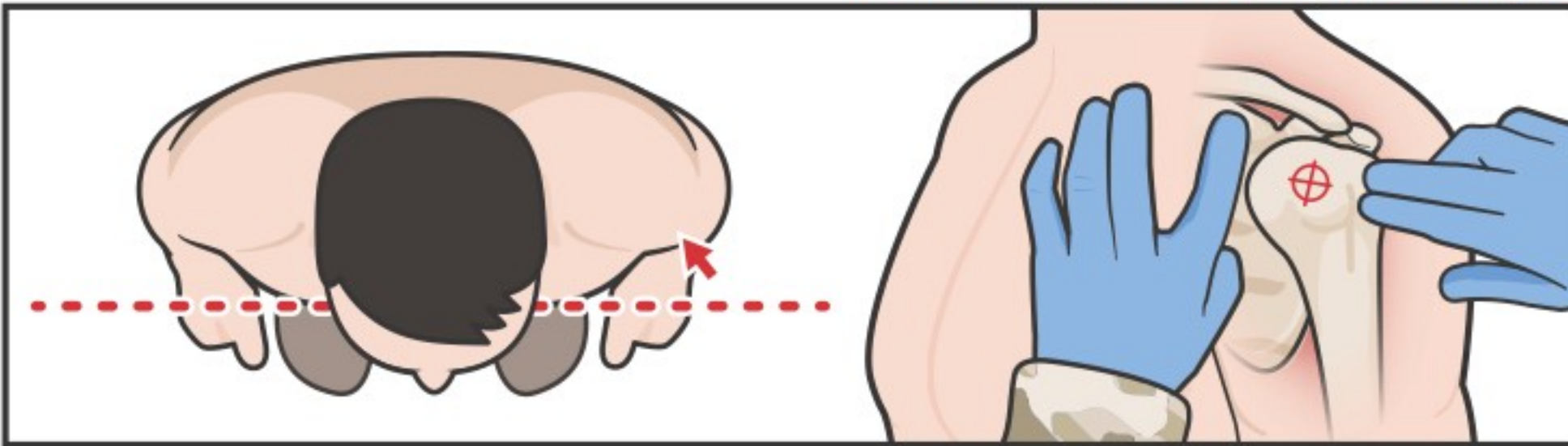


**05** Знайдіть більший горбок проксимального відділу плечової кістки та хірургічну шийку під ним. Ідеальне місце введення – 1 см вище хірургічної шийки.




**06** Очистіть місце спиртом або повідон-йодом.

**ПРИМІТКА.** Хірургічна шийка знаходиться трохи нижче великого горбка, зовнішньої частини передньої частини плечової кістки. Великий горбок схожий на м'яч для гольфу на трійнику.

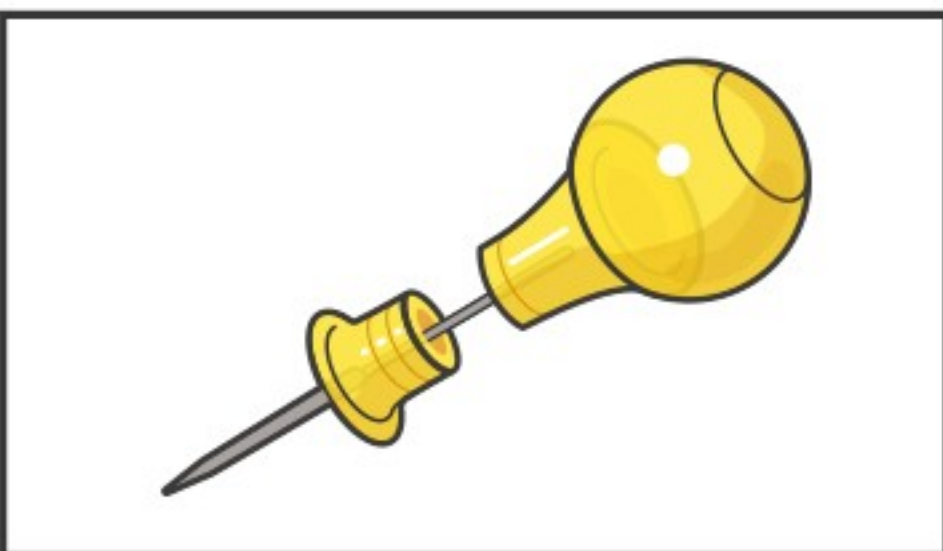

**07** Знайдіть відповідну Внутрішньокісткова голка EZ-IO. Якщо використовується механічний драйвер, буде клацання від магнітного кріплення.


**ПРИМІТКА.** Жовтий - це дорослий розмір EZ-IO. Пройдіть подальше навчання щодо правильного вибору внутрішньокісткової голки EZ-IO. Успіх може визначатися багатьма факторами.

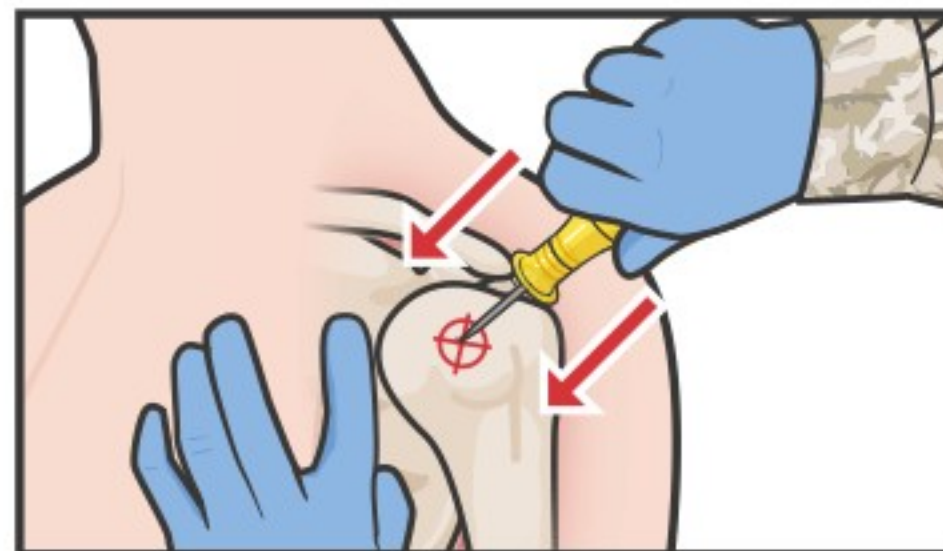

**08** Підготуйте ручну внутрішньокісткову голку EZ-IO, знявши запобіжний ковпачок.

Якщо ви використовуєте електродріль, увімкніть її на короткий час, міцно тримаючи запобіжний ковпачок.

**ВАЖЛИВО** - Тримайте пальці подалі від голки.

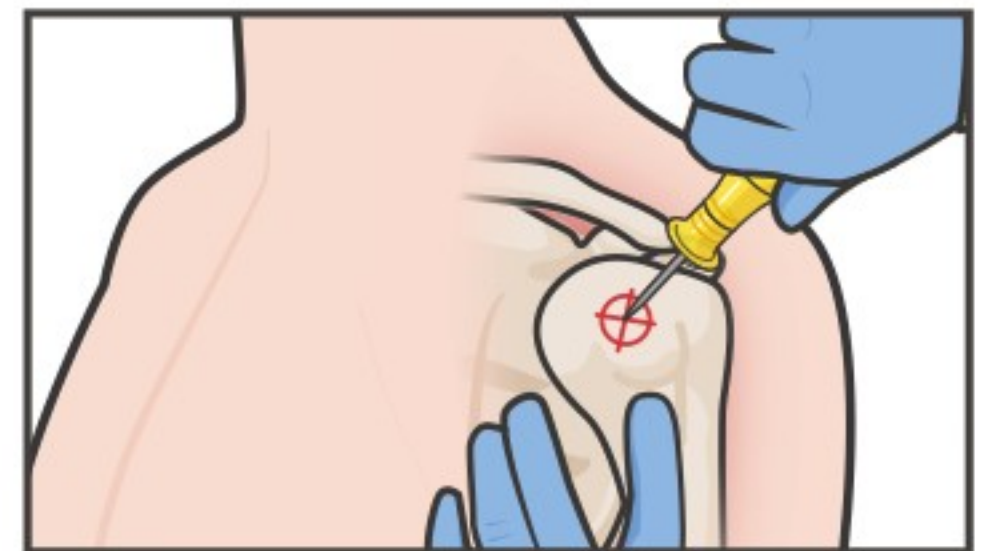

**09** Тримайте механічний драйвер або голку в домінуючій руці, тримаючи іншу руку непорушно біля місця розміщення.

**10** Внутрішньокісткова голка EZ-IO драйвер або голка повинні бути під кутом 45 градусів до площини кінцівки.

**ПРИМІТКА.** Тримайте кінцівку пораненого нерухомо під час процедури не домінуючою рукою.

продовження на наступній сторінці...