

Шина для іммобілізації таза

Pelvic Compression Device (PCD)



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомоги.

Важливо. Використання Шина для іммобілізації таза не перешкоджає використанню Вузовий турнікет.



01 Спорожніть кишені пораненого та вийміть усі предмети навколо талії.


Якщо можливо, направте помічника стабілізувати зону вручну.




02 Почніть із пораненого на спині, не завдаючи подальших травм.



03 ШУКАЙТЕ, чи немає деформацій, синців, саден, проколів, опіків, рваних ран. ВАЖЛИВО, обережно ПОМАЦАТИ на предмет болючості, нестійкості, крепітації.

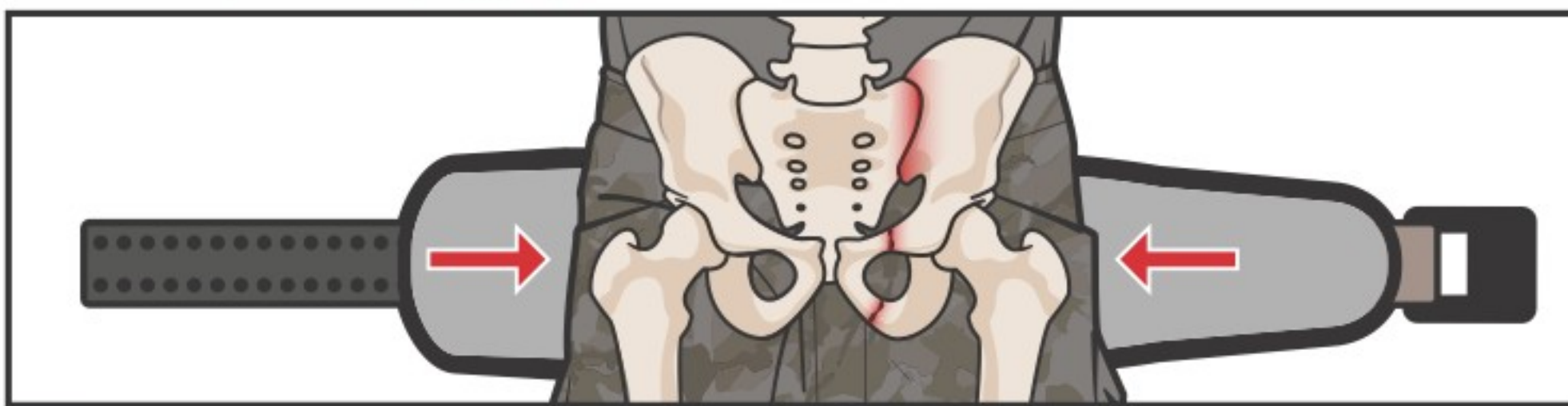

04 Розмістіть Шина для іммобілізації таза позаду ніг і підніміть його до рівня верхньої зовнішньої стегнової кістки.

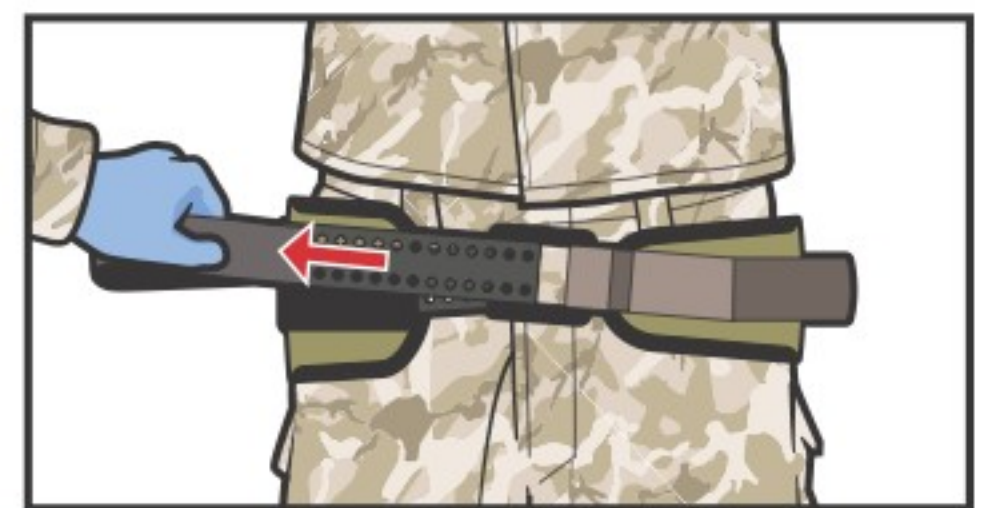

05 Пропустіть ремінь через пряжку та протягніть, усуньте будь-яку слабину.




06 Потягніть обидва ремені в протилежних напрямках, доки не почувете та не відчуєте фіксацію пряжки.

Примітка. Навіть при правильному накладенні пряжка не завжди клацає.



07 Підтримуйте натяг і притисніть ремені до поверхні Шина для іммобілізації таза щоб закріпити.

Примітка. Коли ремені закріплені, може відбутися другий клацання, це нормально.

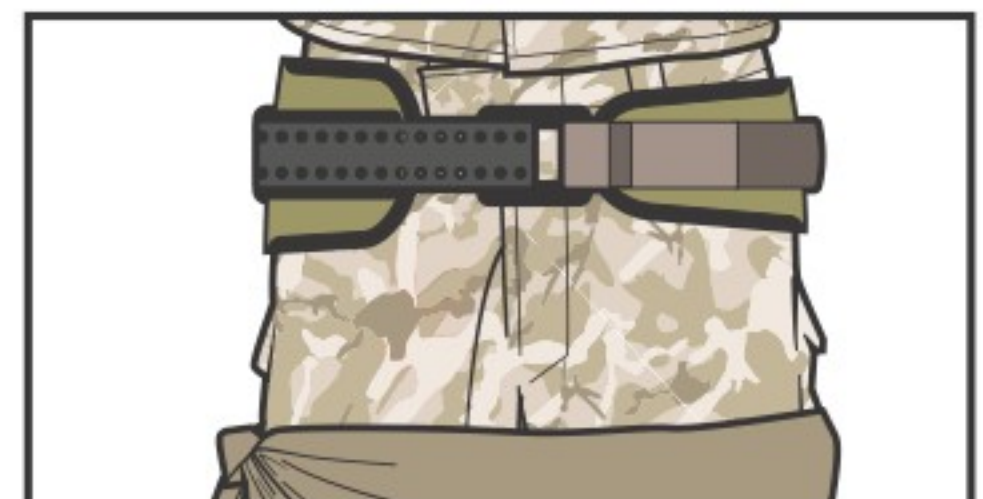

08 Зв'яжіть верхню частину ніг пораненого разом, щоб мінімізувати зовнішню ротацію стегон



06 Спостерігайте за пораненим на наявність кровотечі, спостерігаючи за ознаками шоку (змінений психічний стан без травми голови та/або слабкий радіальний пульс). Внутрішньої кровотечі не видно.

Примітка. Якщо є ознаки шоку/внутрішньої кровотечі, змініть положення шини, щоб знерухомити таз, якщо це дозволяє тактична ситуація.



07 ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.