












КОНВЕРСІЯ ТУРНІКЕТА



ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

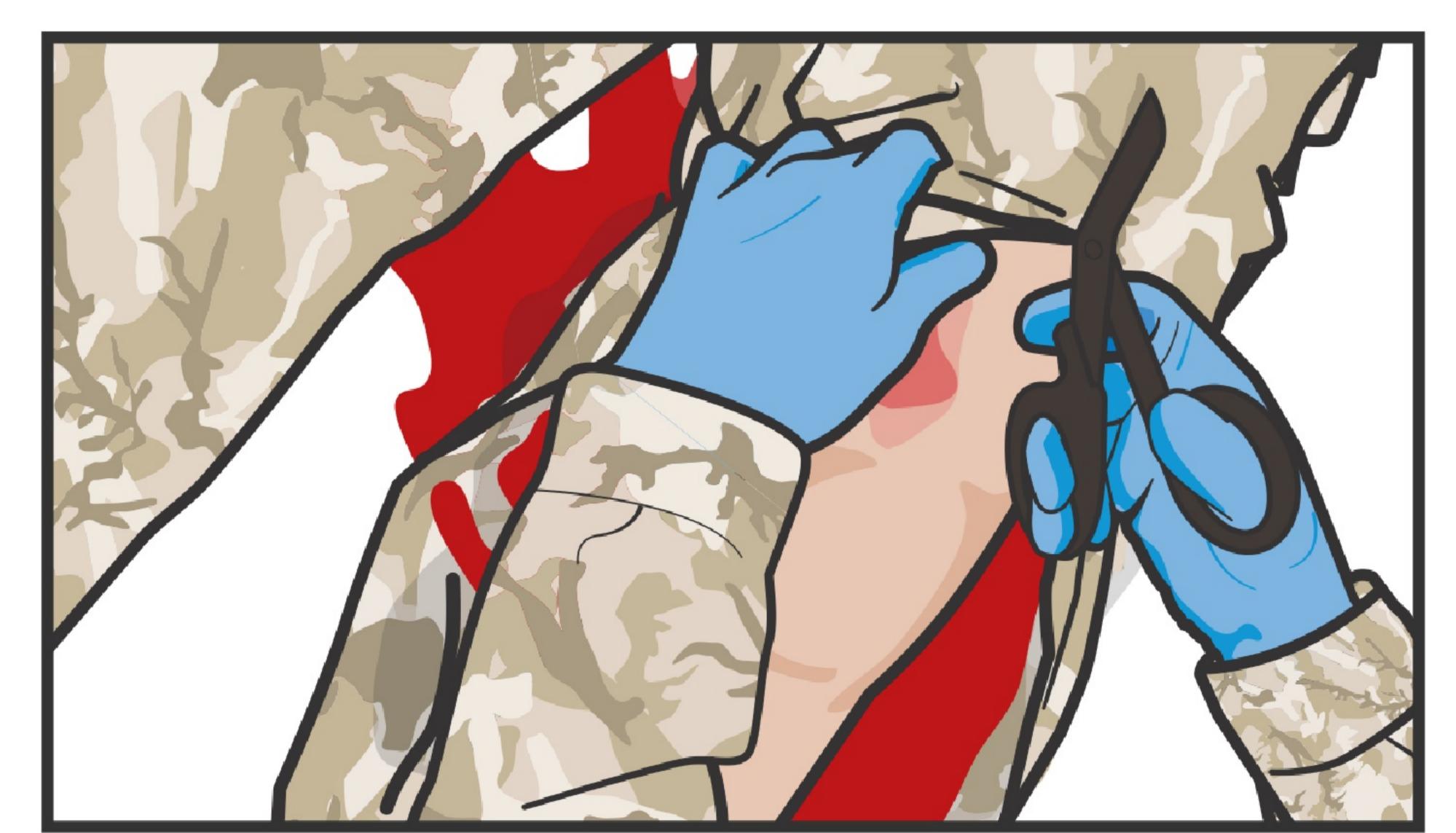


РОЗКРИЙТЕ місце поранення, якщо цього не було зроблено раніше.

ПРИМІТКА: За потреби зніміть одяг та спорядження.




Вийміть кровоспинний перев'язувальний матеріал або бинт зі стерильної упаковки.

ПРИМІТКА: Якщо гемостатична пов'язка або бинт недоступні, використовуйте

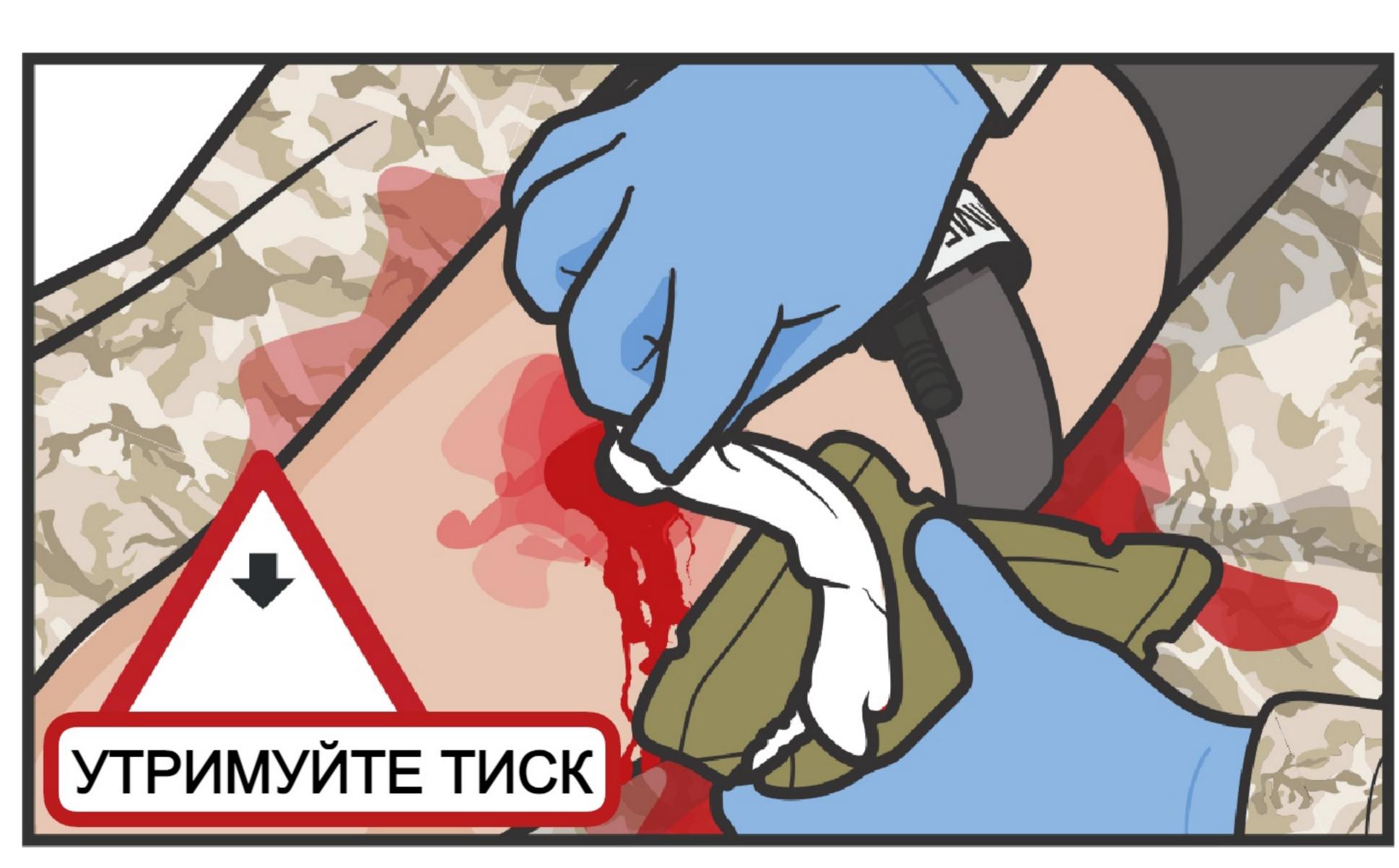

Щільно затампонуйте рану гемостатичним матеріалом.

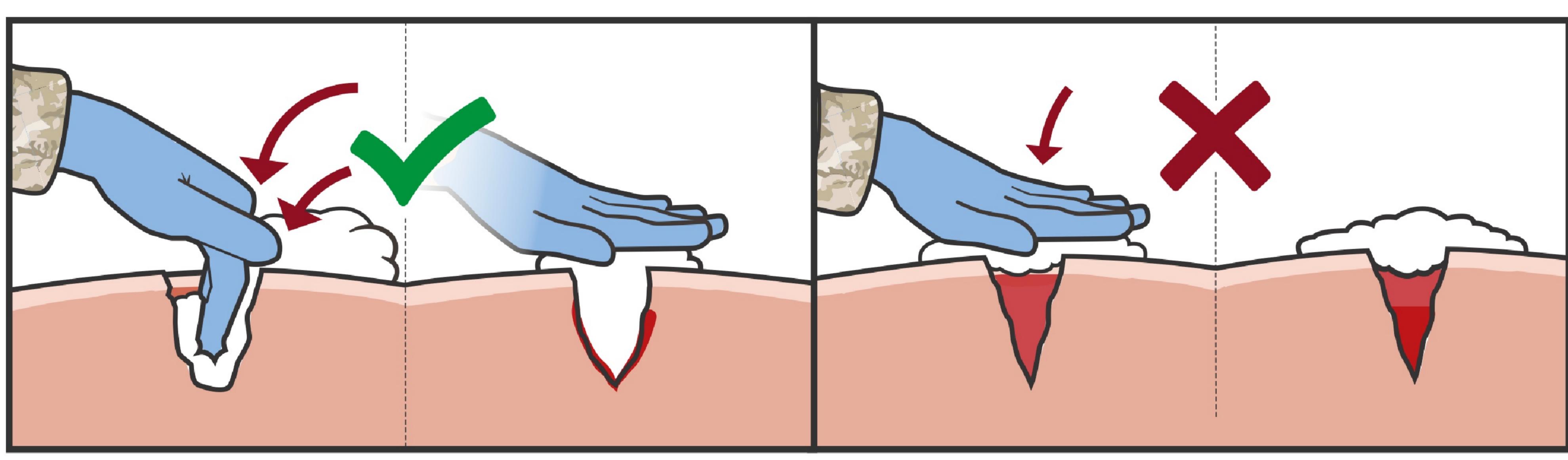

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 3: Заповніть та туго затампонуйте всю порожнину 03.2 рани, підтримуючи сильний тиск на рану. Може знадобитися більш, ніж одна гемостатична пов'язка або бинт.



Переконайтеся, що гемостатична пов'язка або бинт виступають на 3-5 см над шкірою.

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 4: Якщо

гемостатична пов'язка або бинт не

виступають на 3-5 см над шкірою,

накладіть додаткову кровоспинну

ПРИМІТКА ДО КРОКУ 4: Якщо у рані є стороннє тіло,

чисту суху тканину.





Після тампонування рани 05 продовжуйте з силою тиснути на рану руками протягом щонайменше 3 хвилин.



Вийміть компресійний бандаж з 06 упаковки.



Помістіть подушечку компресійного бандажа безпосередньо на рану або на попередньо накладену гемостатичну пов'язку, продовжуючи здійснювати прямий тиск на рану.