













## НАКЛАДАННЯ ТУРНІКЕТА З ВОРОТКОМ І ПРЯЖКОЮ ДВОМА РУКАМИ

(ДОПОМОГА ПІД ВОГНЕМ, CUF)

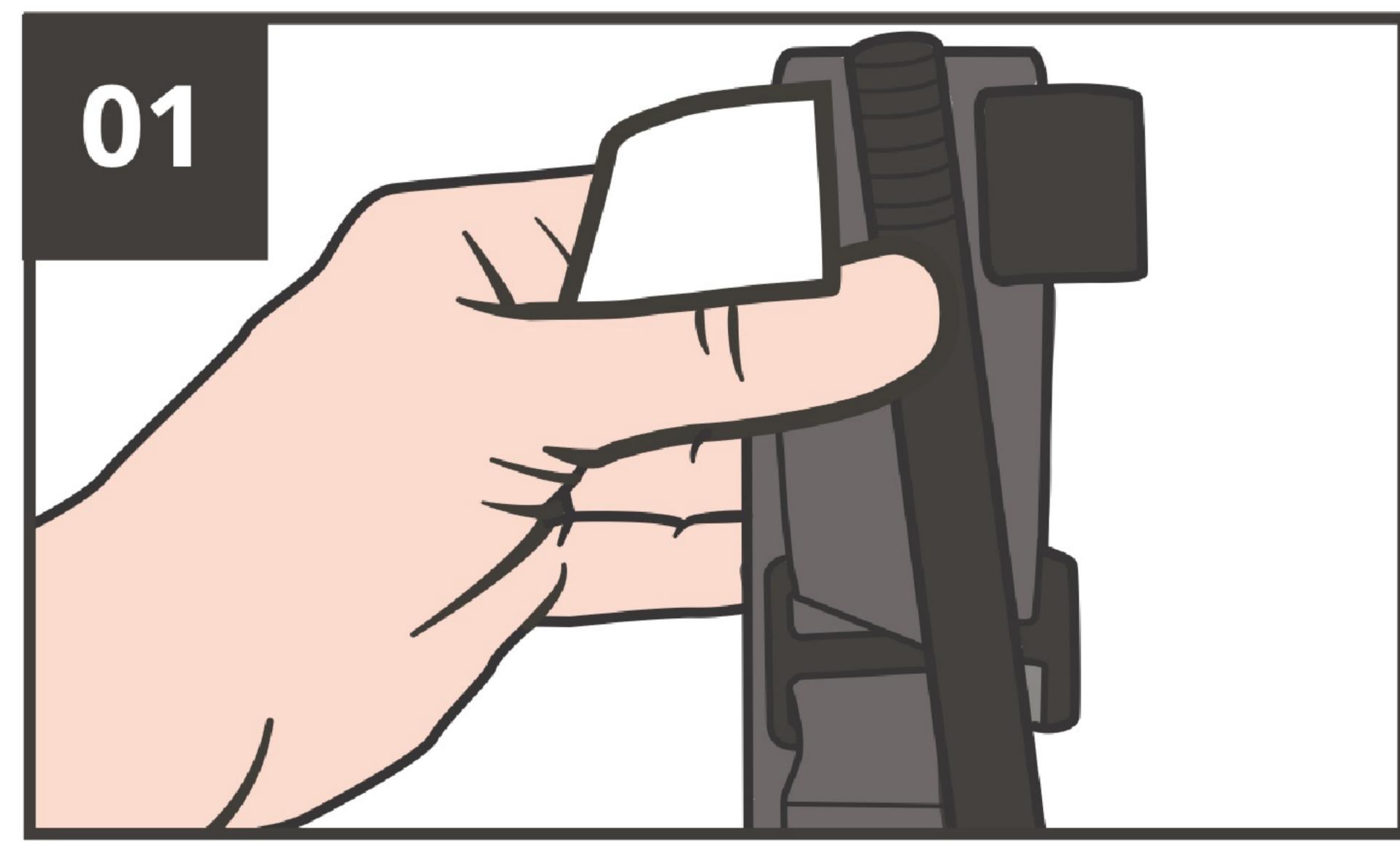


ДІСТАНЬТЕ турнікет з тактичної індивідуальної аптечки (JFAK) та/або підсумка.

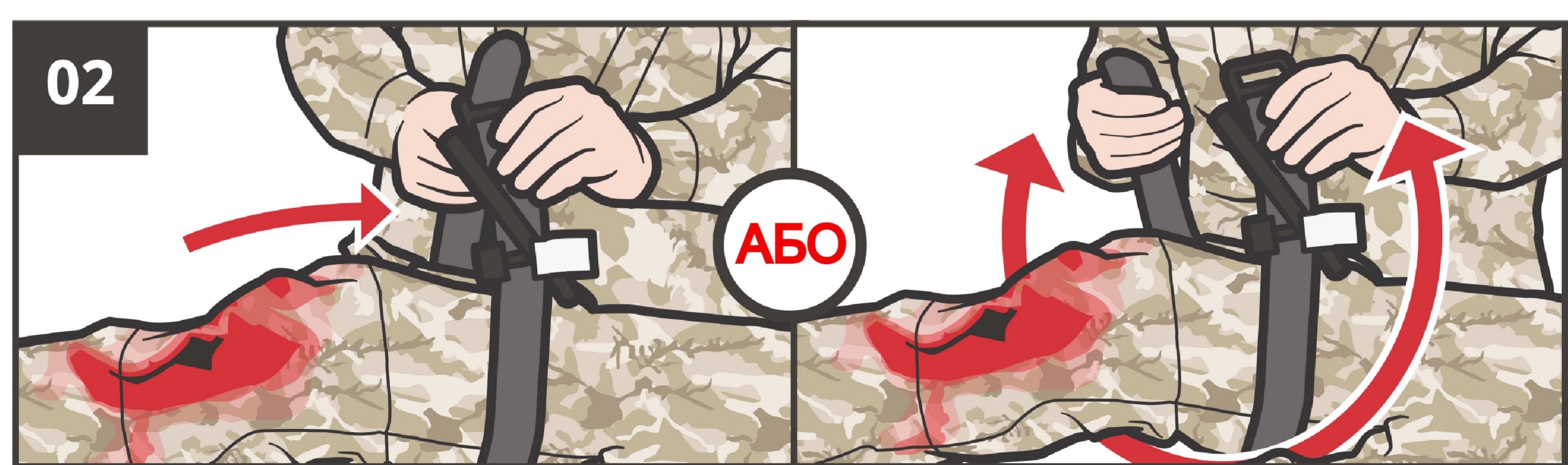


ПРОСУНЬТЕ поранену кінцівку крізь петлю, яку утворює самоклеюча стрічка (турнікет у вигляді замкнутої петлі).

ОБГОРНІТЬ ремінь навколо кінцівки; просуньте його кінець крізь отвір пряжки.

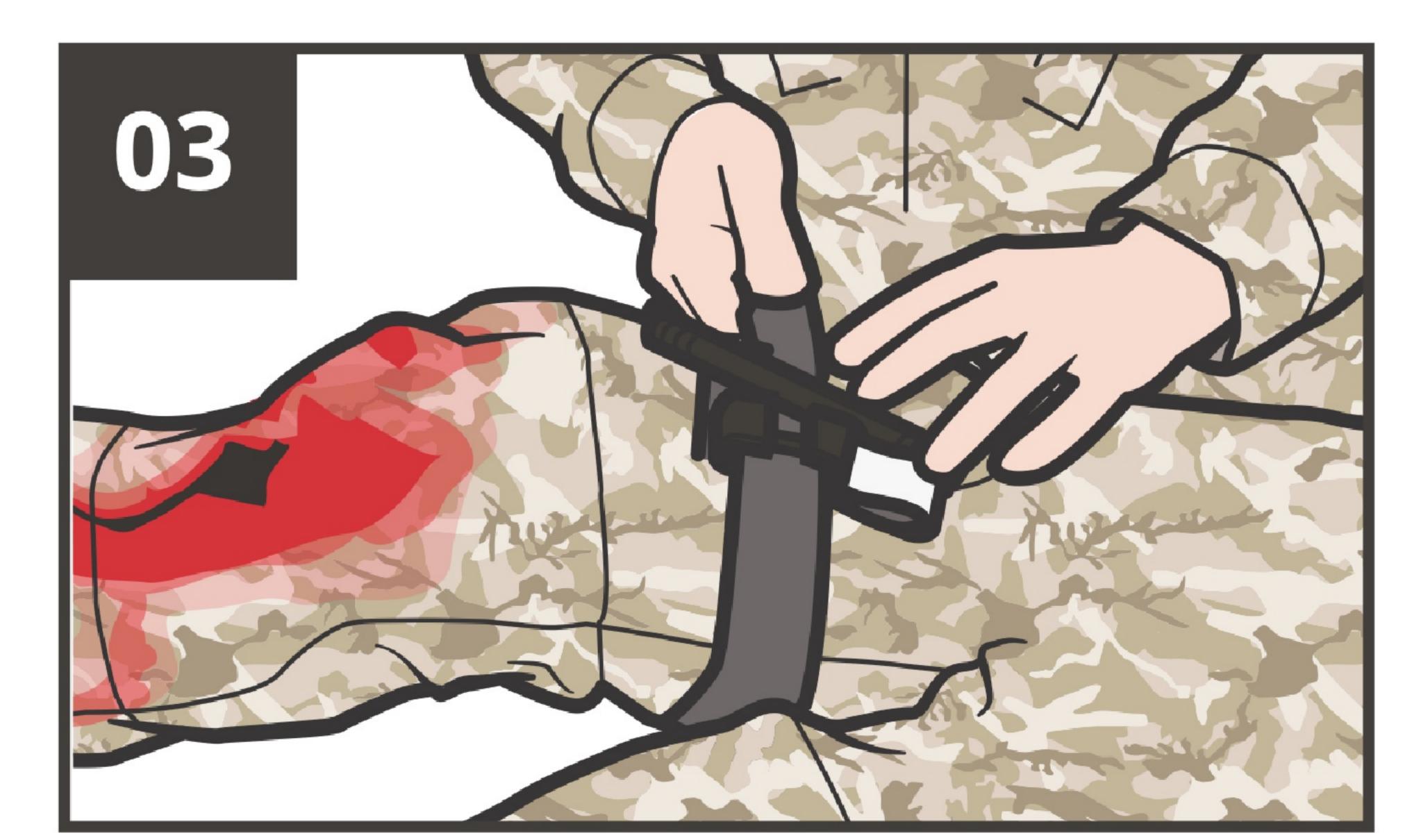


РОЗМІСТІТЬ турнікет над місцем кровотечі, високо на кінцівці поверх одягу/уніформи.

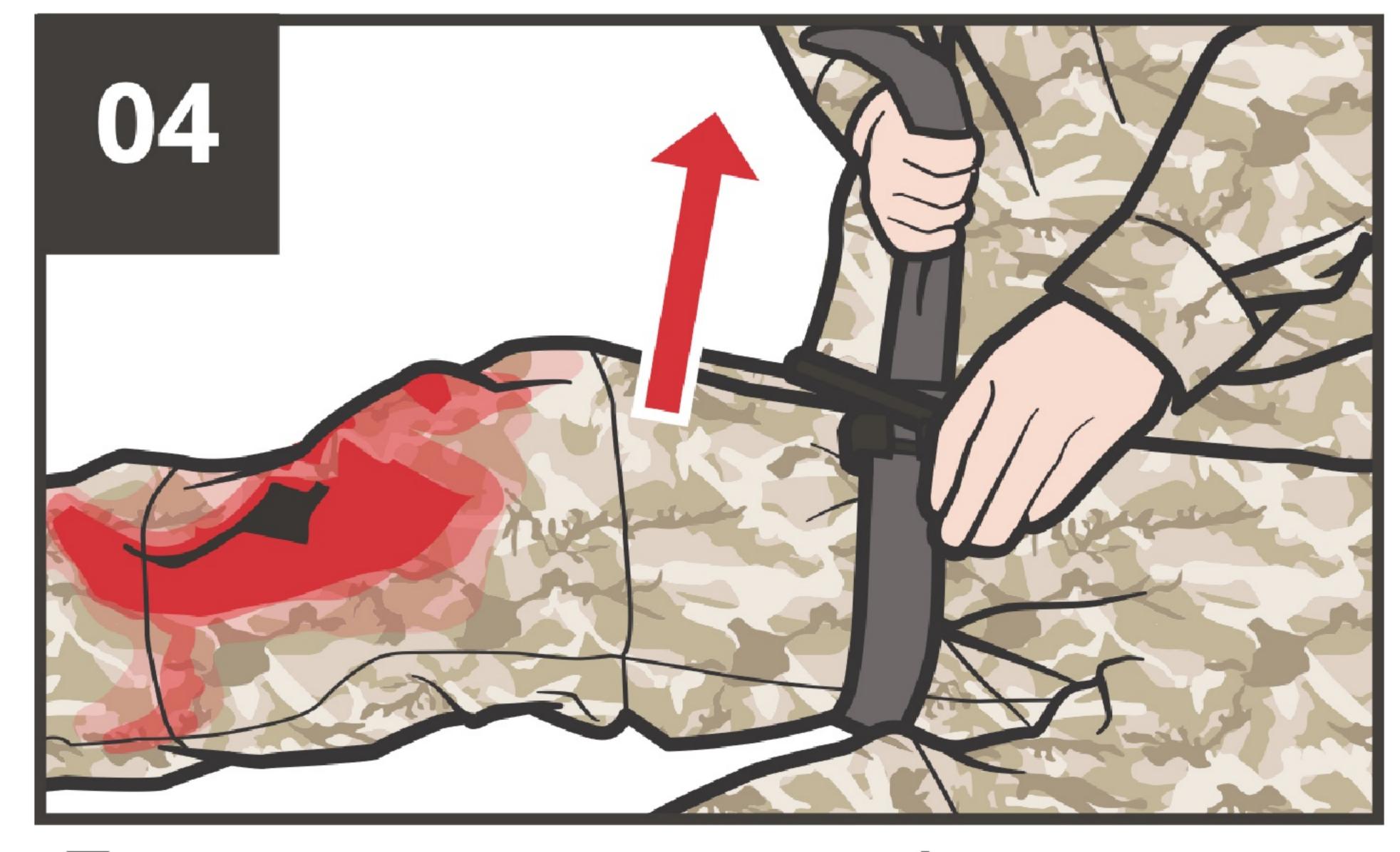

Перед затягуванням турнікета та закручуванням воротка ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що стрічка протягнута крізь пряжку без провисань.




ЗАКРУЧУЙТЕ вороток до тих пір, поки кровотеча не зупиниться (кроки 1-5 слід виконати менш, ніж за 1 хв).

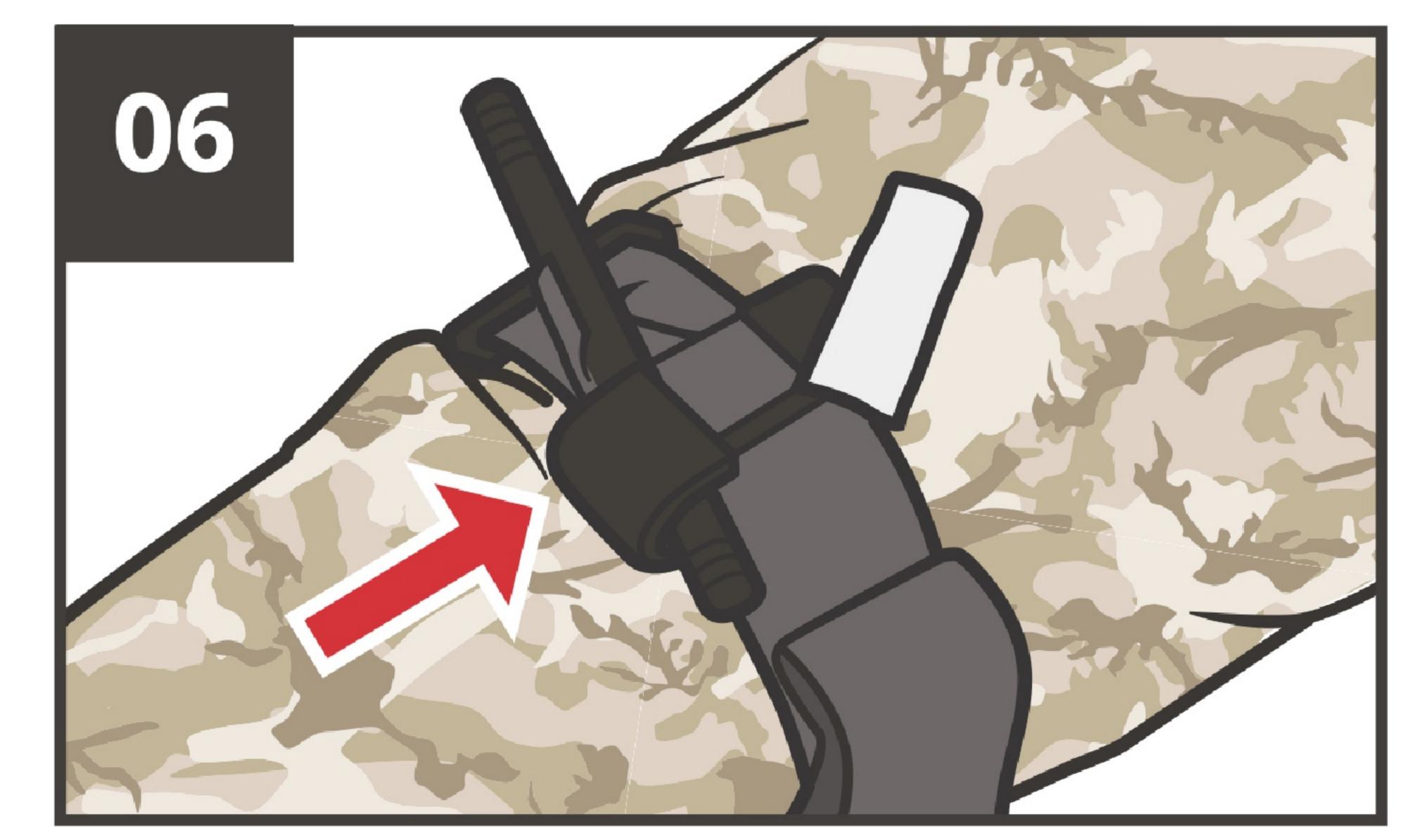


ЗАКРІПТЬ вороток за допомогою фіксатора.



ПРОВЕДІТЬ самоклеючу стрічку навколо воротка та між фіксуючими скобами.

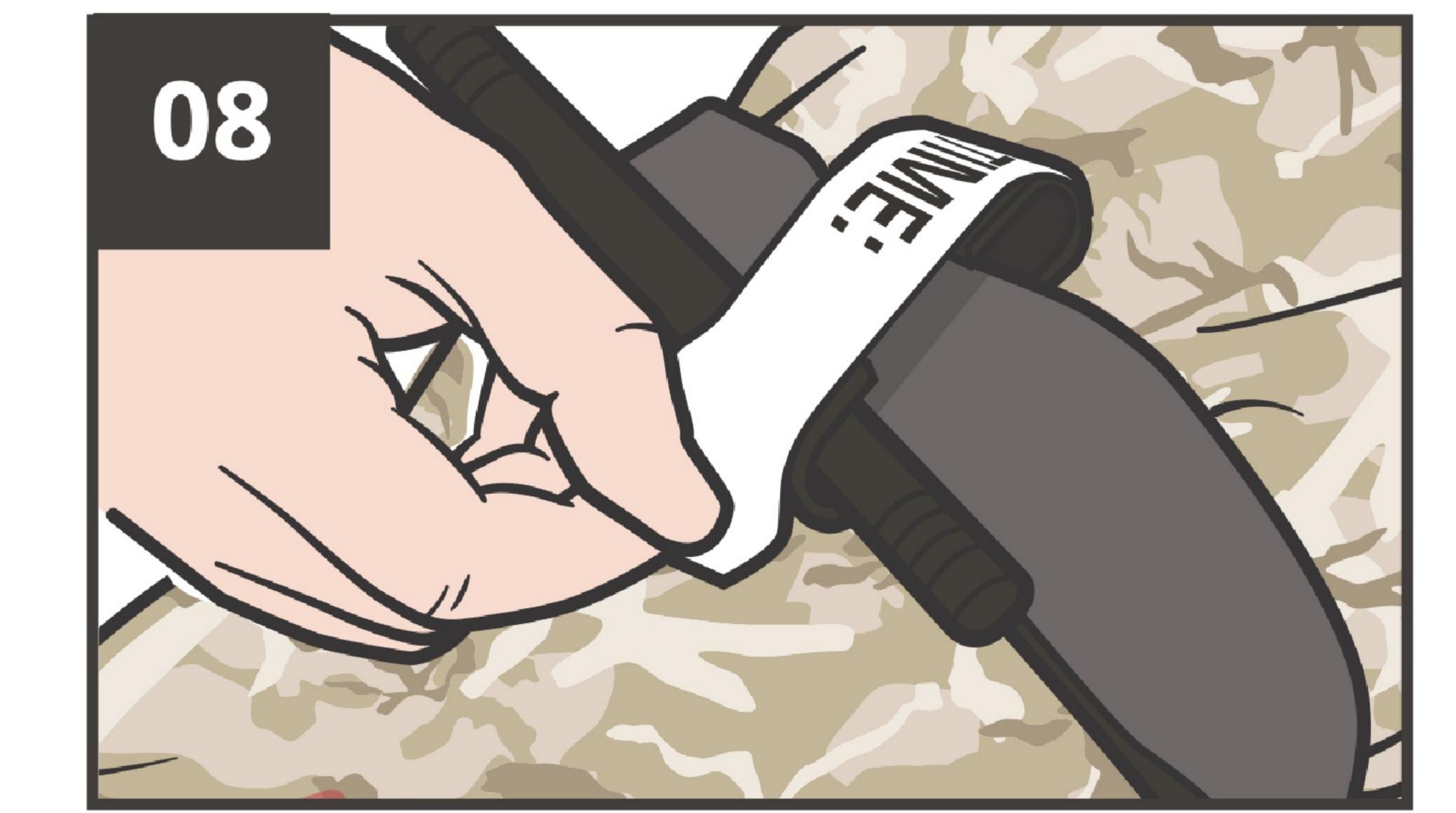

ЗАКРІПІТЬ усе фіксуючою стрічкою.

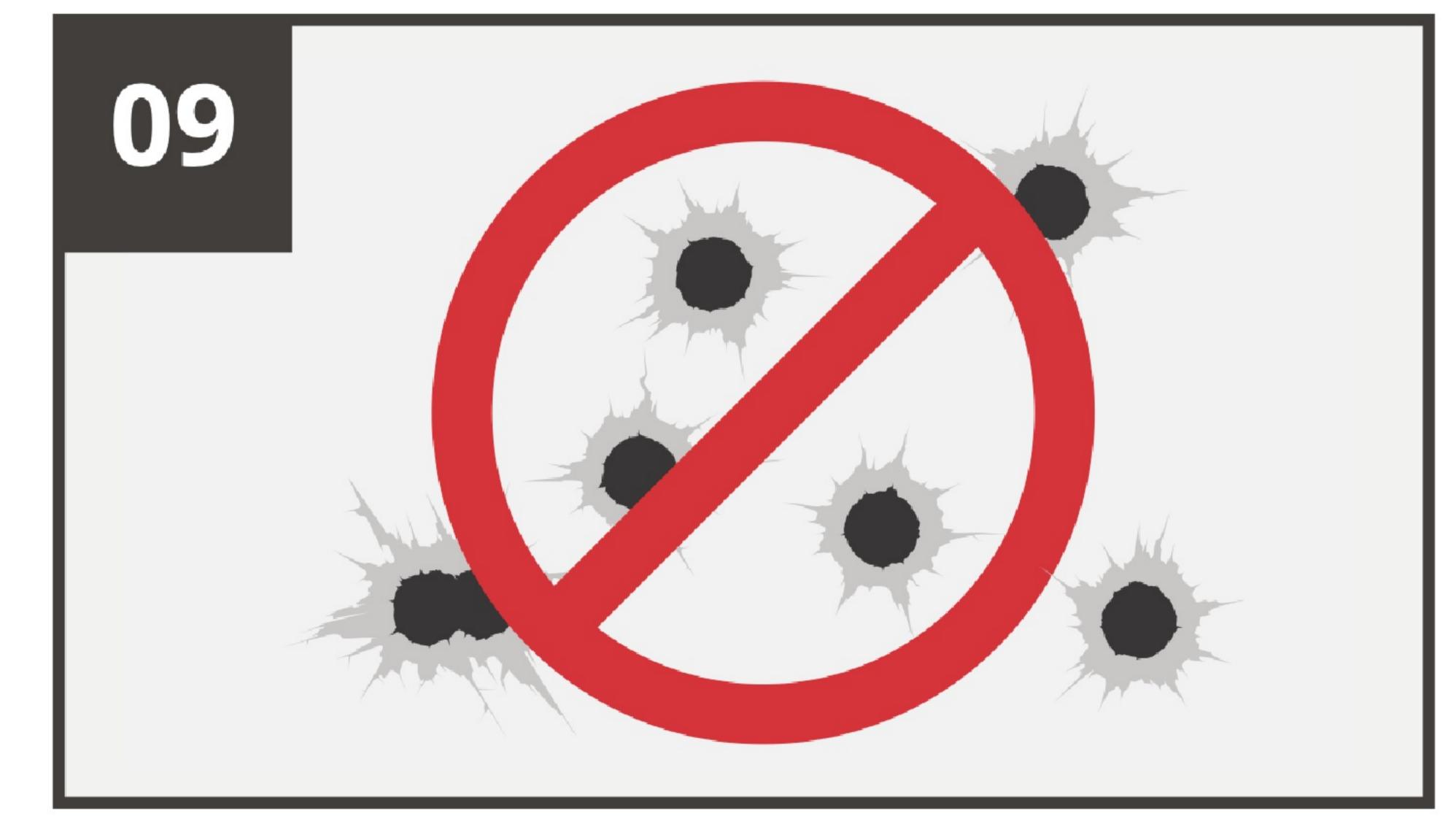

Якщо відсутні ознаки інших масивних кровотеч, ПЕРЕМІСТІТЬ ПОРАНЕНОГО В УКРИТТЯ.