




Вузловий турнікет JETT

Junctional Emergency Treatment Tool (JETT) Tourniquet


Продовження зі сторінки 1




10 На ремінцях відрегулюйте дві подушечки до верхньої частини стегнової артерії, трохи нижче пахових зв'язок.

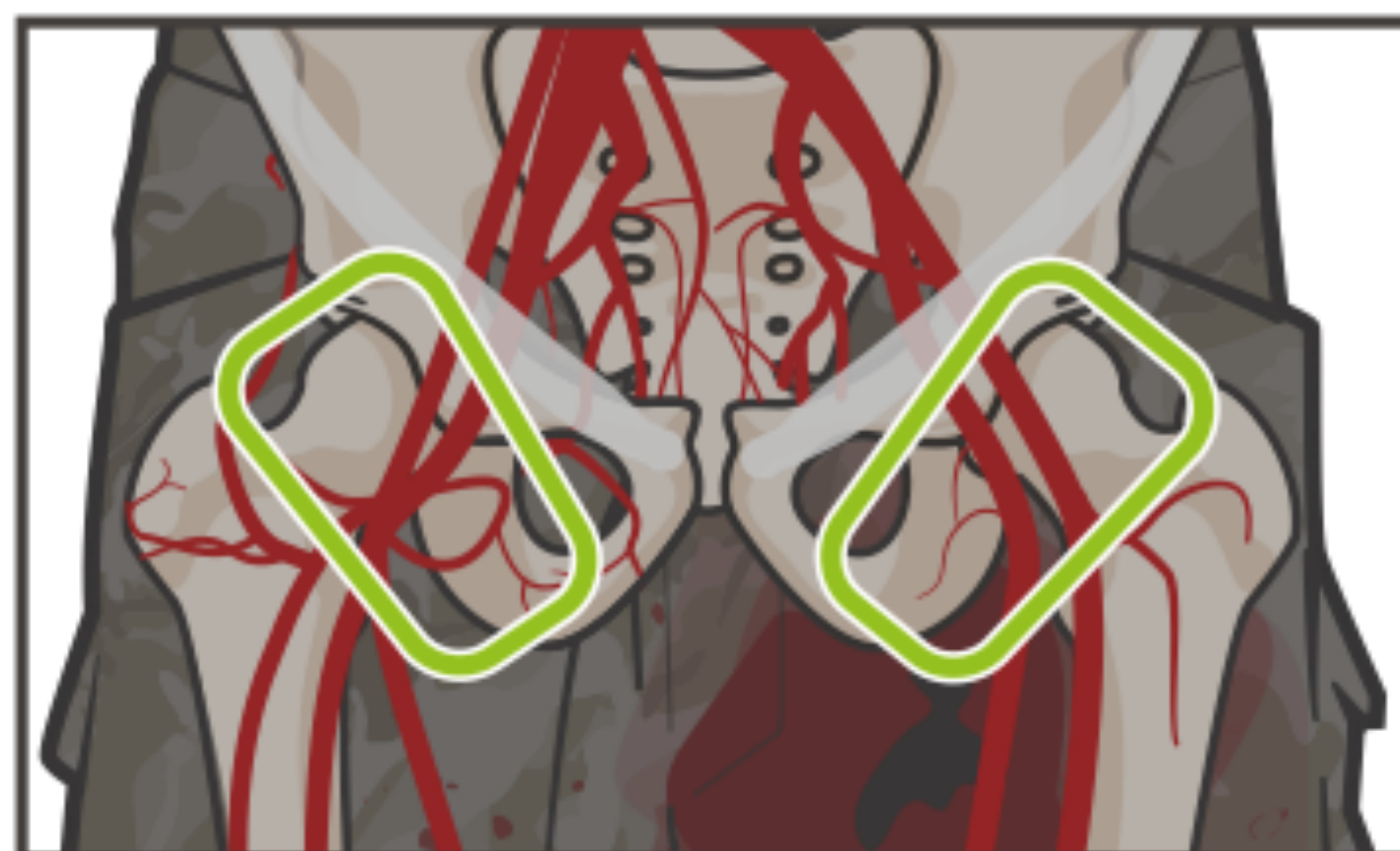

11 Відрегулюйте притисні подушечки так, щоб їх довгий охоплення було вирівняно паралельно пахвинній борозні. Це буде прибіл. під кутом 30 градусів назовні, щоб статеві органи були вільними.

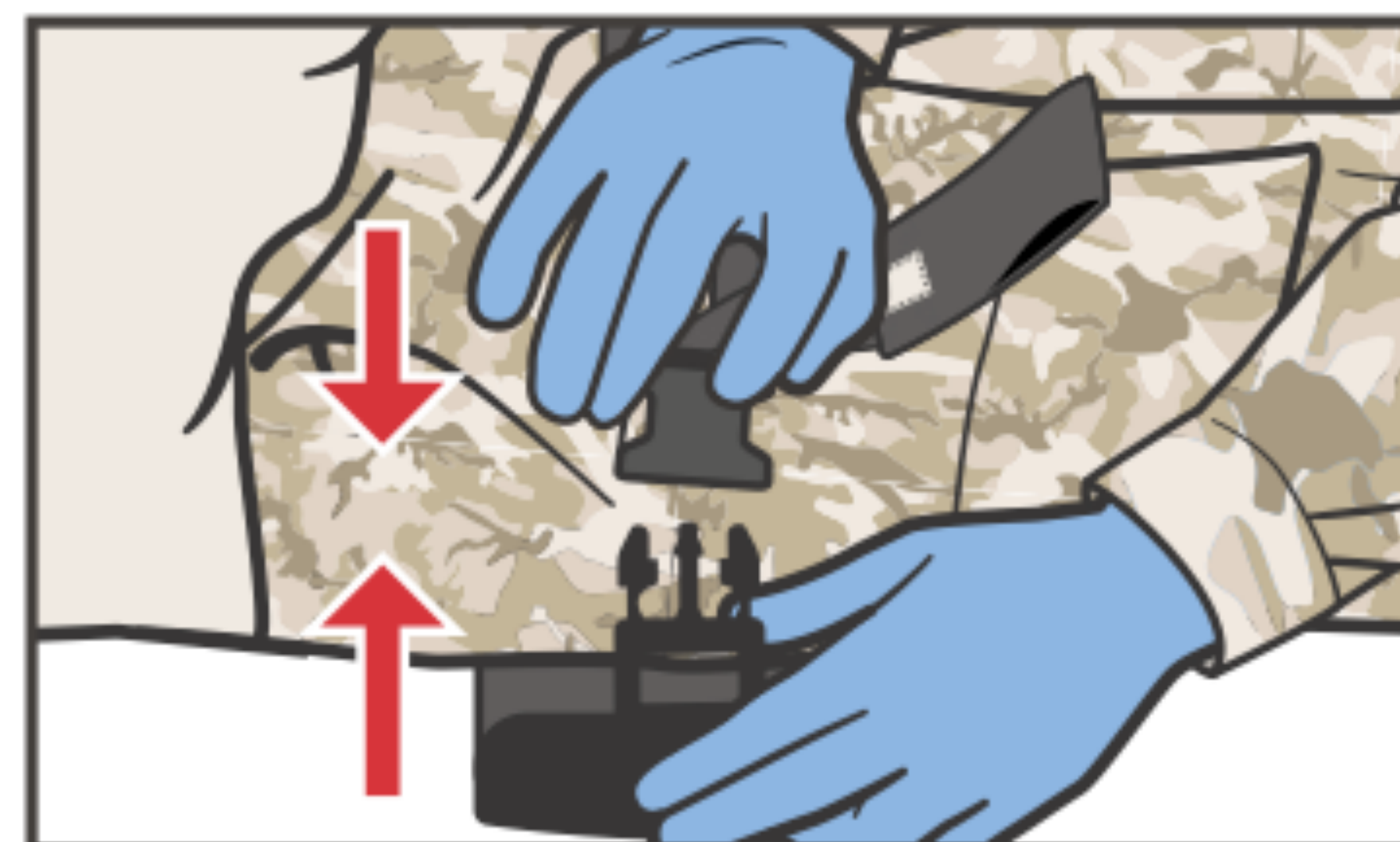

12 Приєднайте жіночий кінець до чоловічого кінця з'єднувача ременя. Пролунає клацання.

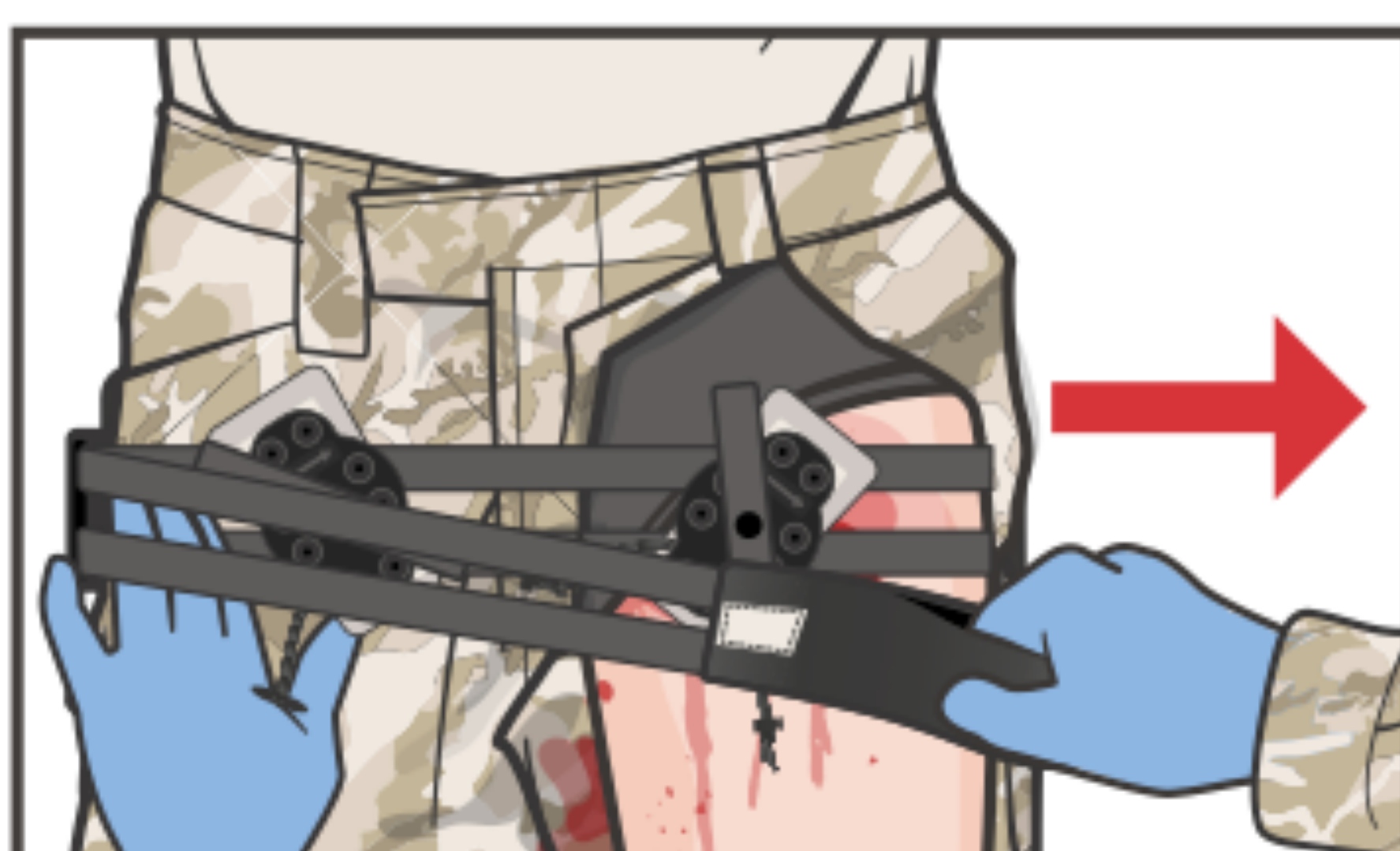

13 Потягніть вільний кінець ременя за допомогою ручки-петлі, щоб усунути провисання.

ПРИМІТКА. Під час затягування стабілізуйте ремінь іншою рукою.




14 Переоцініть розміщення прокладки, щоб переконатися в її правильному розташуванні над стегною артерією трохи нижче пахової зв'язки під кутом 30 градусів.




15 Затягніть різьбову ручку, повертаючи її за годинниковою стрілкою, а іншою рукою стабілізуйте колодку, утримуючи її на місці. Затягніть, поки не зупиниться кровотеча.

КРОК 15. При інтактній кінцівці підтвердити відсутність дистального пульсу.

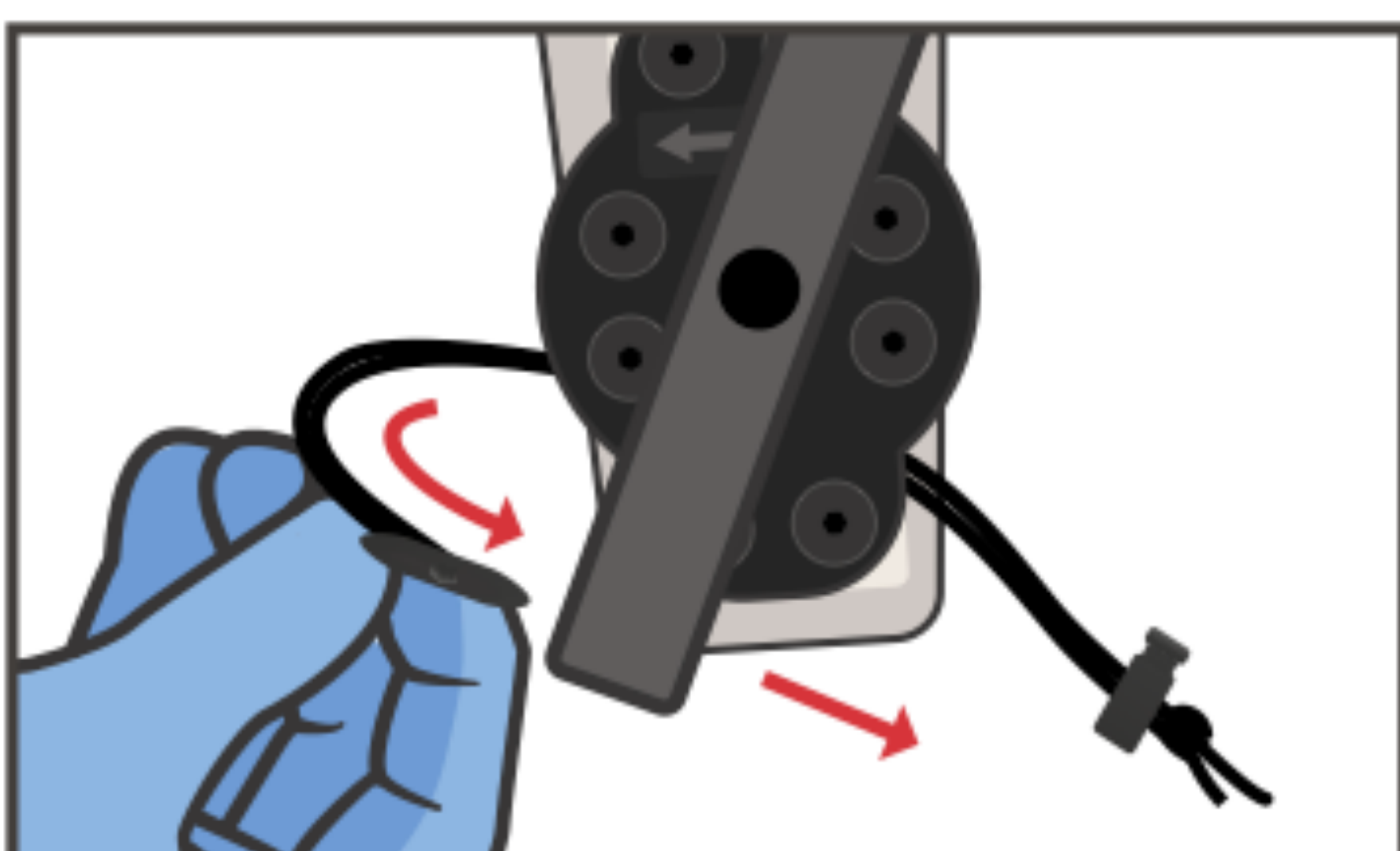

16 Вставте затискач через отвір у різьбовій ручці та міцно затягніть його на базовій пластині, щоб закріпити ручку на місці.

КРОК 16. Якщо травма двостороння, повторіть процес з іншого боку.

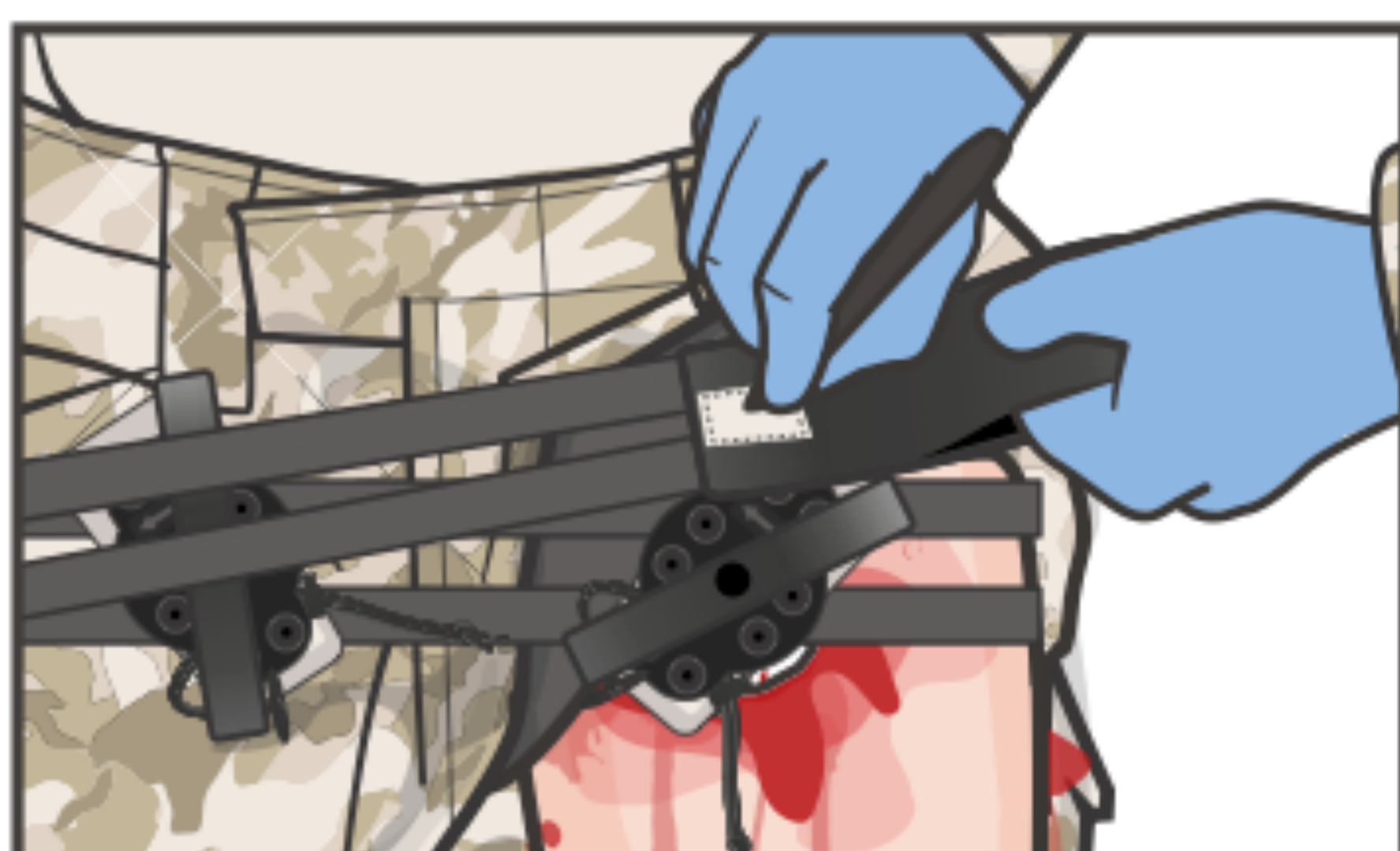

17 Задokumentуйте час застосування на петлі ручки або на обличчі пораненого.



18 ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.

ВАЖЛИВО – часто **МОНІТОРУЙТЕ** пацієнта під час транспортування, щоб переконатися, що пристрій і накладки для тиску залишаються на місці. Відрегулюйте відповідно, щоб контролювати кровотечу.