COMBAT PARAMEDIC/PROVIDER TACTICAL COMBAT CASUALTY CARE











ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЗАКРИТТЯ РАН

ПРИМІТКА: Пристрій для закриття ран можна використовувати в поєднанні з іншими методами зупинки кровотечі, а саме:

- 1. Тампонування рани : Якщо необхідно, тампонування рани може бути виконане до того, як на рану буде накладено пристрій для закриття ран.
- 2. Гемостатичні засоби : пристрій для закриття ран можна накладати на рану, яка була попередньо тампонована кровоспинним засобом. Гемостатичний засіб в такому випадку виймати не потрібно.
- 3. Перев'язка або бандаж : за бажанням можна накласти додатковий компресійний бандаж чи пов'язку на пристрій для закриття ран після його накладання на рану. Це захистить пристрій і зможе забезпечити додатковий тиск на рану, зменшуючи ймовірність утворення гематоми.




ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.

ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.


УВАГА: Не використовуйте в ділянці очей.

РОЗКРИЙТЕ місце поранення та огляньте джерело кровотечі. ПРИМІТКА: Можливо, вам буде потрібно зрізати одяг, щоб належним чином відкрити доступ до рани.


92 Якщо можливо, ЗАСТОСУЙТЕ ПРЯМИЙ ТИСК на джерело найбільш активної кровотечі.

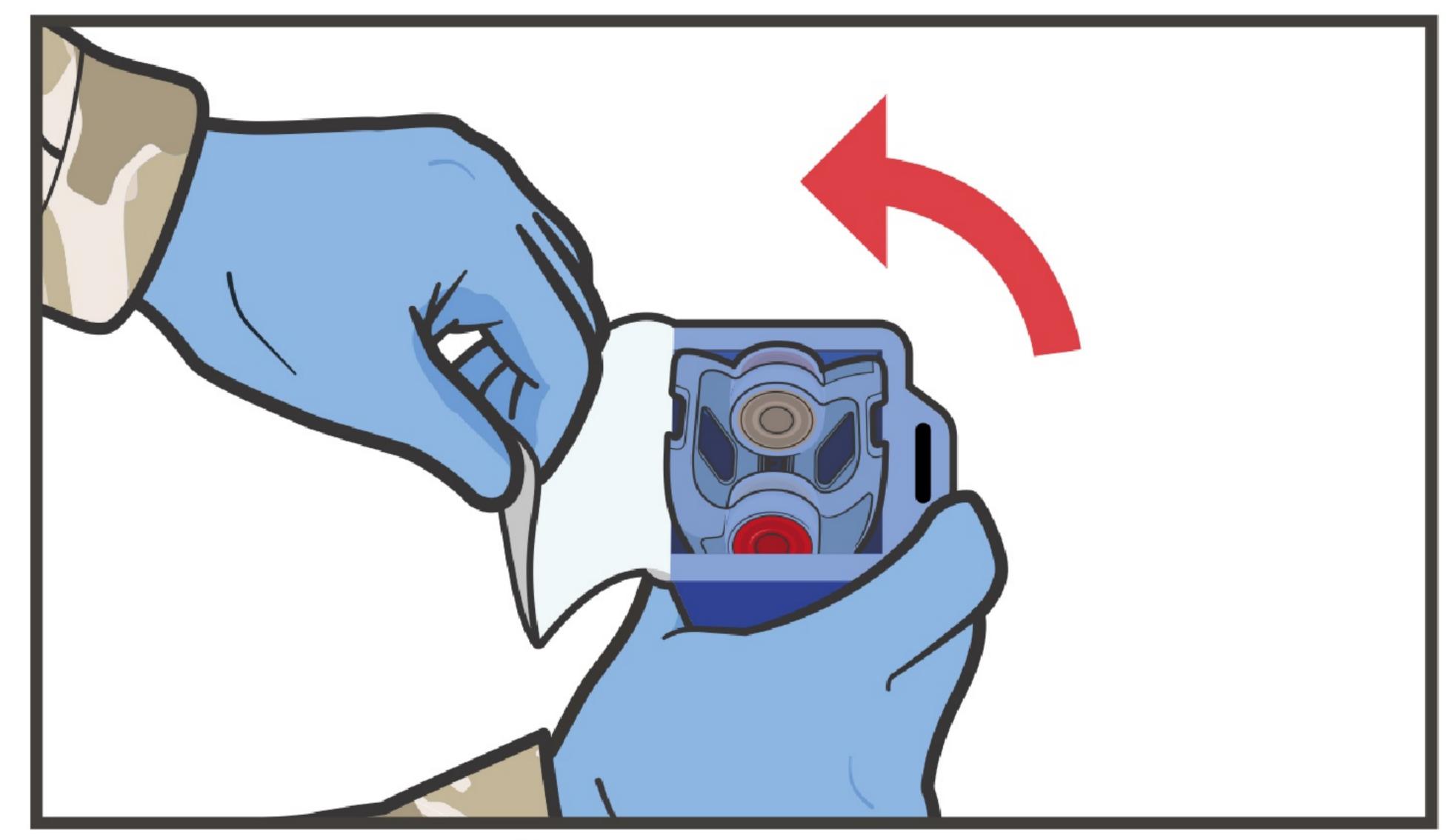


ВІДКРИЙТЕ стерильну упаковку, відклеївши один або обидва краї на верхній частині упаковки.

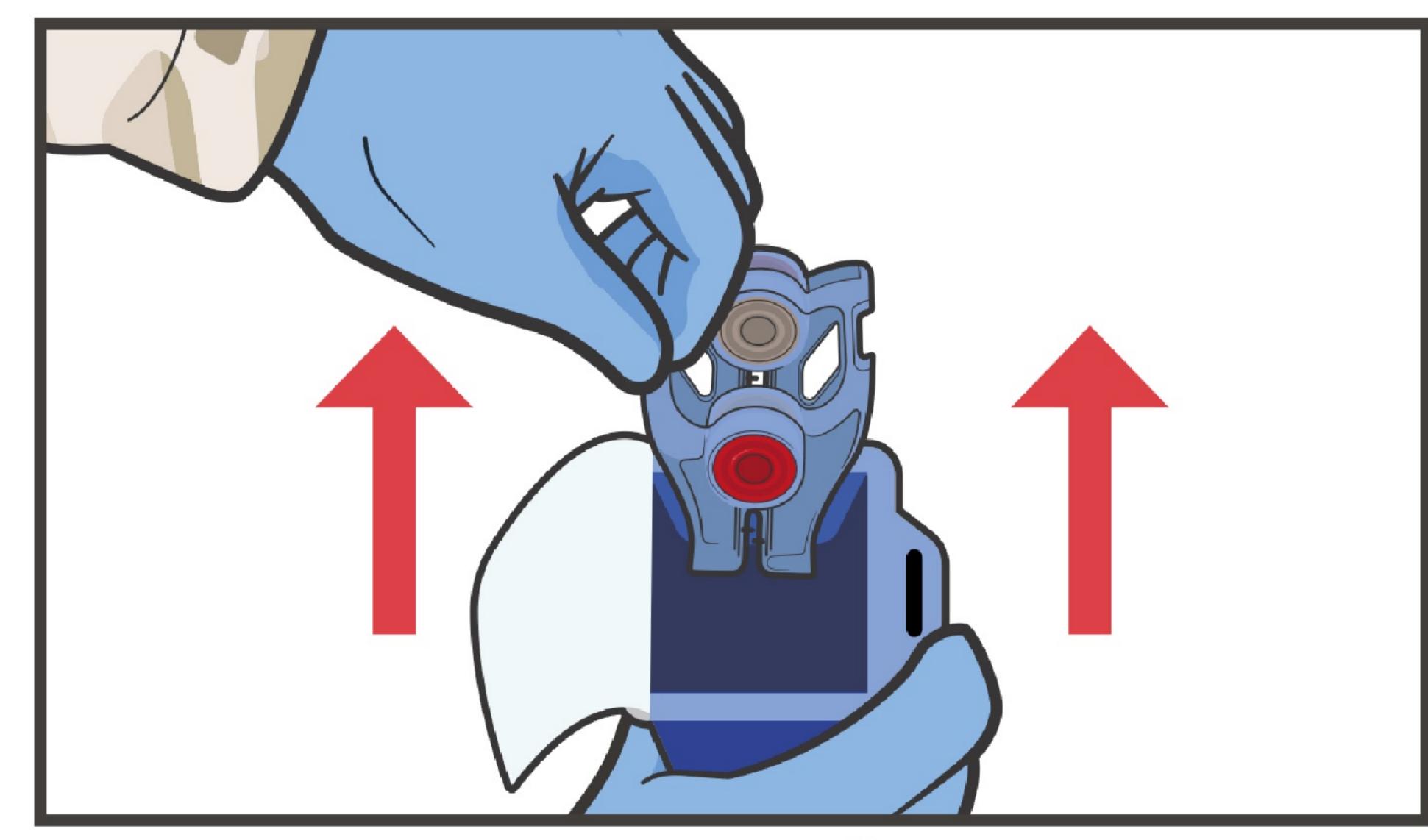


Однією рукою ВИЙМІТЬ пристрій для закриття ран з упаковки, піднявши його прямо вверх.

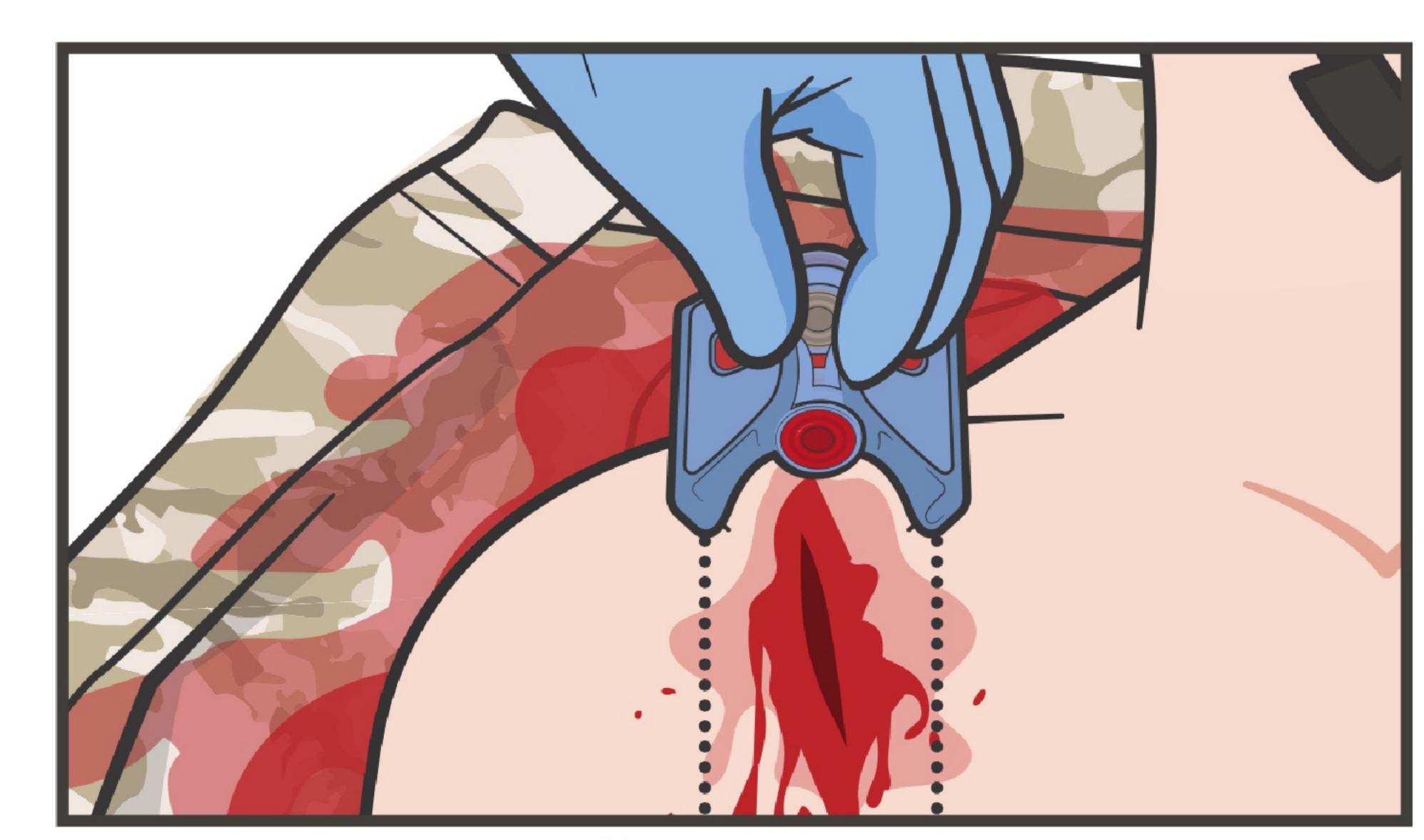


РОЗТАШУЙТЕ кінці голок пристрою для закриття ран паралельно (вздовж) країв рани.

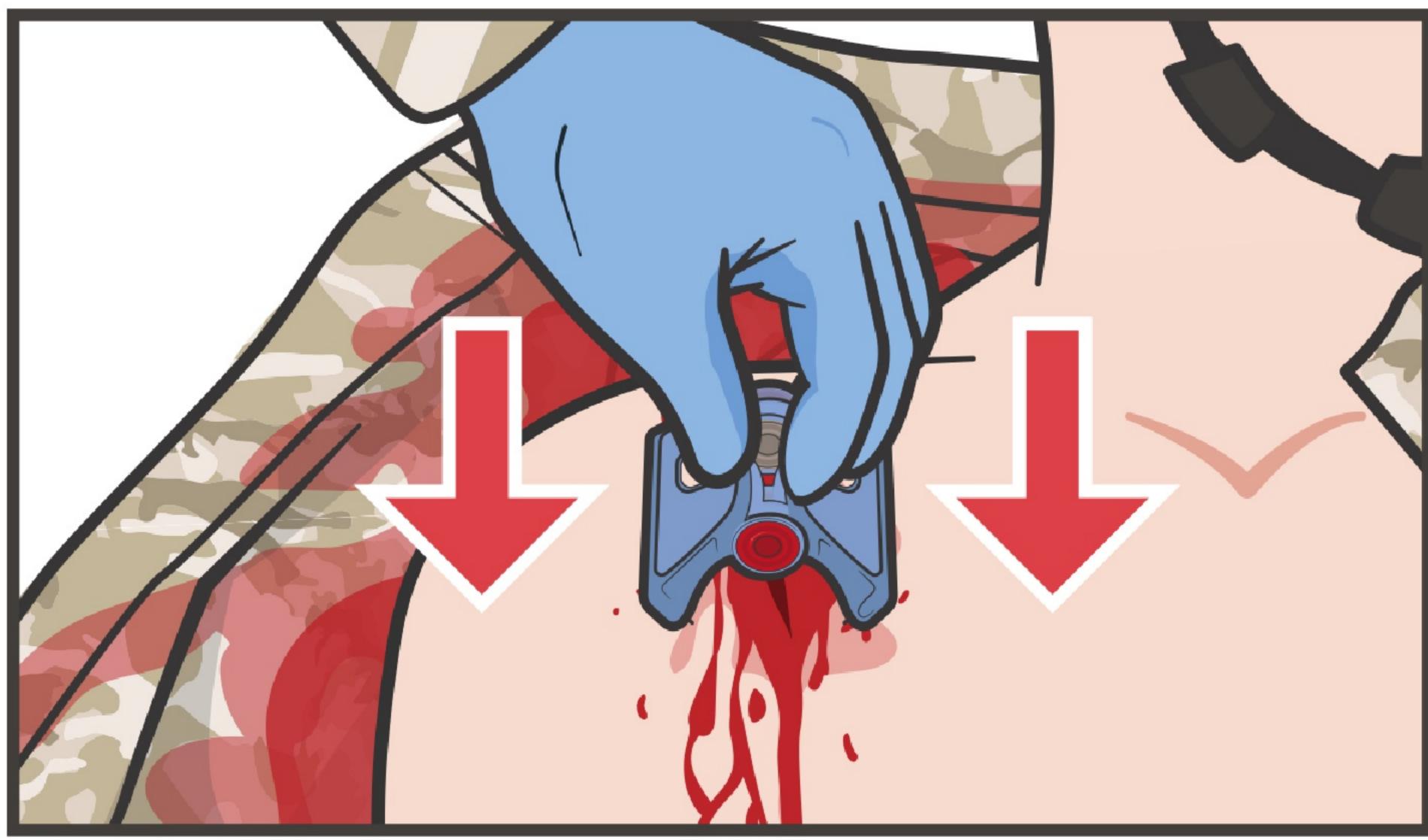

РОЗТАШУЙТЕ голки приблизно на відстані 1-2 см від країв рани з обох боків.

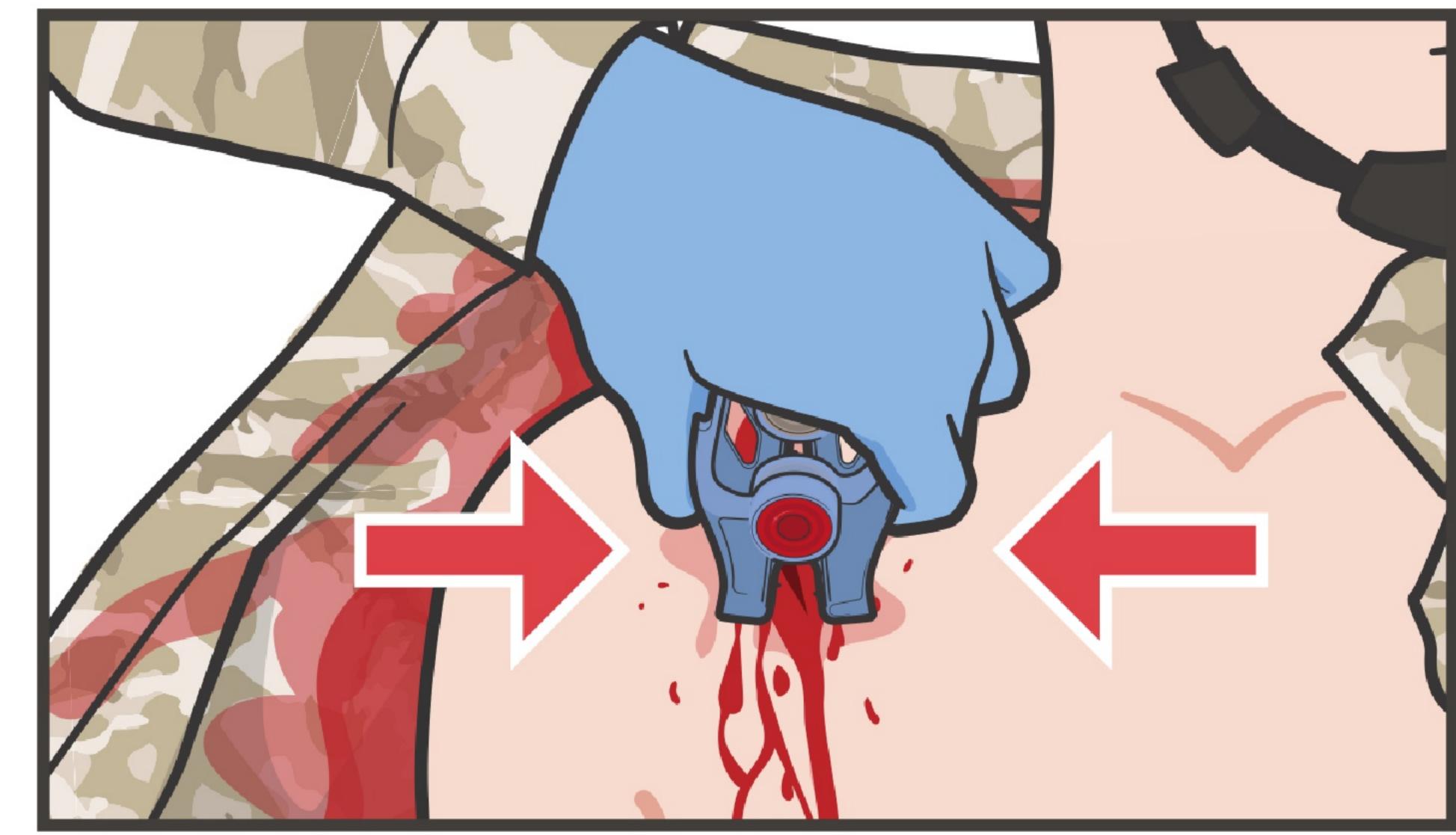


АКУРАТНО ВСТАВТЕ голки і закрийте пристрій, стиснувши його ручки та наблизивши їх одна до одної.

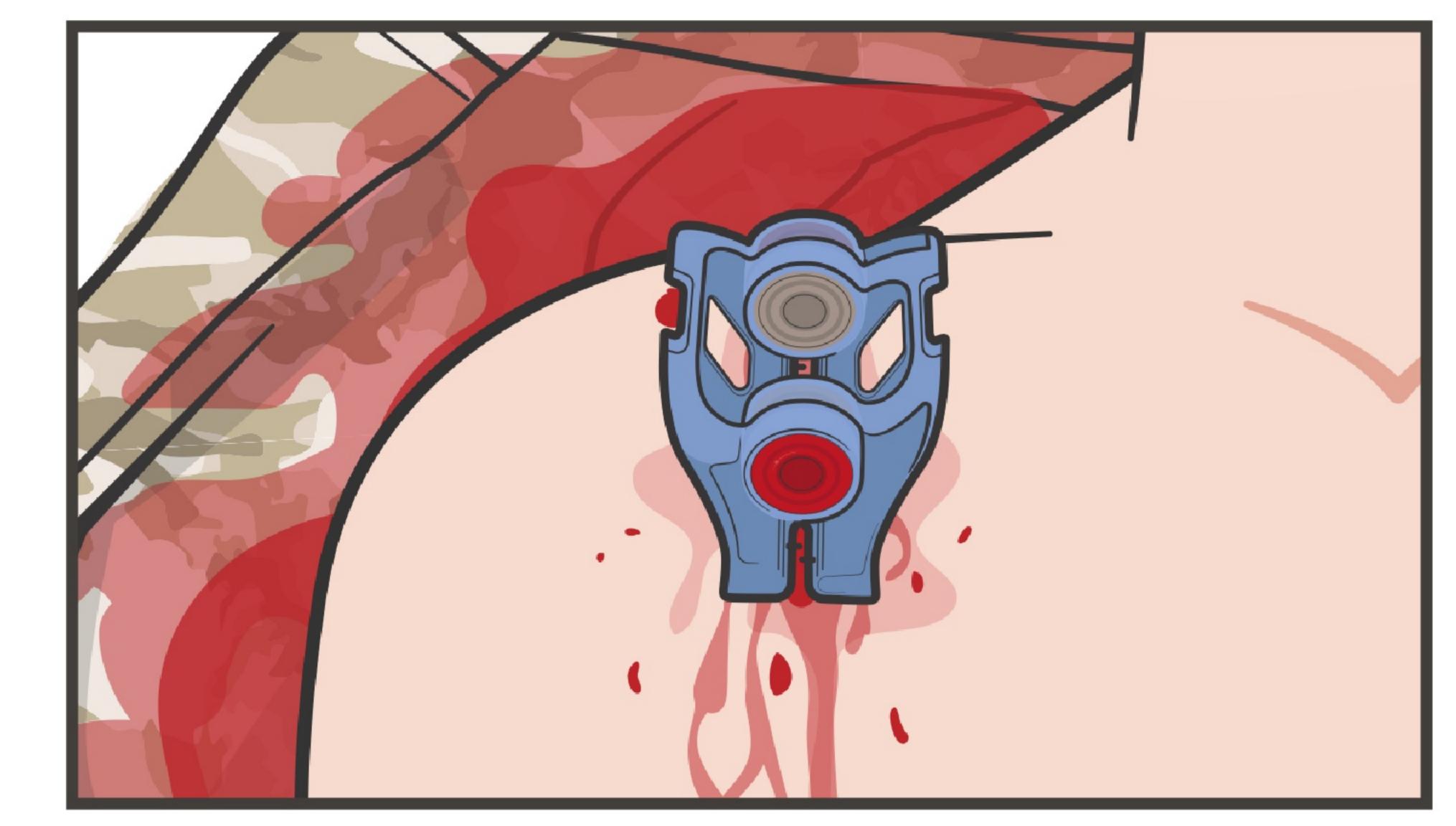


ПІСЛЯ ЗАКРИТТЯ пристрій автоматично заблокується на місці (ручки пристрою забезпечать непроникне для рідини закриття рани).


ПРИМІТКА: Пломба пристрою зруйнується одразу ж після стискання його ручок.

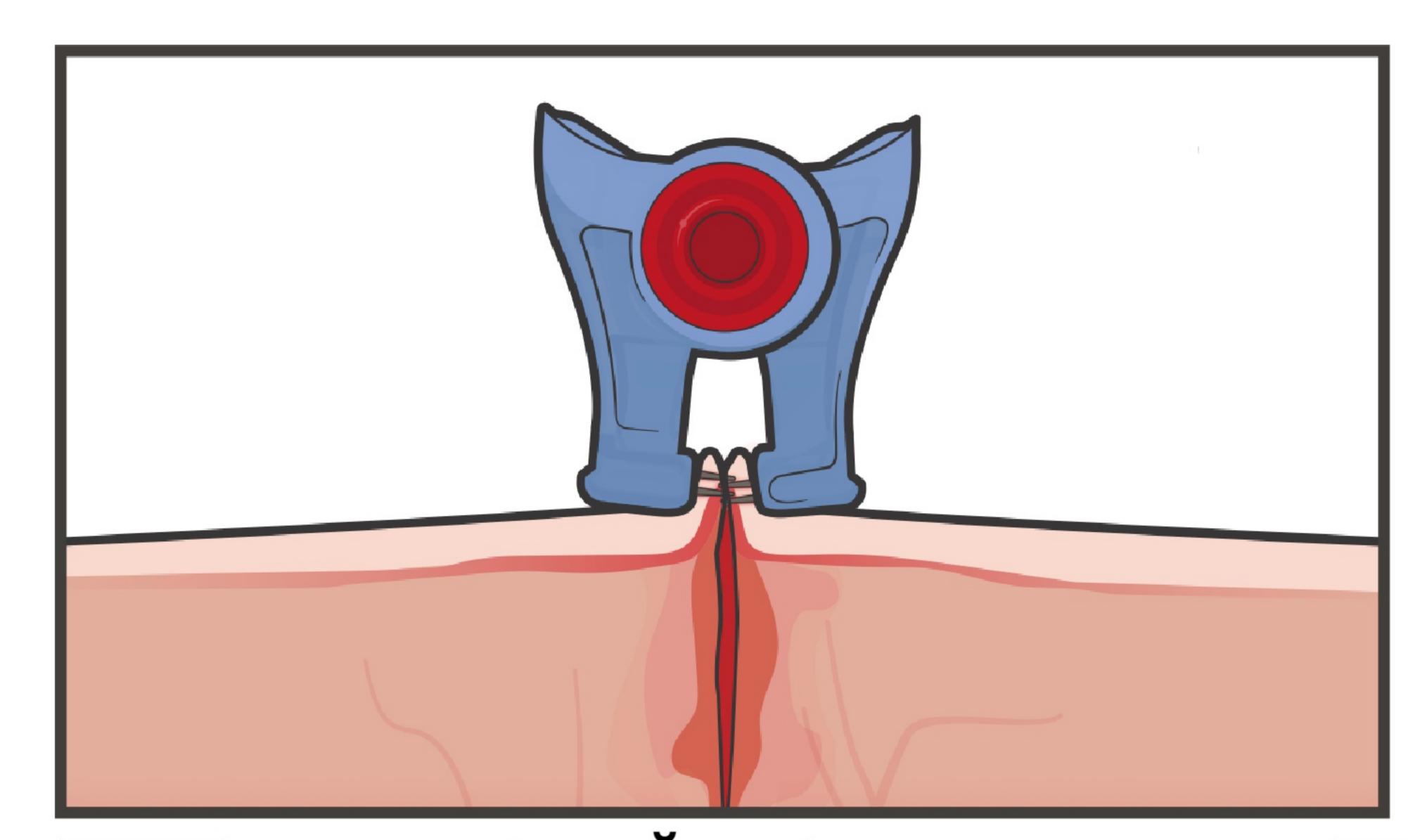

ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, що рана щільно закрита, на шкірі немає проміжків, а кровотеча не продовжується.

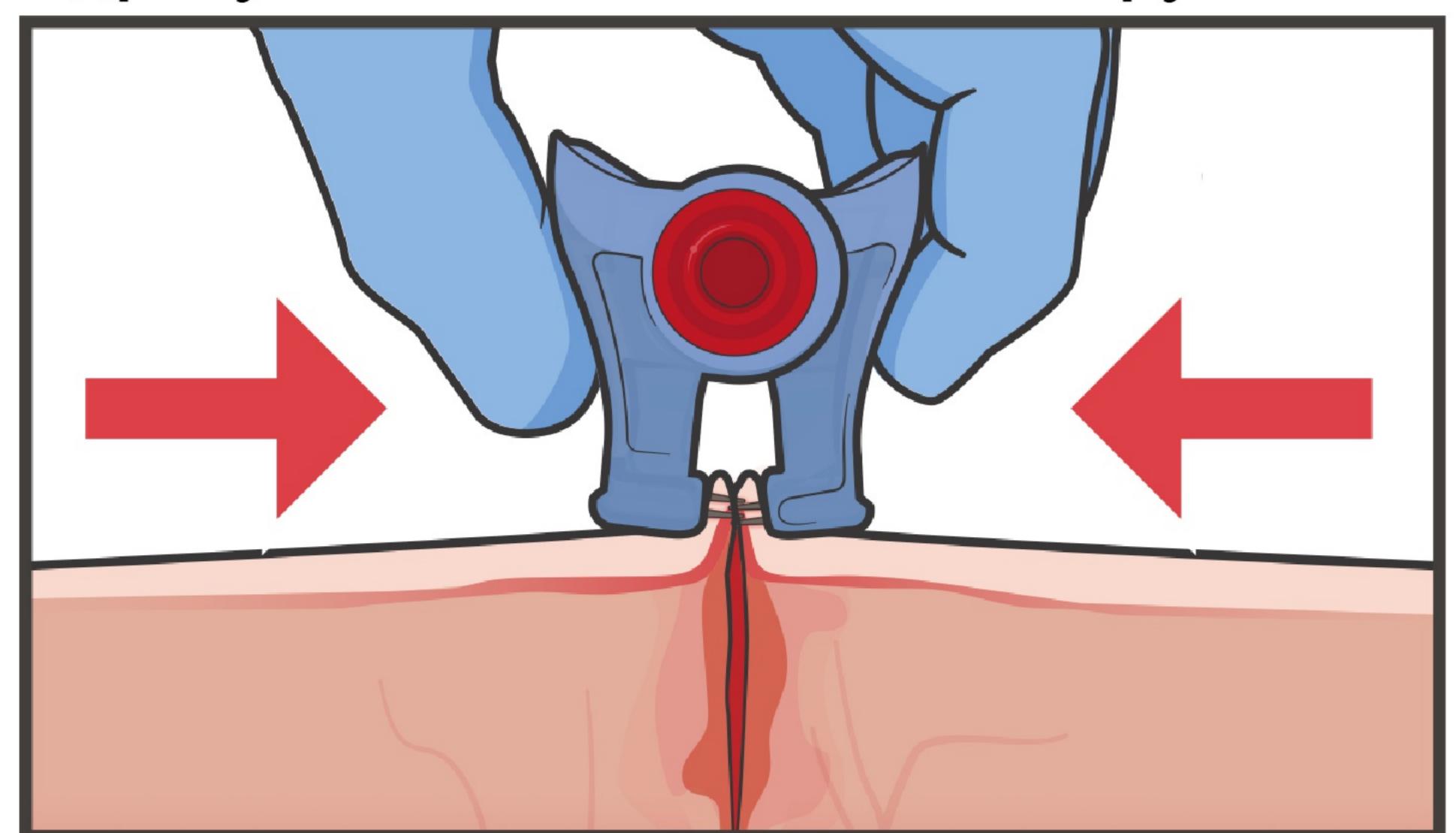

Якщо кровотеча продовжується: щільніше ЗАФІКСУЙТЕ пристрій; зніміть його, поміняйте розташування і повторно накладіть пристрій; застосуйте більше, ніж один пристрій; або затампонуйте рану гемостатичним бинтом чи XSTAT®, а потім повторно накладіть пристрій.

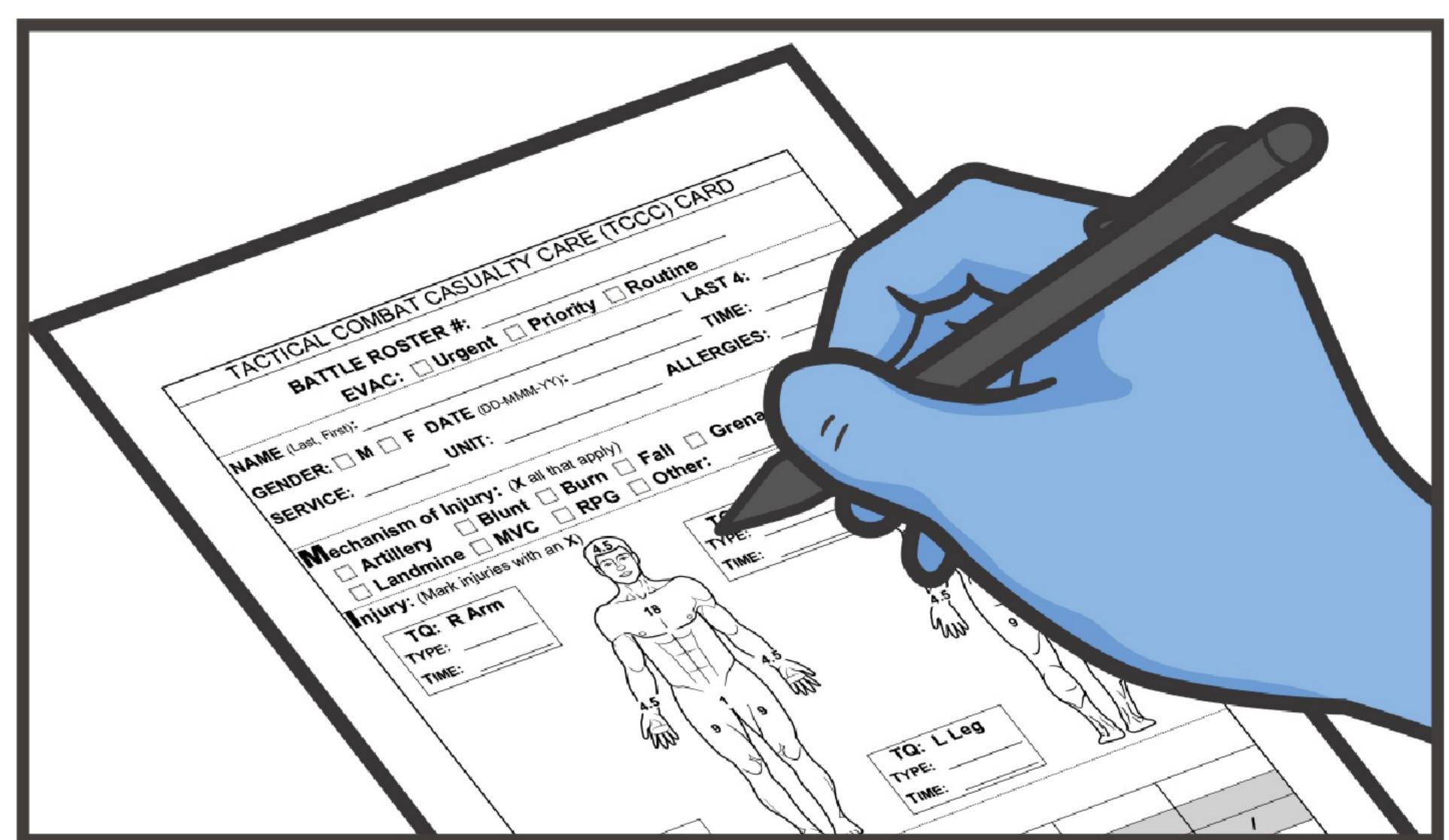

ЗАДОКУМЕНТУЙТЕ результати огляду та надану допомогу в Картці пораненого Форма DD 1380 та прикріпіть її до постраждалого.