










EMA EZ-10® ДЛЯ ВНУТРІШНЬОКІСТКОВОГО ВВЕДЕННЯ В ПЛЕЧОВУ КІСТКУ




ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту.

ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.


ЗБЕРІТЬ, ПІДГОТУЙТЕ та ПЕРЕВІРТЕ необхідне обладнання.

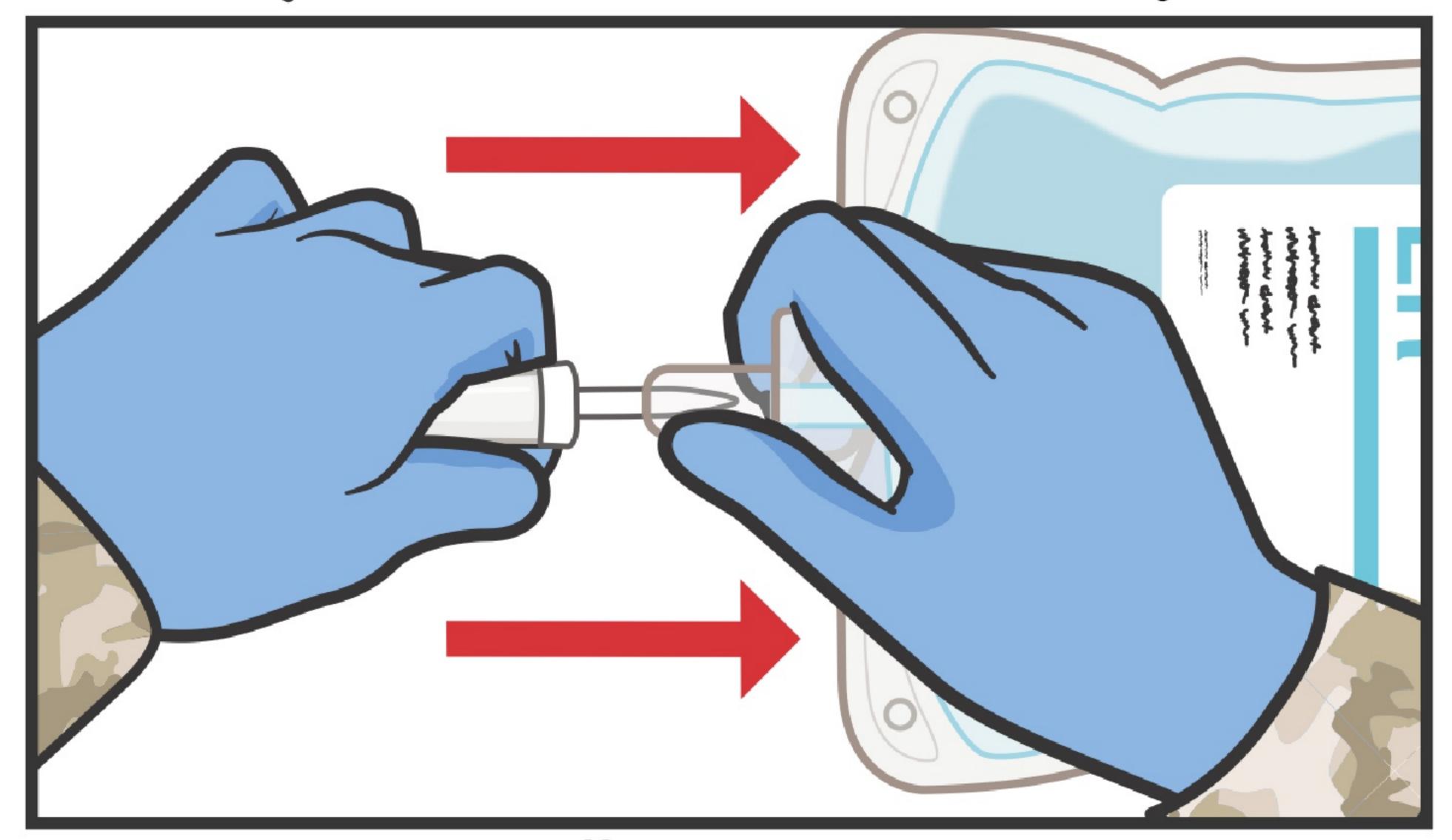

ПІД'ЄДНАЙТЕ контейнер/пакет з розчином для внутрішньовенної (ВВ) інфузії до належно підготовленої системи для ВВ інфузій.

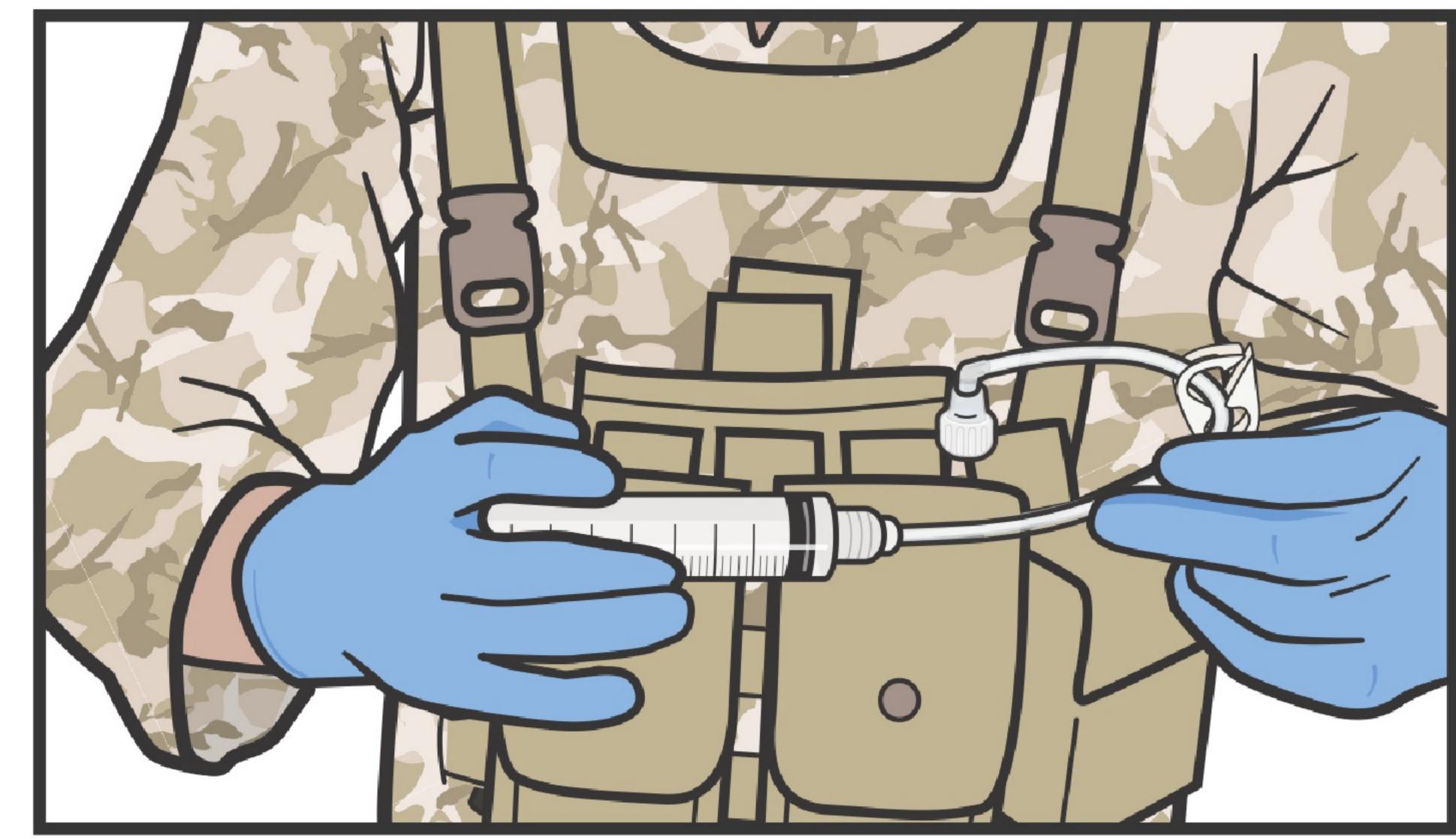


ЗАПОВНІТЬ подовжувач для внутрішньокісткового (ВК) катетера стерильним розчином для ВВ ін'єкцій, дотримуючись правил асептики. Замініть ізотонічний розчин NaCl на стерильний розчин для ВВ введення.

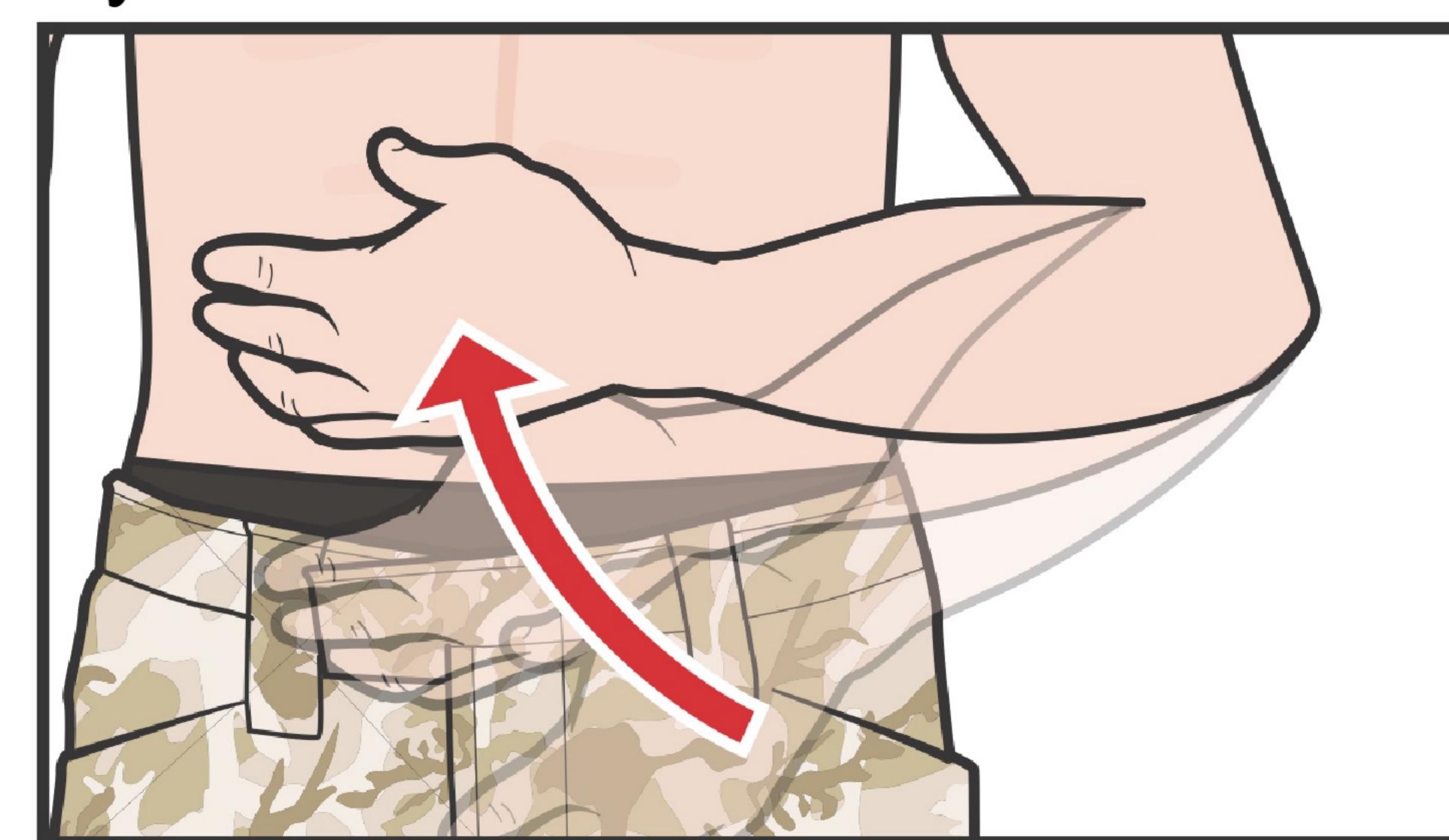


ПОПРОСІТЬ постраждалого покласти руку на пупок і привести ії до тулуба.

КРОК 4. ПРИМІТКА: Це зумовлює медіальну ротацію ліктя та плечової кістки, внаслідок чого місце для введення ВК пристрою більше виступає над поверхнею.

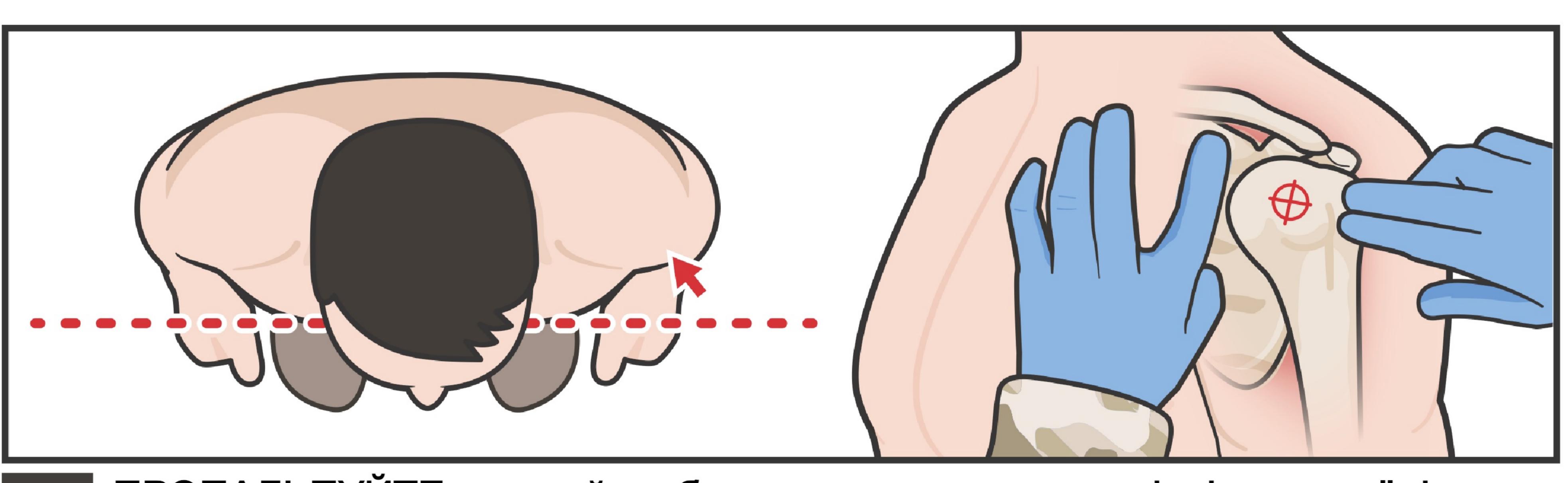


ПРОПАЛЬПУЙТЕ великий горбок на проксимальному кінці плечової кістки, , нижче цього орієнтира - хірургічну шийку плечової кістки. Ідеальне місце


введення – на 1 см вище хірургічної шийки. ПРИМІТКА: Хірургічна шийка плечової кістки знаходиться трохи нижче великого горбка на проксимальному кінці плечової кістки (на дотик нагадує м'яч для гольфу

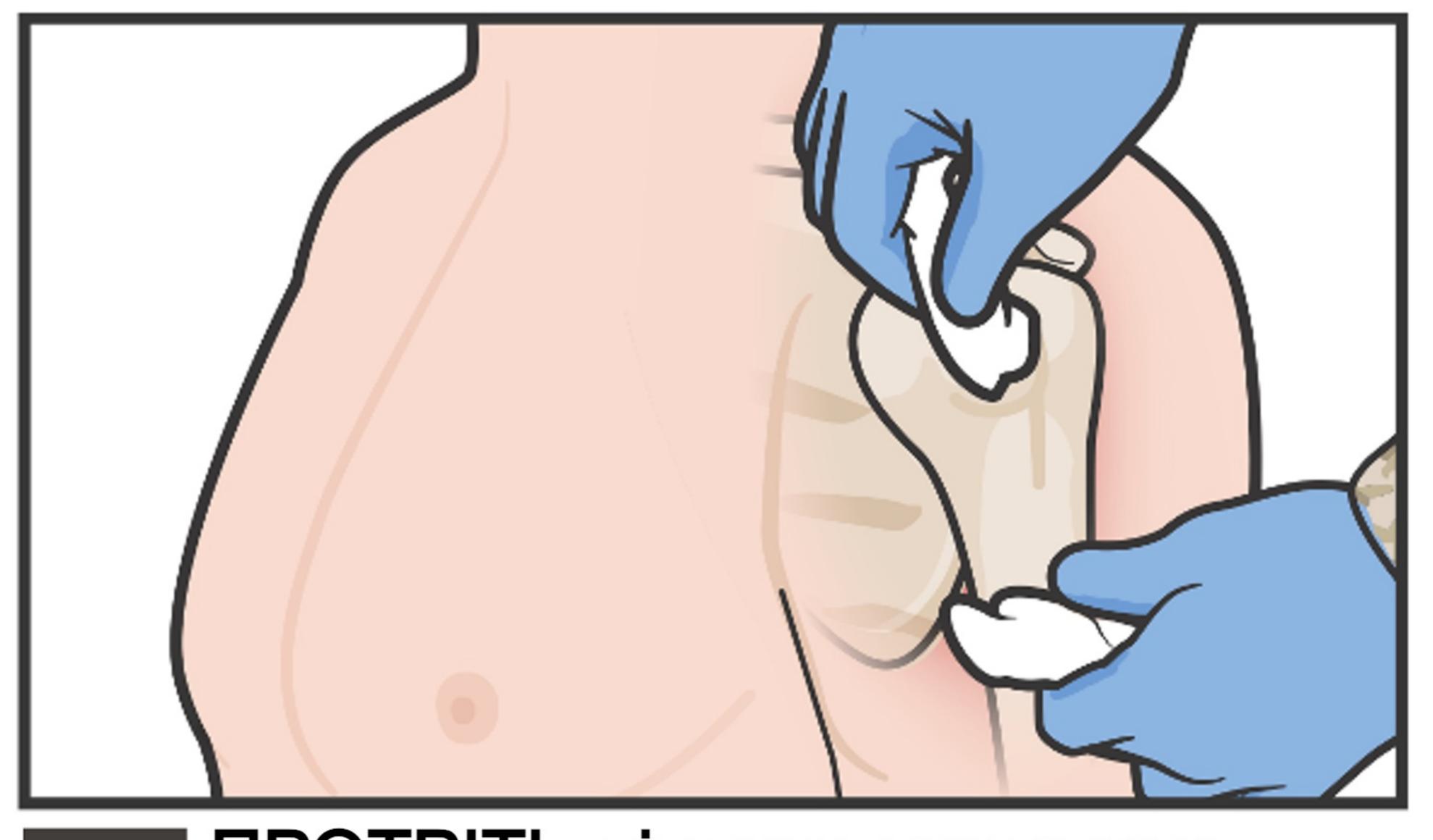

ПРОТРІТЬ ділянку серветкою, змоченою спиртом або повідон-йодом.

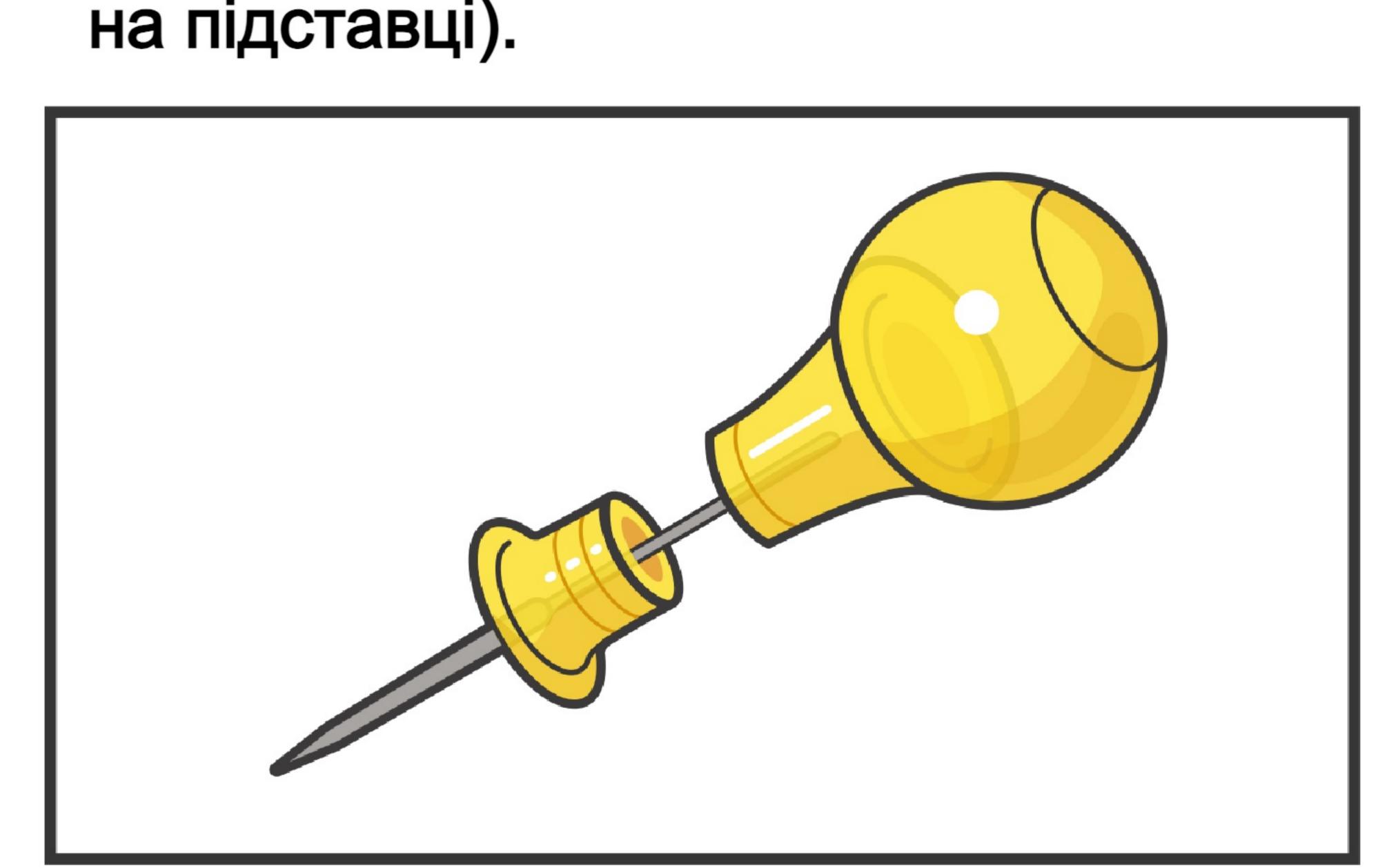


ВІЗЬМІТЬ відповідний картридж EZ-IO. Якщо ви використовуєте механічний дриль, відкрийте картридж EZ-IO та приєднайте голку до дриля; ви почуєте характерне клацання при під'єднанні малого магніту.

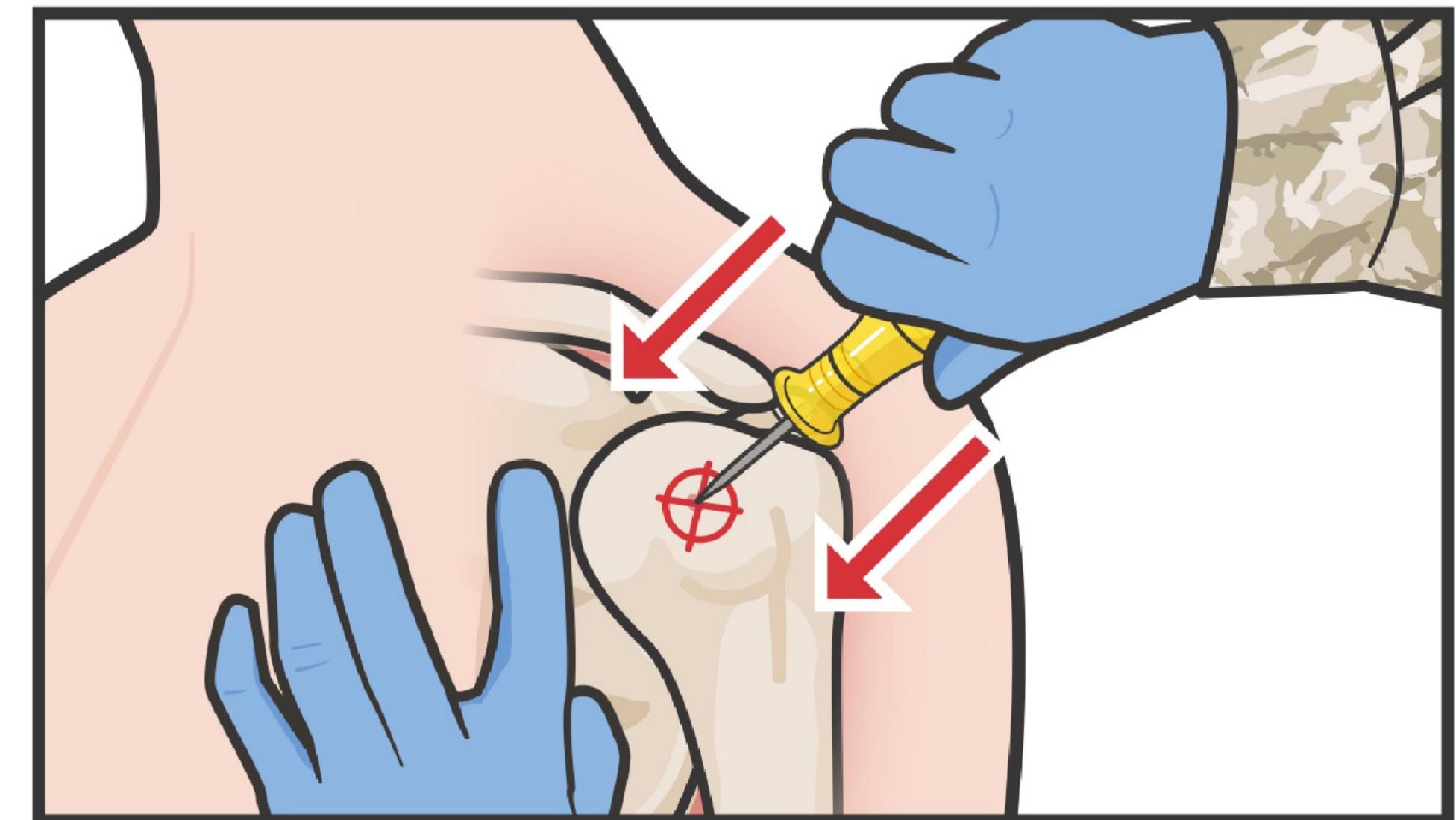

ПІДГОТУЙТЕ голку ЕΖ-ІО для ручного введення, знявши захисний ковпачок. Якщо ви використовуєте механічний дриль, зніміть ковпачок швидким включенням дриля, утримуючи ковпачок.

ПРИМІТКА: Тримайте руки та пальці подалі від голки.

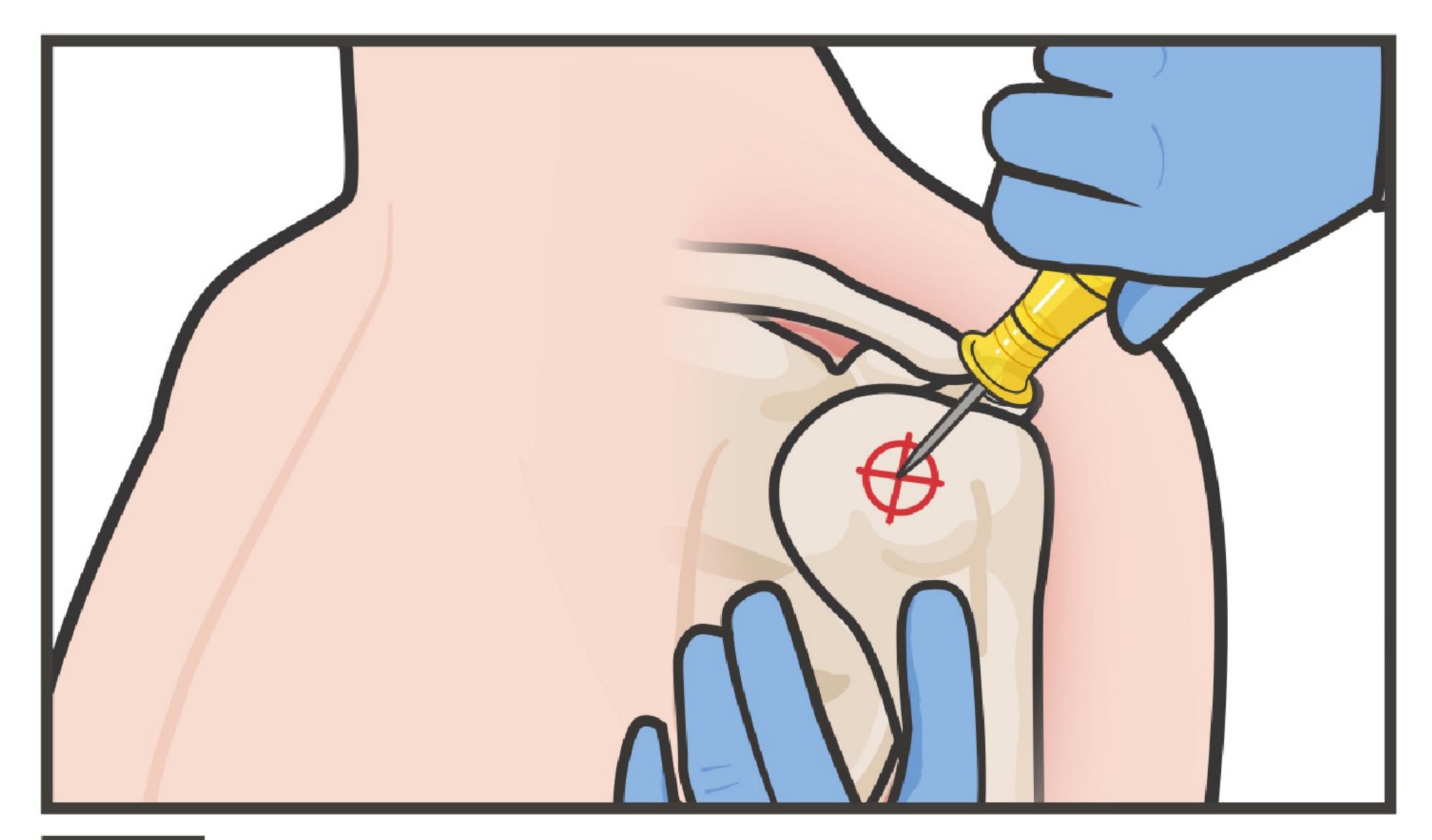

Тримаючи дриль або голку в домінуючій руці, другою рукою ЗАФІКСУЙТЕ руку пораненого біля місця введення.

ВК пристрій повинен бути розміщений під кутом 45 градусів до площини руки.