




# Вузловий турнікет JETT

Junctional Emergency Treatment Tool (JETT) Tourniquet


## Продовження зі сторінки 1




**10** На ремінцях відрегулюйте дві подушечки до верхньої частини стегнової артерії, трохи нижче пахових зв'язок.

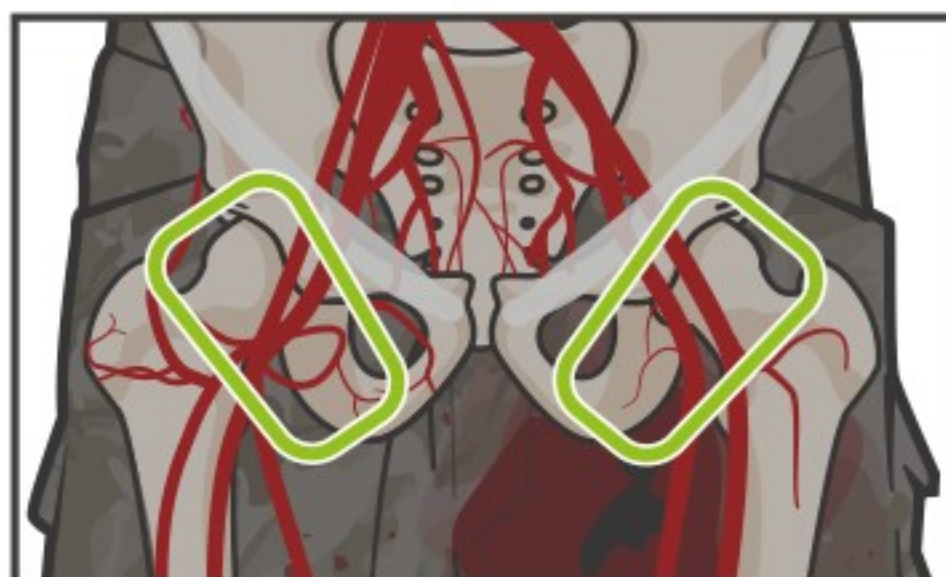

**11** Відрегулюйте притиски подушечки так, щоб їх довгий охоплення було вирівняно паралельно пахвинній борозні. Це буде прибіл. під кутом 30 градусів назовні, щоб статеві органи були вільними.

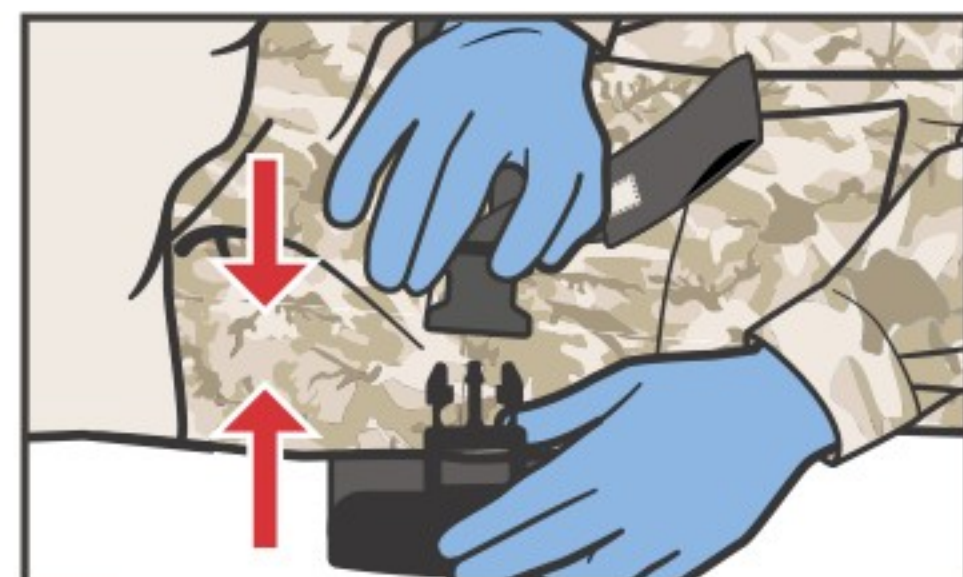

**12** Приєднайте жіночий кінець до чоловічого кінця з'єднувача ременя. Пролунає клацання.

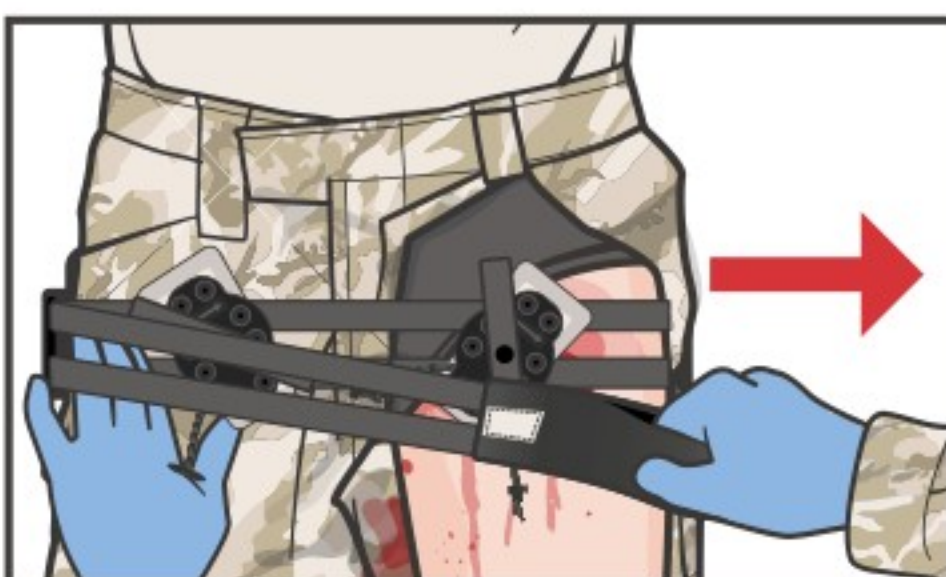

**13** Потягніть вільний кінець ремінця за допомогою ручки-петлі, щоб усунути провисання.

**ПРИМІТКА.** Під час затягування стабілізуйте ремінь іншою рукою.




**14** Переоцініть розміщення прокладки, щоб переконалися в її правильному розташуванні над стегною артерією трохи нижче пахової зв'язки під кутом 30 градусів.




**15** Затягніть різбову ручку, повертаючи її за годинниковою стрілкою, а іншою рукою стабілізуйте колодку, утримуючи її на місці. Затягніть, поки не зупиниться кровотеча.

**КРОК 15.** При інтактній кінцівці підтвердити відсутність дистального пульсу.

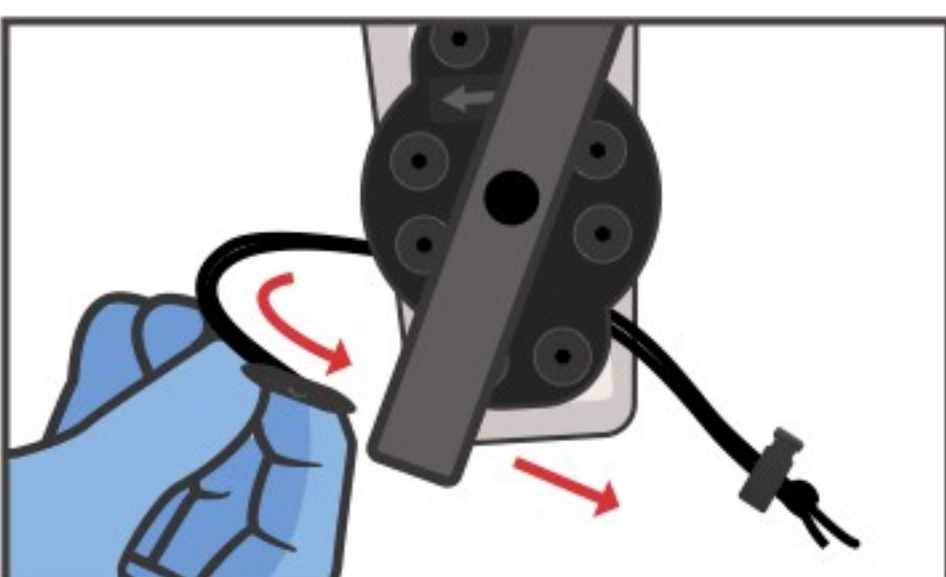


**16** Вставте затискач через отвір у різбовій ручці та міцно затягніть його на базовій пластині, щоб закріпити ручку на місці.

**КРОК 16.** Якщо травма двостороння, повторіть процес з іншого боку.

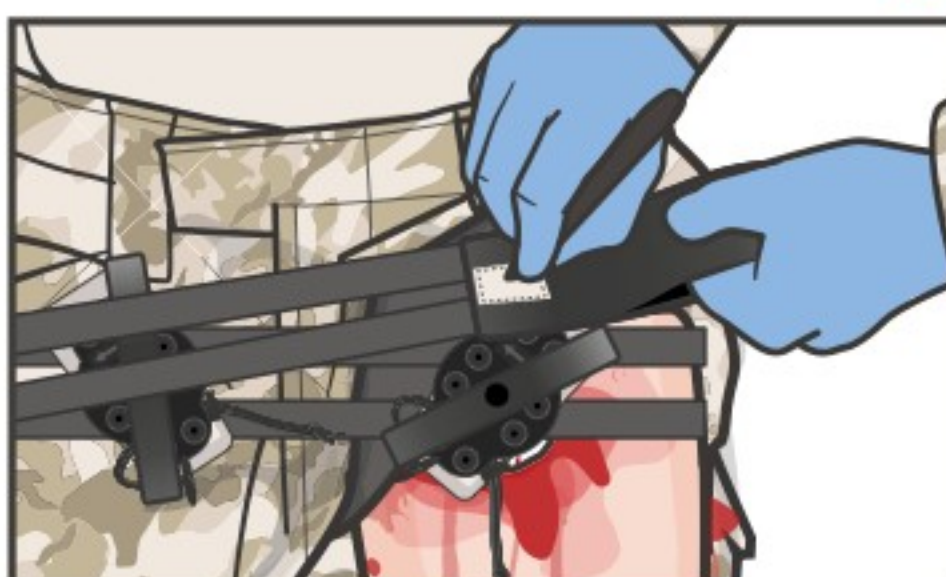

**17** Задokumentуйте час застосування на петлі ручки або на обличчі пораненого.

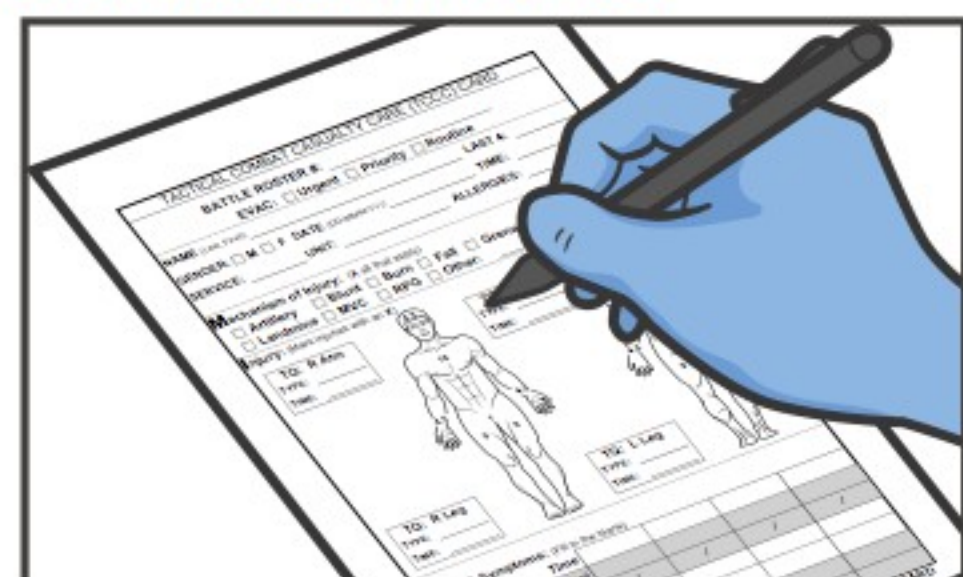

**18** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.

**ВАЖЛИВО** – часто **МОНІТОРУЙТЕ** пацієнта під час транспортування, щоб переконалися, що пристрій і накладки для тиску залишаються на місці. Відрегулюйте відповідно, щоб контролювати кровотечу.