



НАКЛАДАННЯ ТУРНІКЕТА




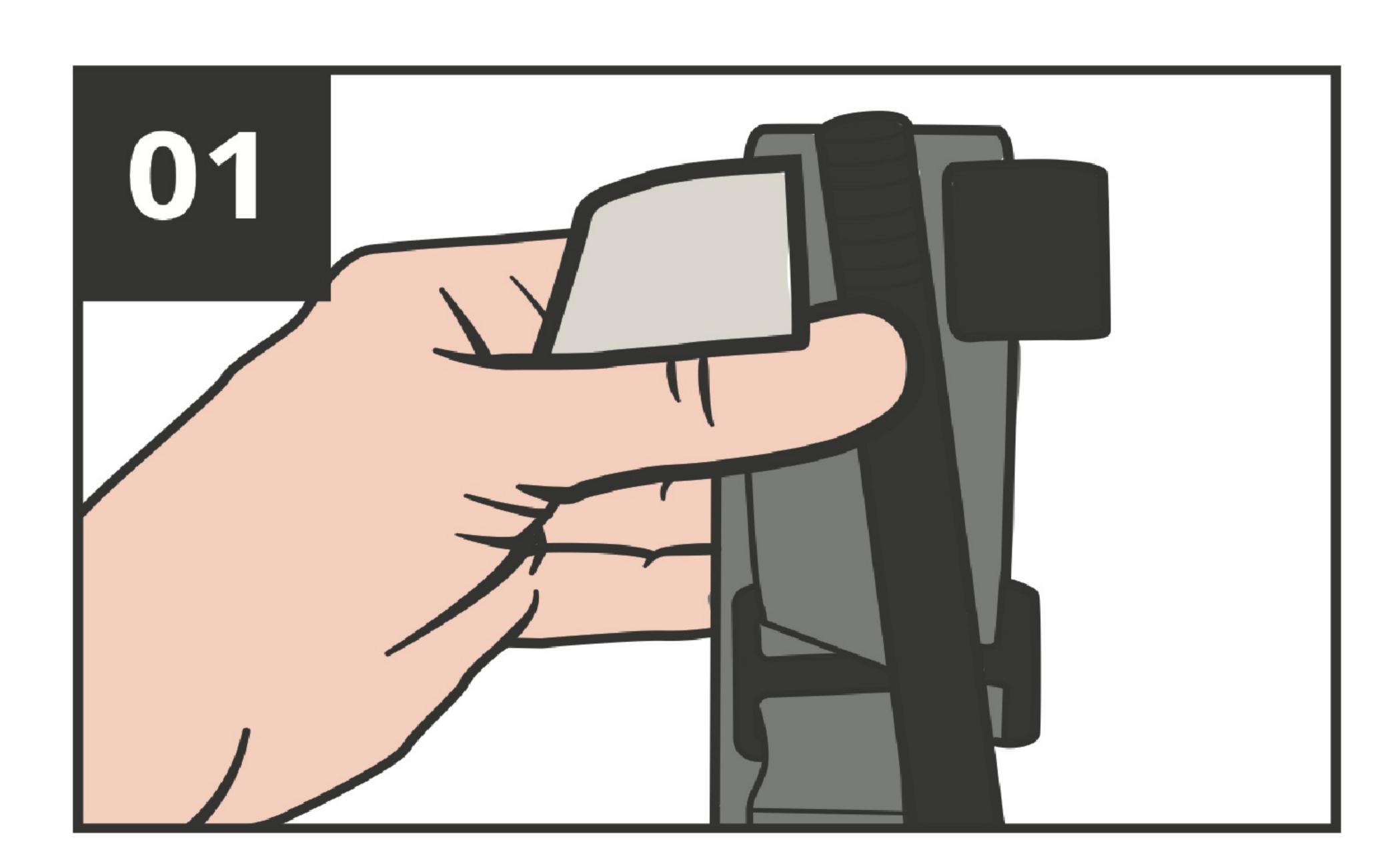


ДІСТАНЬТЕ турнікет «САТ» з індивідуальної аптечки або підсумка

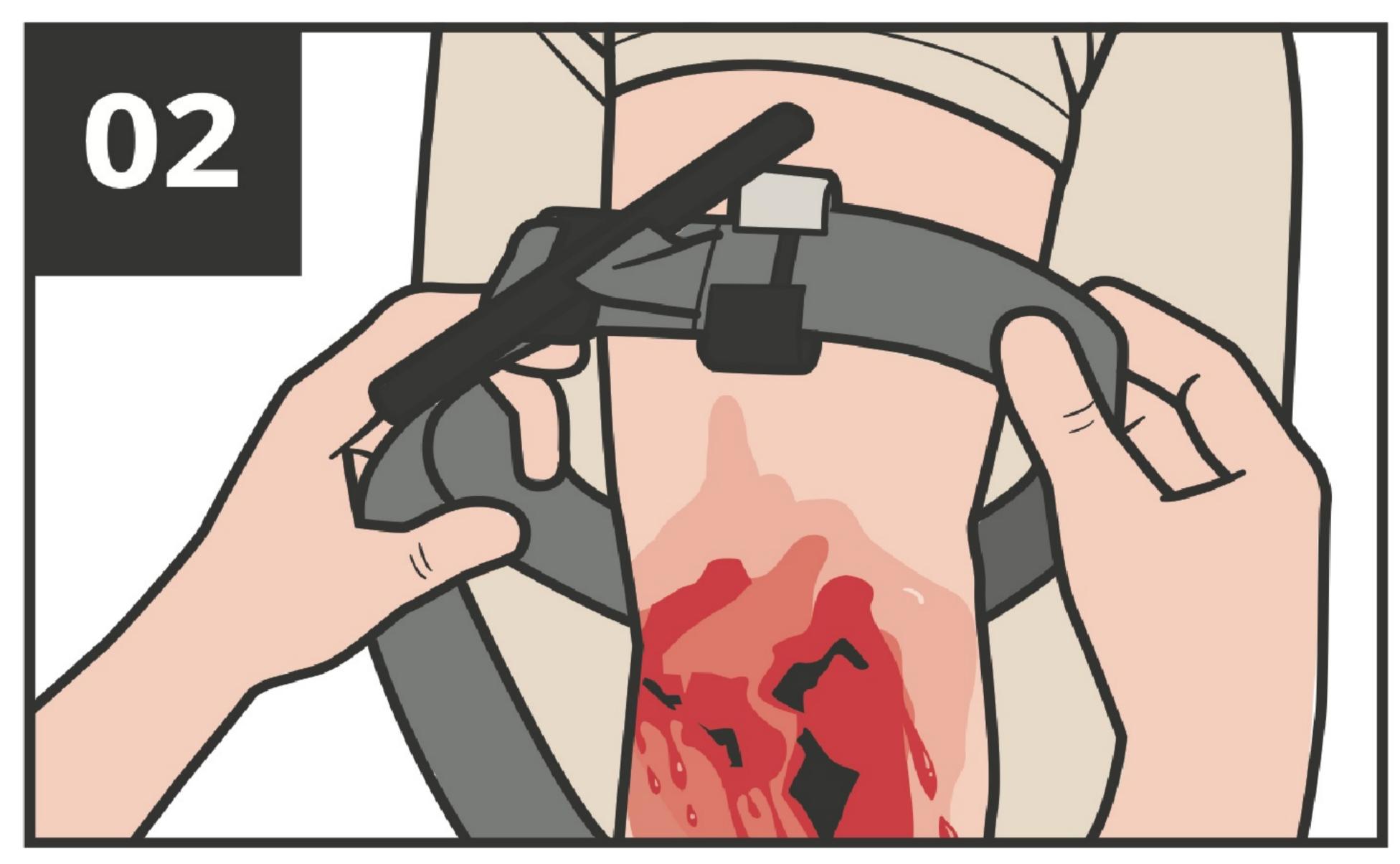


ПРОТЯГНІТЬ уражену кінцівку крізь петлю, утворену ременем турнікета

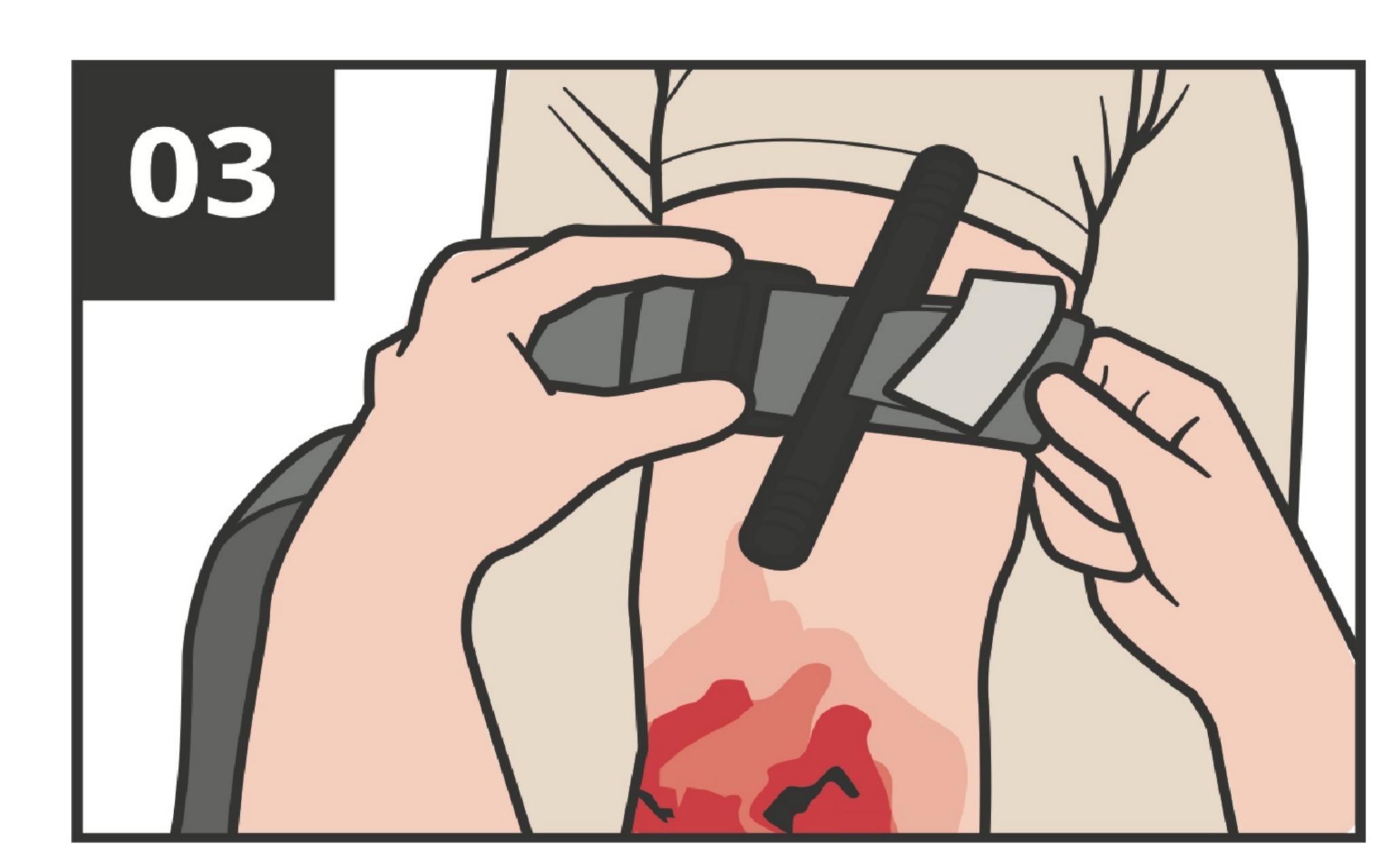


РОЗМІСТІТЬ турнікет не менше, ніж на 5-8 см вище від рани

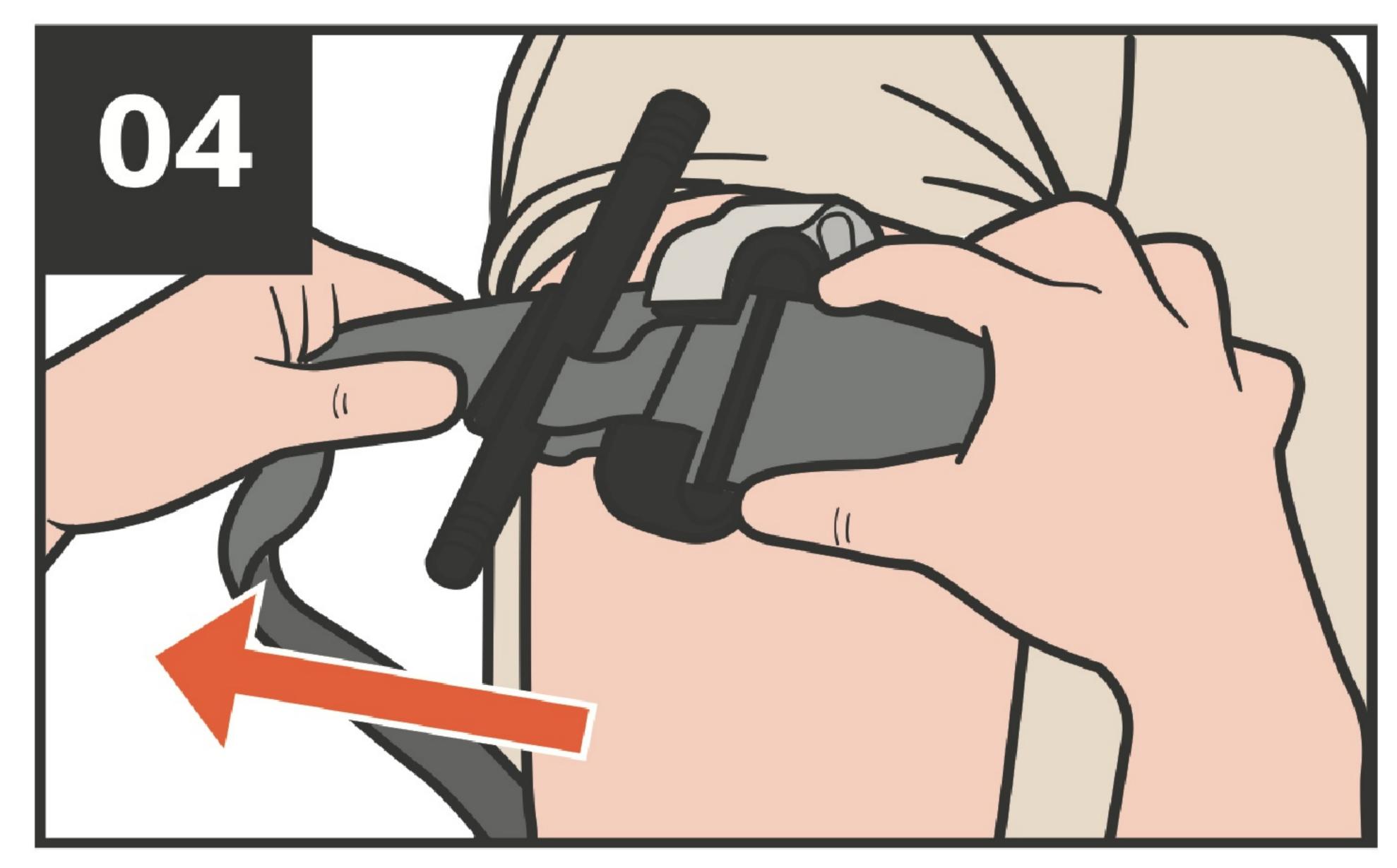


Максимально сильно ЗАТЯГНІТЬ ремінь турнікета, не залишаючи зазорів

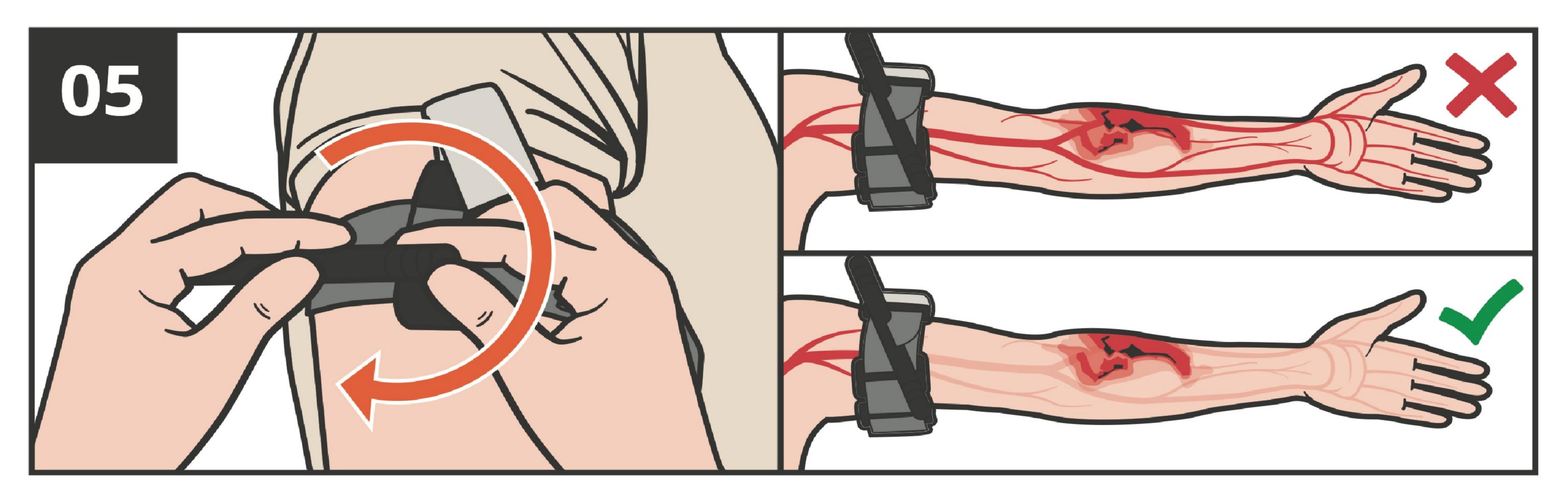


ЗАКРУЧУЙТЕ вороток для затягування стропи турнікета до моменту зупинки кровотечі

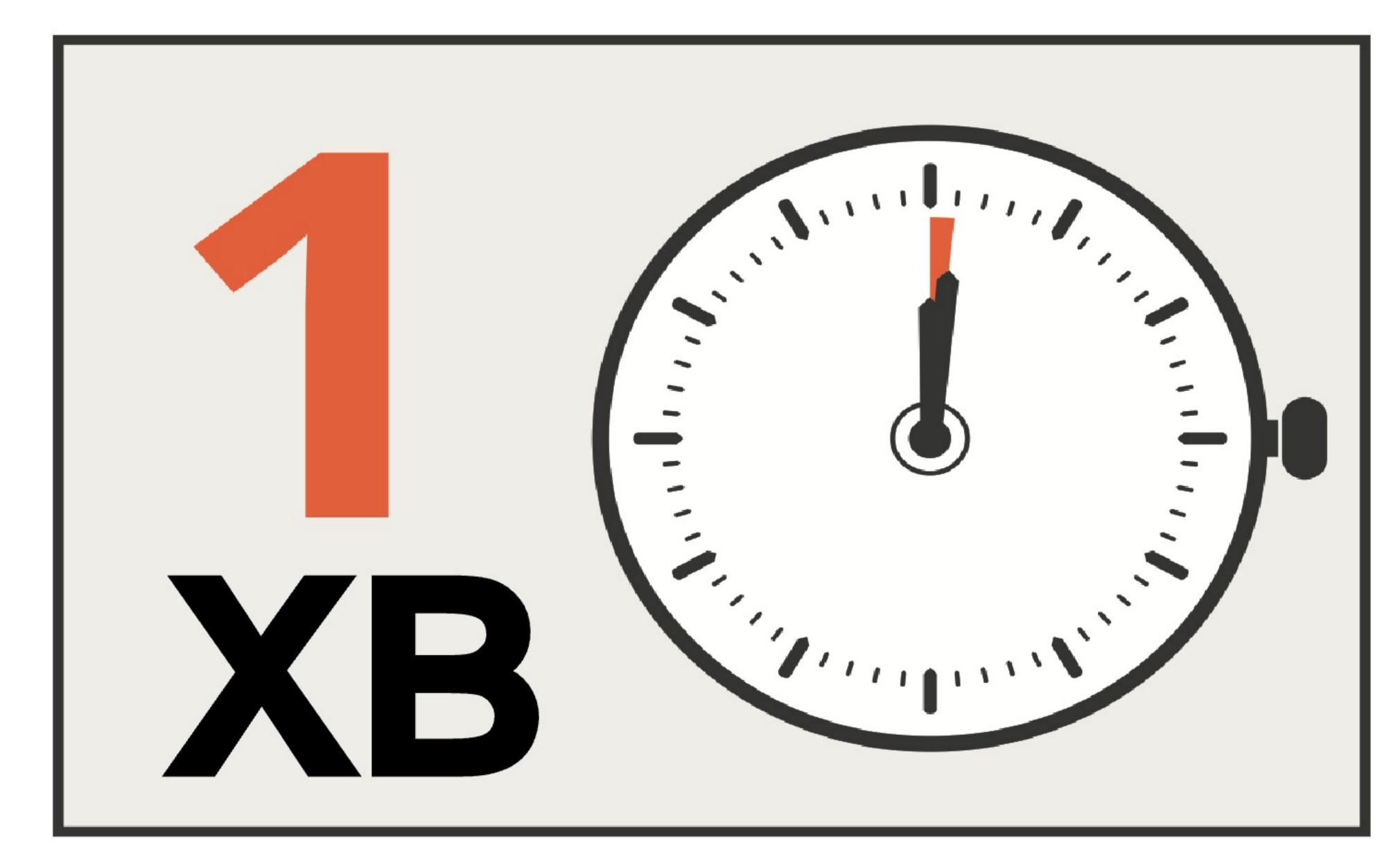


Завершіть НАКЛАДАННЯ турнікета для зупинки кровотечі в межах 1 хв

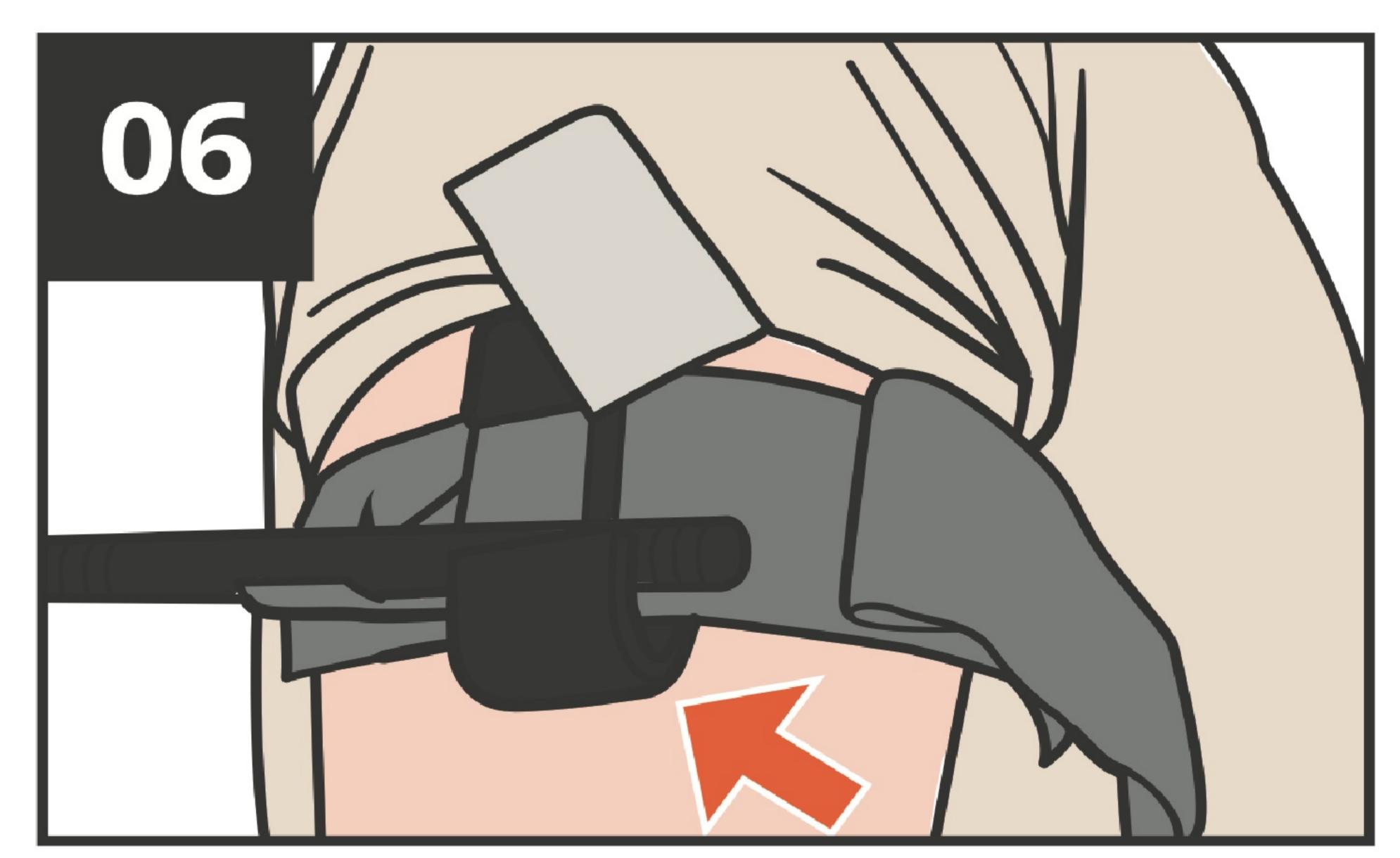


ЗАКРІПІТЬ вороток, розмістивши його під однією зі скоб фіксатора

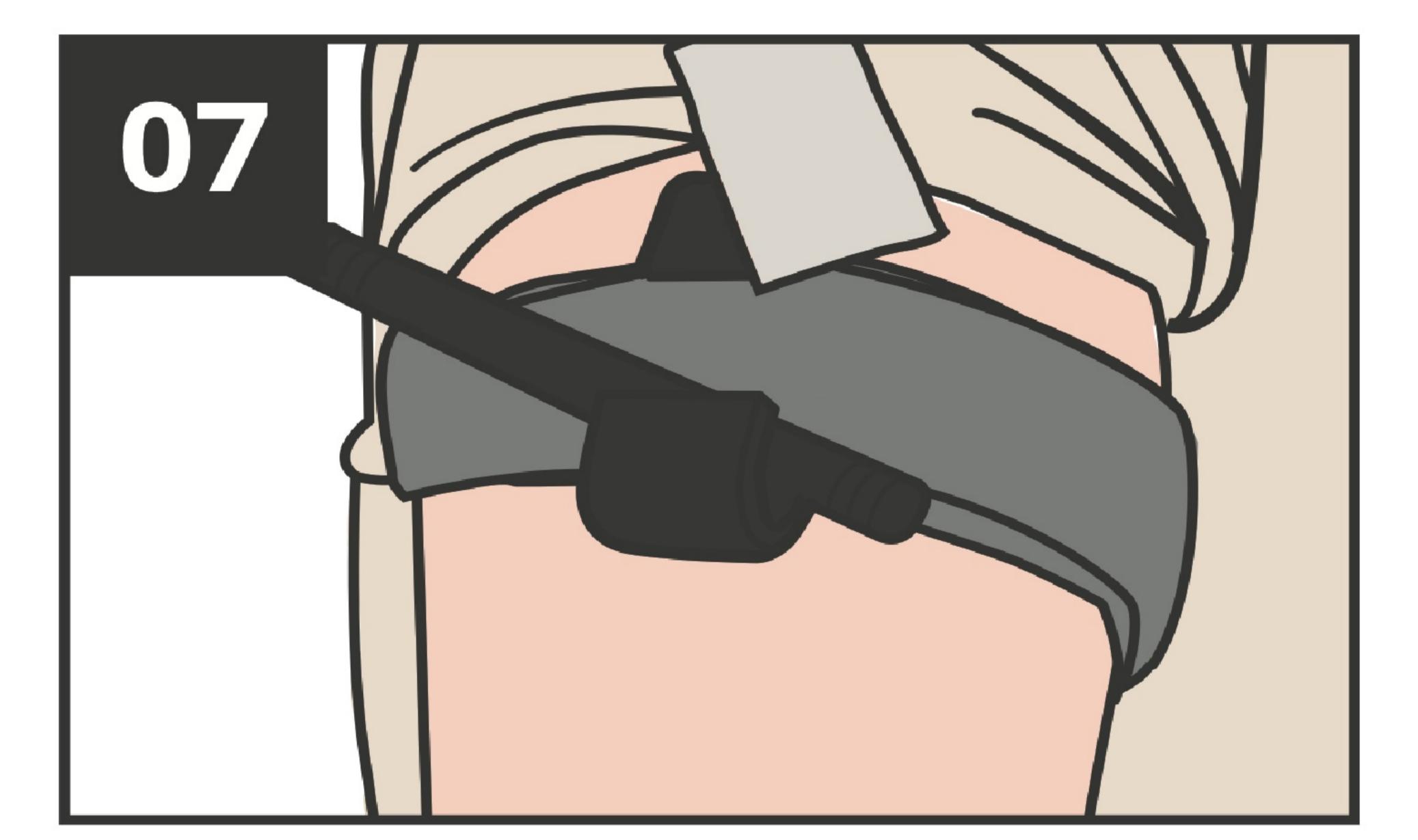

ПРОВЕДІТЬ ремінь між скобами фіксатора та навколо воротка

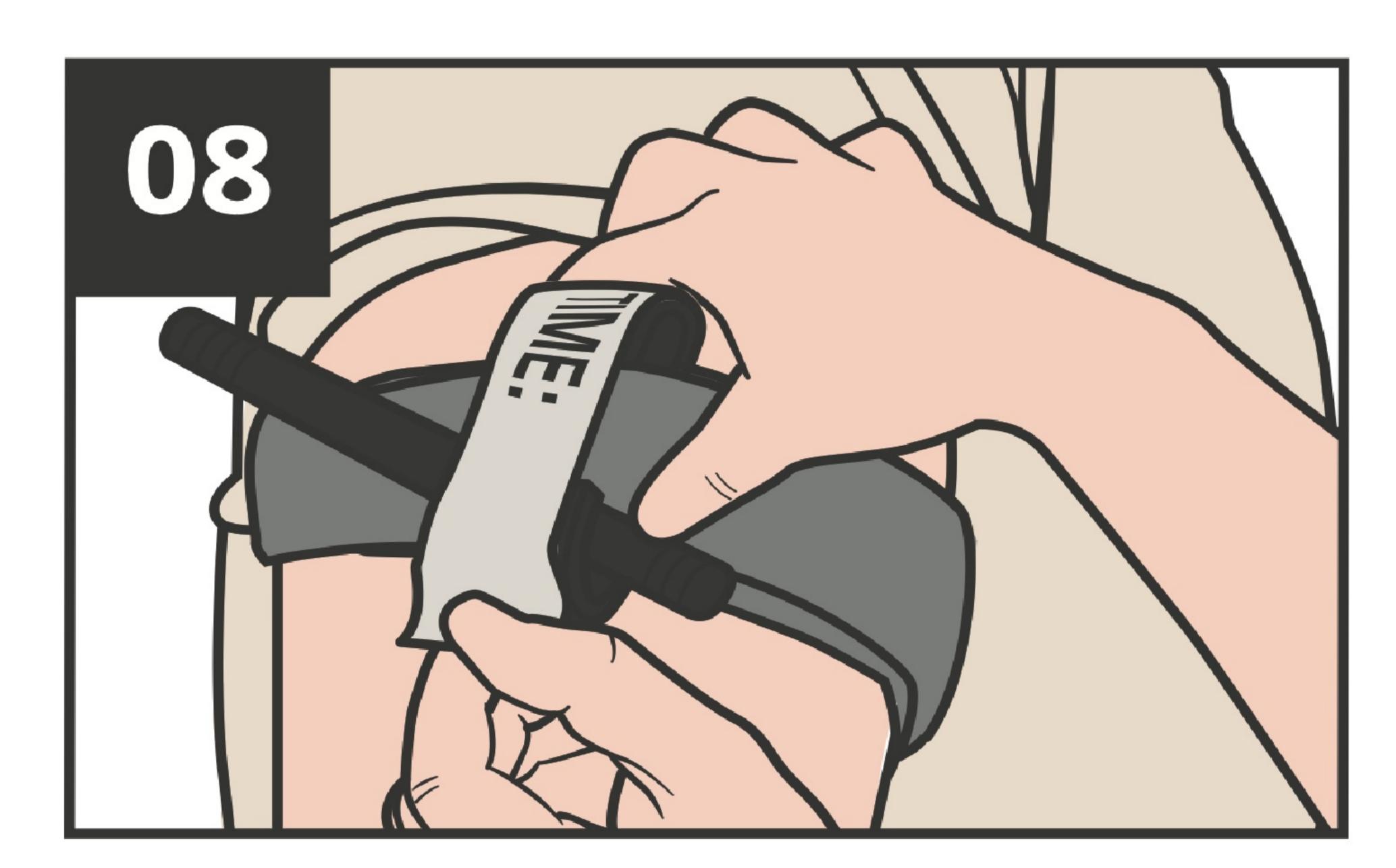

ЗАКРІПІТЬ вороток та ремінь турнікета під фіксувальною стрічкою

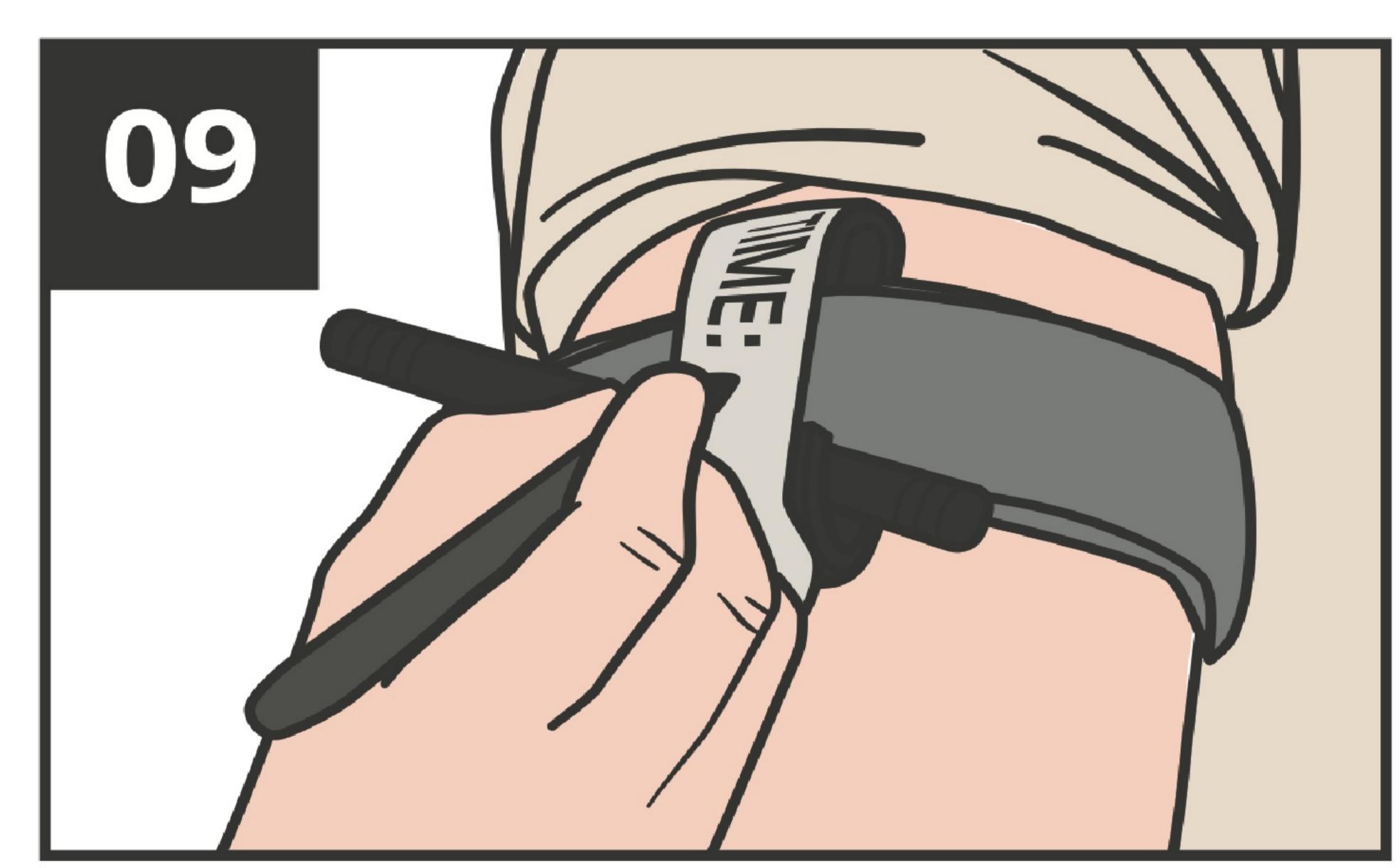

ЗАПИШІТЬ час накладання турнікета на фіксувальній стрічці та в Картці пораненого ТССС, або ж на чолі постраждалого



ПОВІДОМТЕ медичний персонал про надану допомогу

НАВИЧКИ, ЩО РЯТУЮТЬ ЖИТТЯ