















НАКЛАДАННЯ ТУРНІКЕТА З ЗУБЧАСТИМ МЕХАНІЗМОМ ОДНІЄЮ РУКОЮ

(ДОПОМОГА ПІД ВОГНЕМ, CUF)

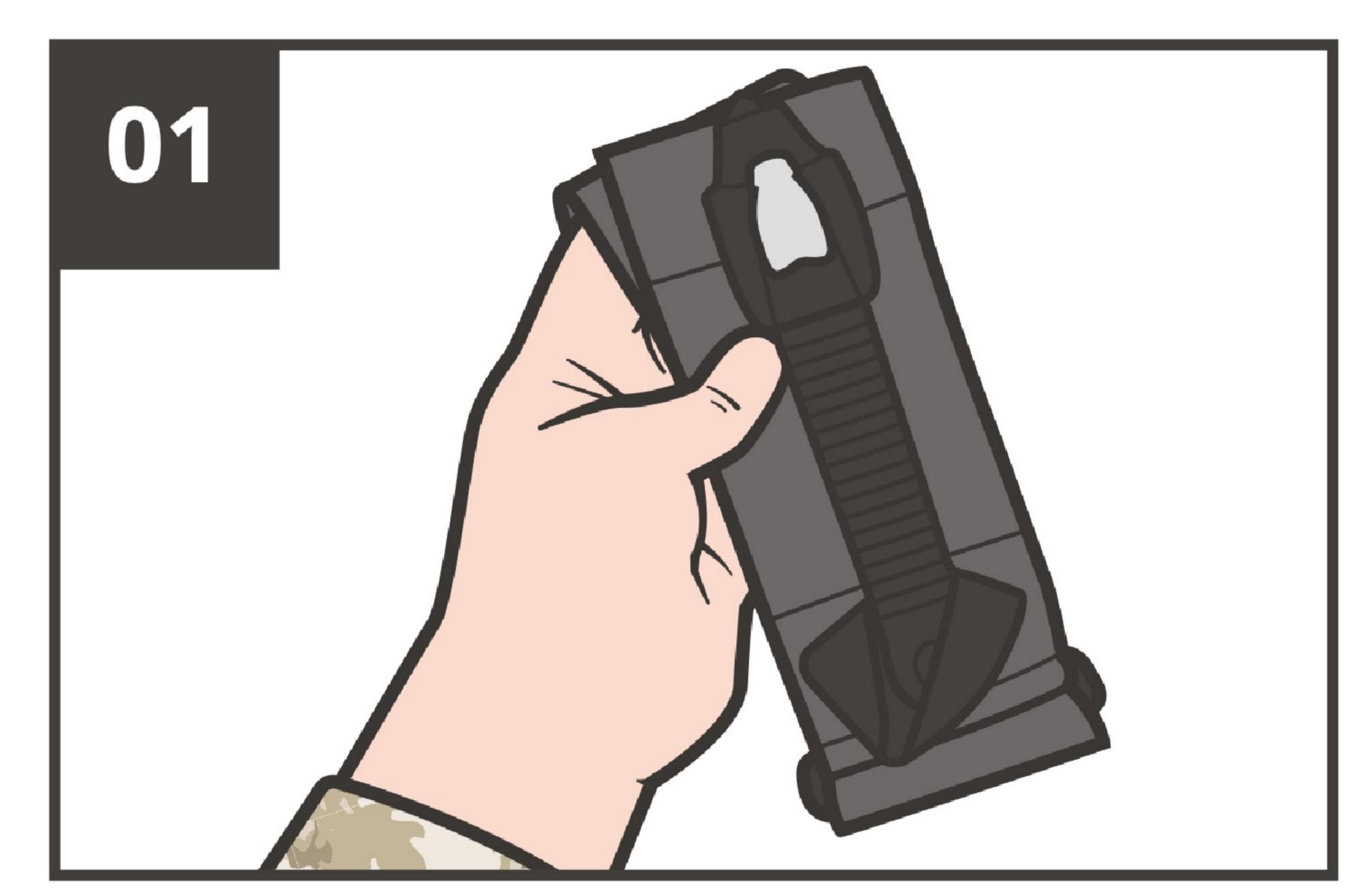


ДІСТАНЬТЕ турнікет з тактичної індивідуальної аптечки (JFAK) та/або підсумка.

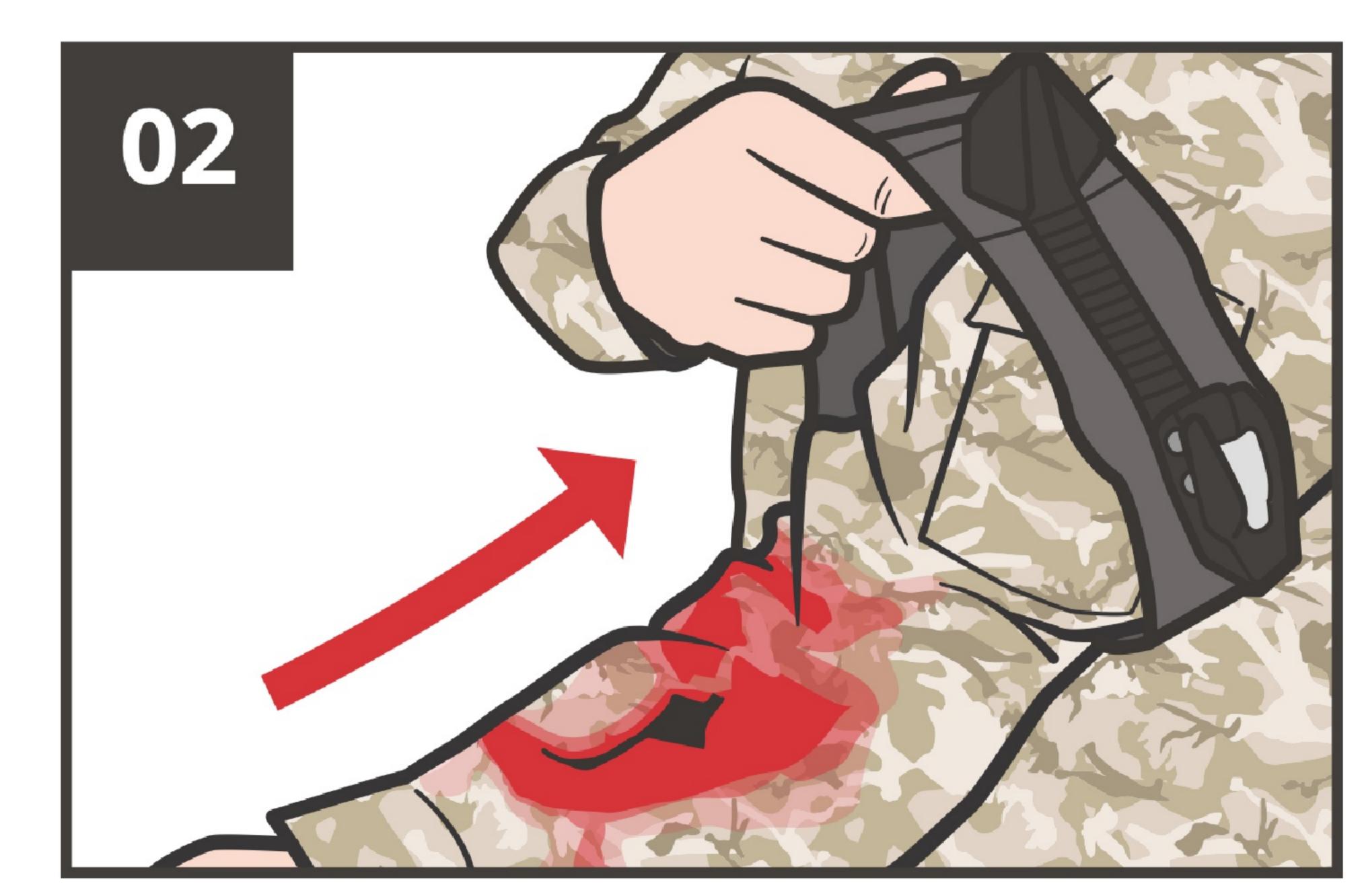

ПРОСУНЬТЕ поранену кінцівку крізь петлю, яку утворює самоклеюча стрічка (турнікет у вигляді замкнутої петлі).



РОЗМІСТІТЬ турнікет над місцем кровотечі, високо на кінцівці поверх одягу/уніформи.

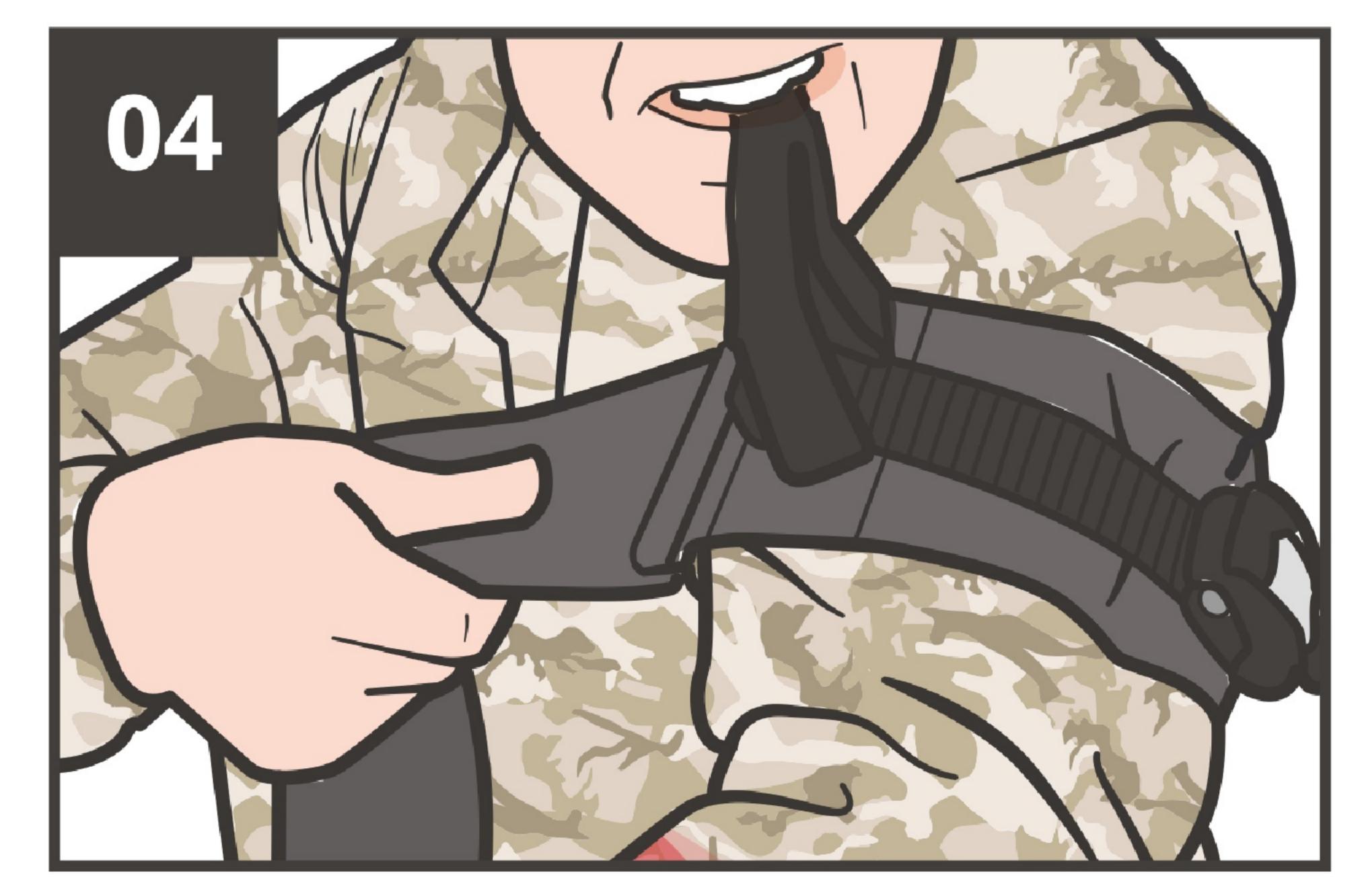


Щоб запобігти ковзанню турнікета під час затягування, ЗАХОПІТЬ петлю на турнікеті зубами (або, за можливості, притуліться до твердої поверхні).



ЗАТЯГНІТЬ ремінь турнікета якомога сильніше.



ПІДНІМІТЬ важіль пряжки зубчастого механізму, затягуйте турнікет за допомогою зубчастого механізму, поки кровотеча не зупиниться (кроки 1-6 слід виконати менш, ніж за 1 хв).

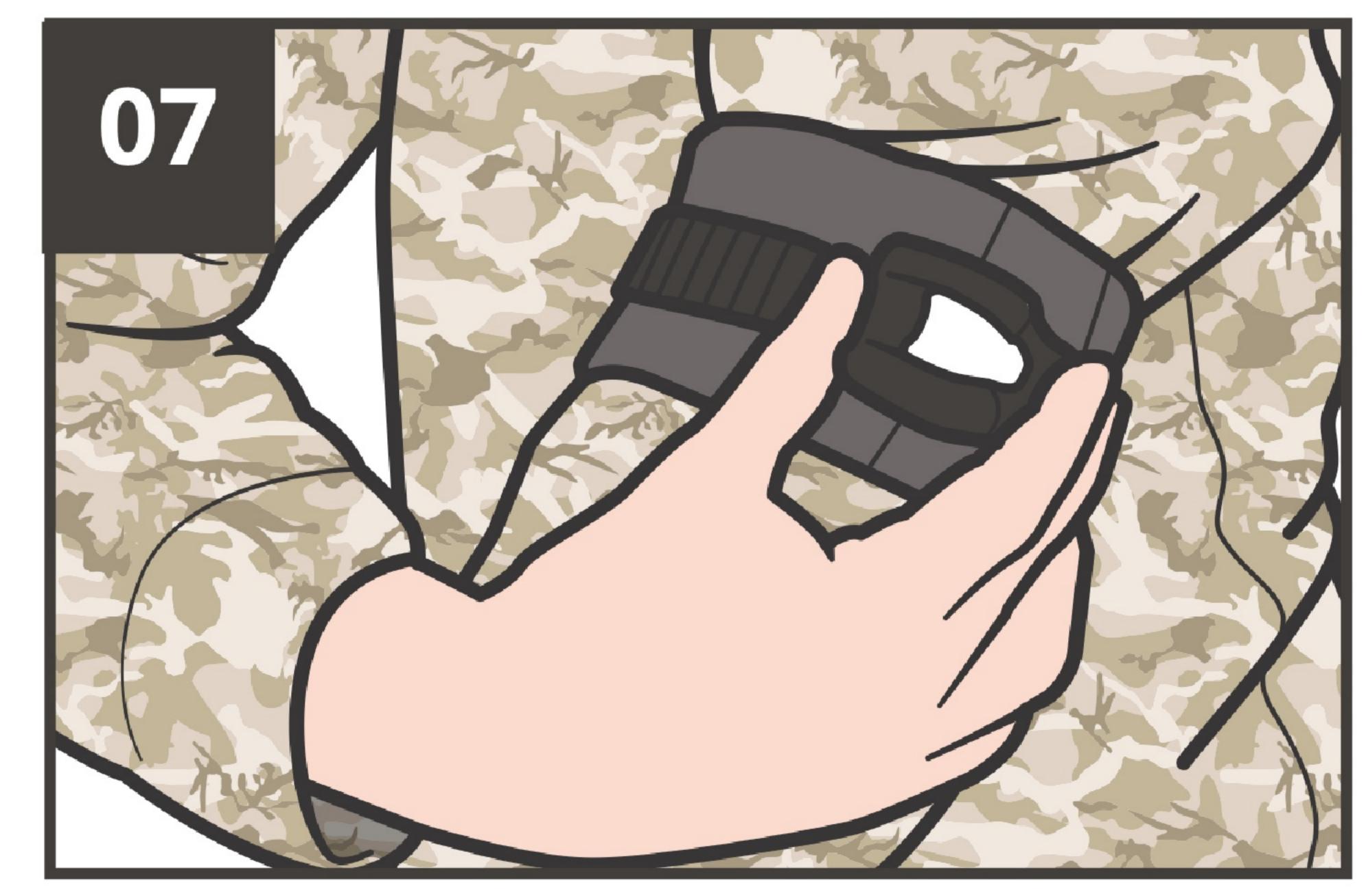

ЗАФІКСУЙТЕ зубчастий механізм (він стане на місце з клацаючим звуком).

ПРИМІТКА: Якщо кровотеча не зупиняється, продовжуйте затягувати турнікет із зубчастим механізмом, поки вона не зупиниться.

ПРИМІТКА: Не документуйте час накладання турнікета до переходу в фазу Допомоги в польових умовах.



Якщо відсутні ознаки інших масивних кровотеч, ПЕРЕМІСТІТЬСЯ в укриття.