

мішок Амбу - Дві особи




Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

- 01** Сядьте над головою пораненого, а ваш партнер – збоку від голови.



- 02** ВСТАВТЕ назофарингеальний дихальний шлях.

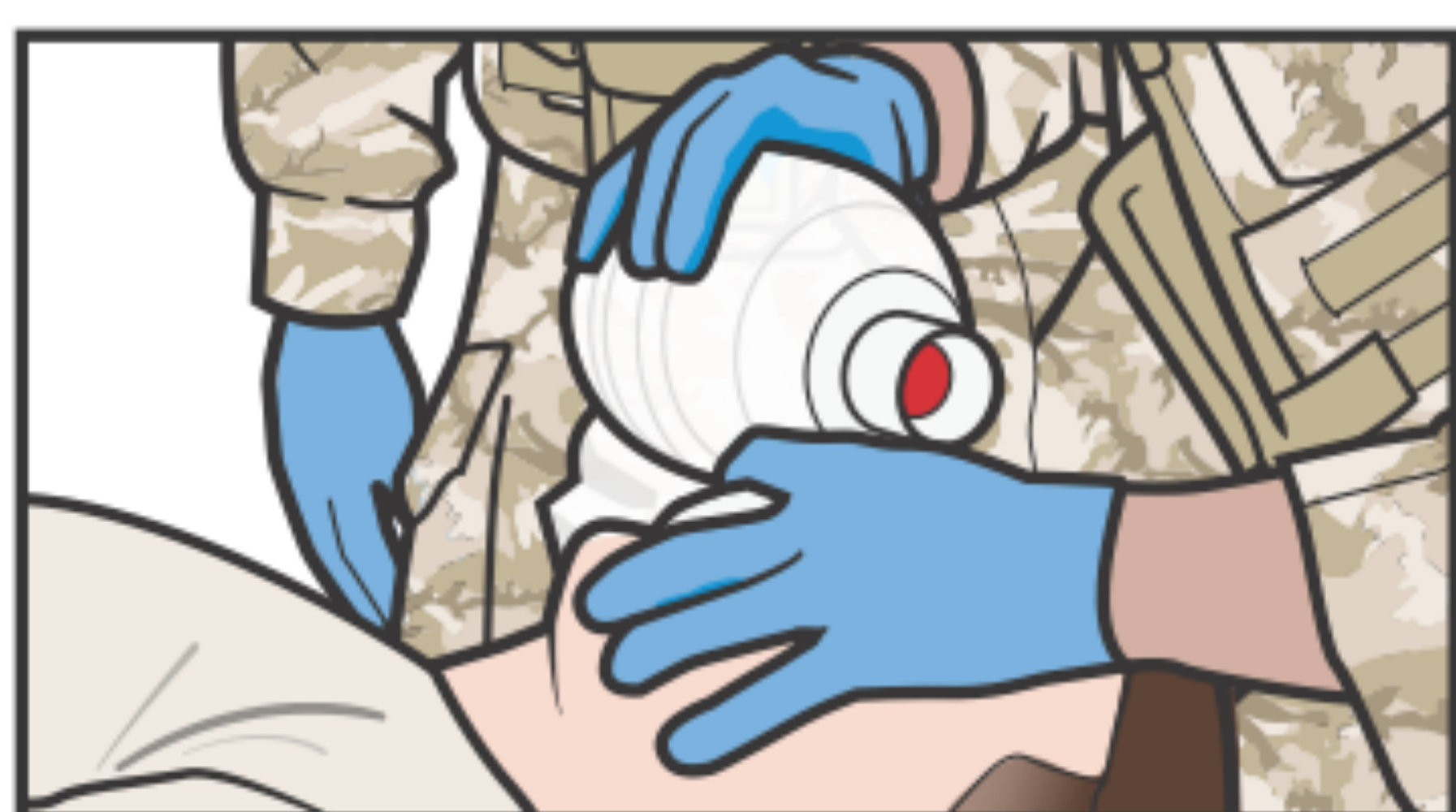

- 05** Розмістіть мізинець, безіменний, середній пальці уздовж нижньої щелепи потерпілого.



- 08** Другою рукою повторіть попередні кроки з іншого боку маски.

- 11** **Спостерігайте за підйомом і опусканням грудей пораненого.**

(1) Якщо грудна клітка не піднімається, переконайтеся, що маска не протікає, а голова нахилена, щоб дихальні шляхи були вільними.

(2) Якщо підйом і спад, КРОК 12.



- 12** ПРОДОВЖУЙТЕ СТИСНУТИ мішок кожні 5-6 секунд, частота 10-12 вдихів на хвилину.



- 03** З'єднайте частини мішок Амбу. Підключіть маску до мішок Амбу.



- 06** Покладіть великий палець на маску у верхній частині клапана.



- 09** Тримайте маску обома руками, щоб забезпечити щільне ущільнення та відсутність витoku повітря.




- 13** ПРОДОВЖУЙТЕ вентиляцію, стежте за спонтанним диханням, періодично перевіряйте пульс.

Bag Valve Mask (BVM)




- 04** Надіньте маску на рот і ніс пораненого.

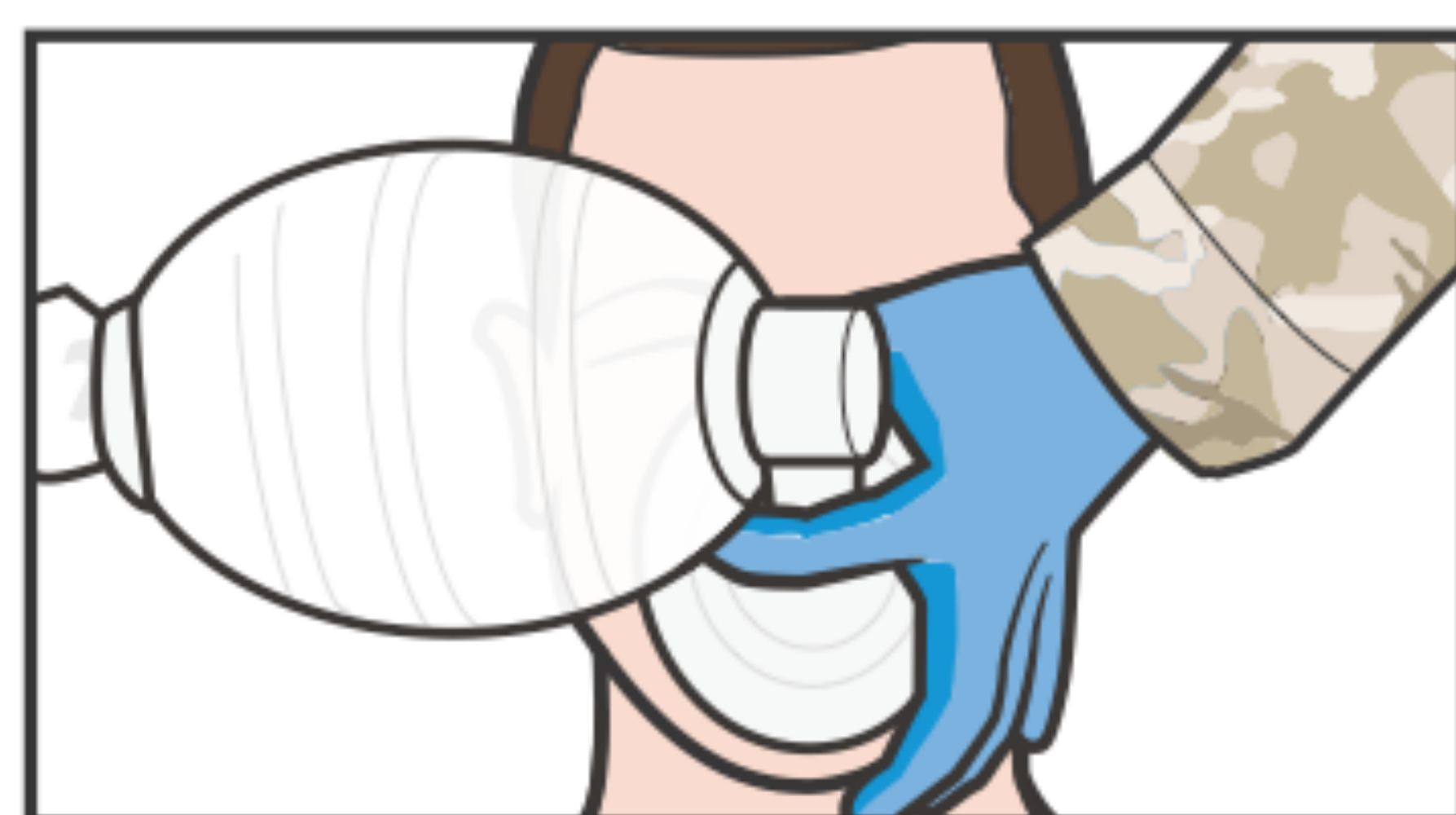

- 07** Покладіть вказівний палець низько на маску, нижче клапана.



- 10** Другий рятувальник повільно стискає мішок обома руками протягом 1-2 секунд, поки грудна клітка не підніметься.

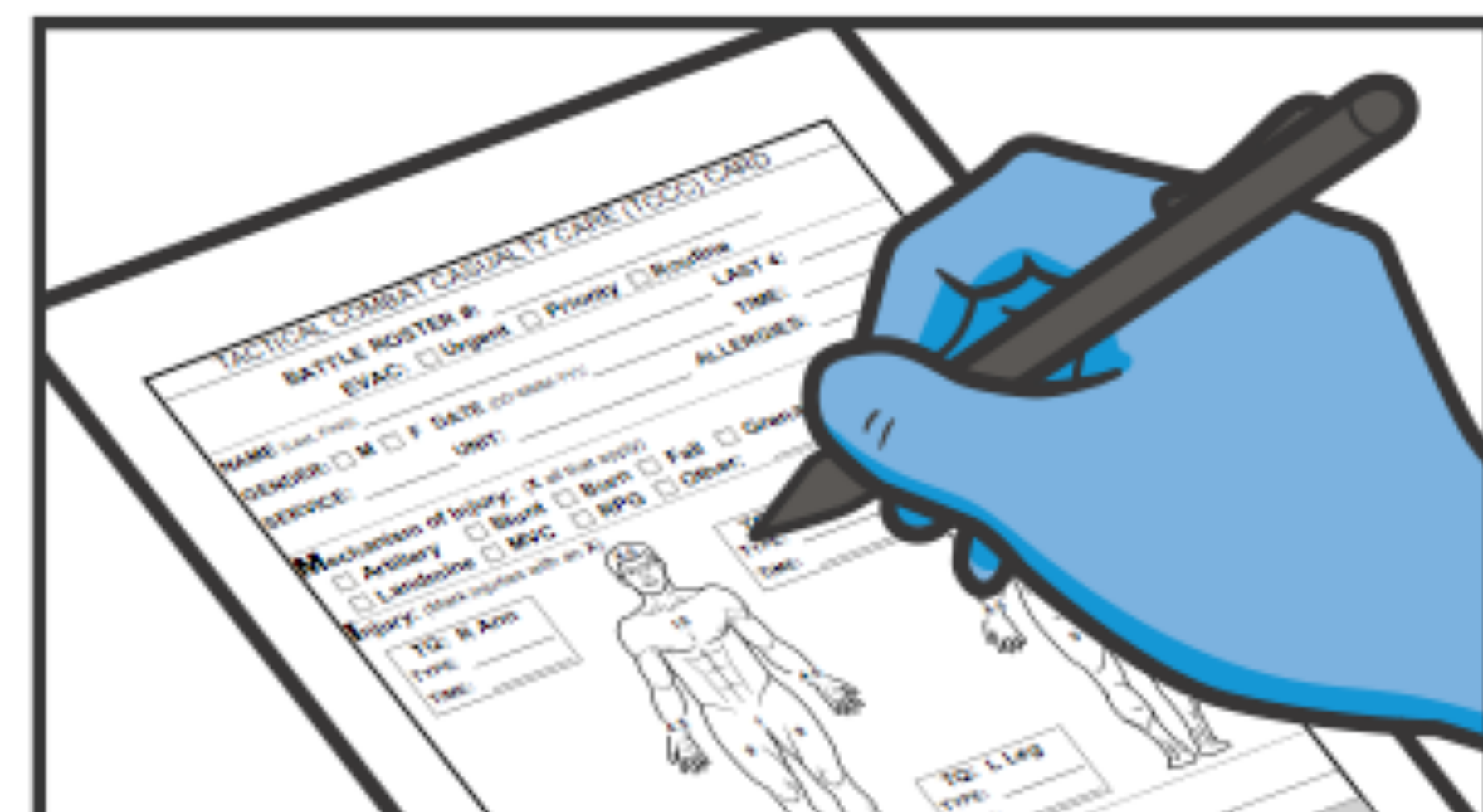

- 14** ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.