











СИСТЕМА FAST1®10 ДЛЯ ВНУТРІШНЬОКІСТКОВОГО ВВЕДЕННЯ В ГРУДНИНУ




ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту. ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте його вам на допомогу.

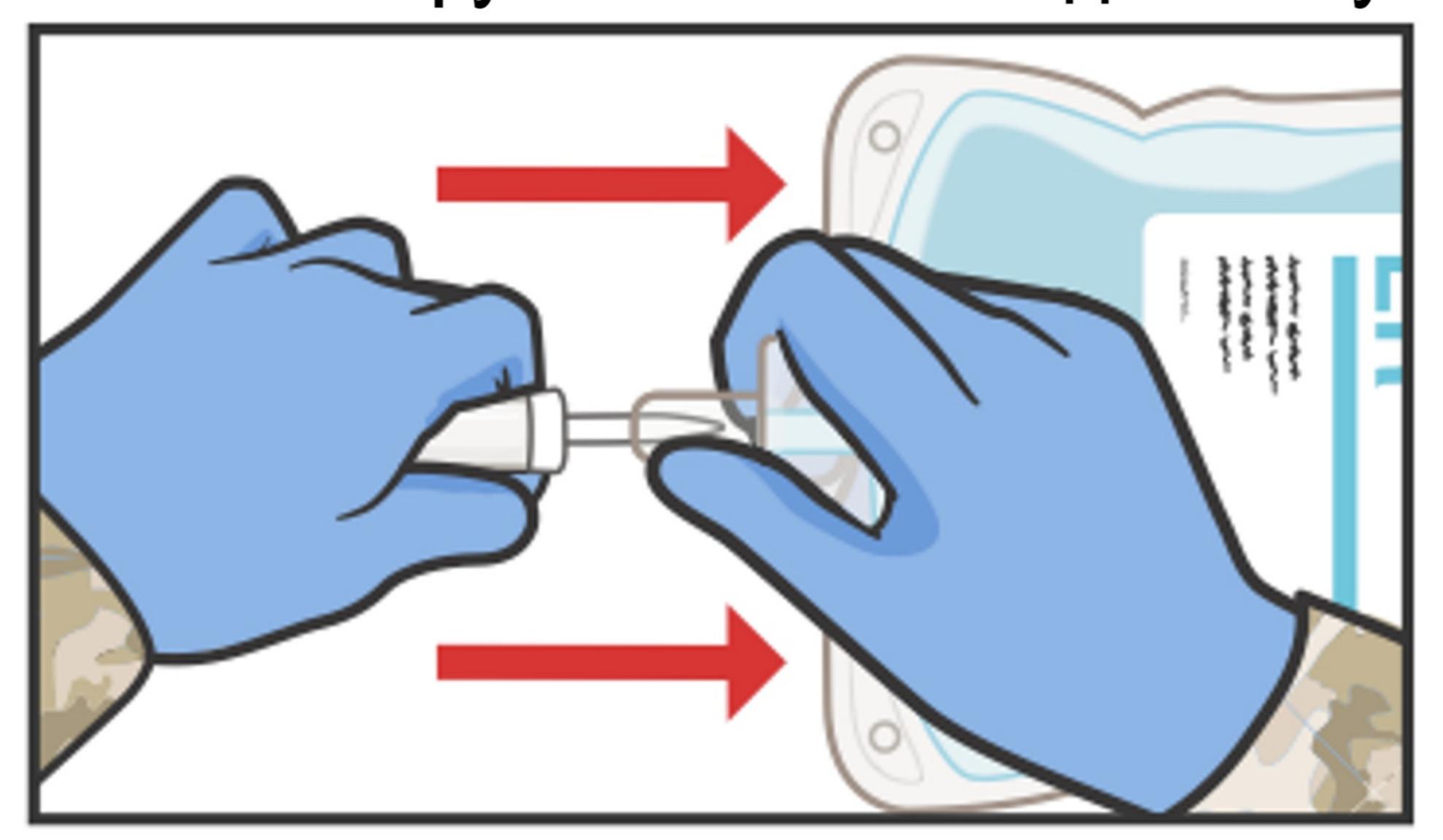


ПІД'ЄДНАЙТЕ контейнер/пакет з розчином для внутрішньовенної (ВВ) інфузії до належно підготовленої системи для ВВ інфузій.

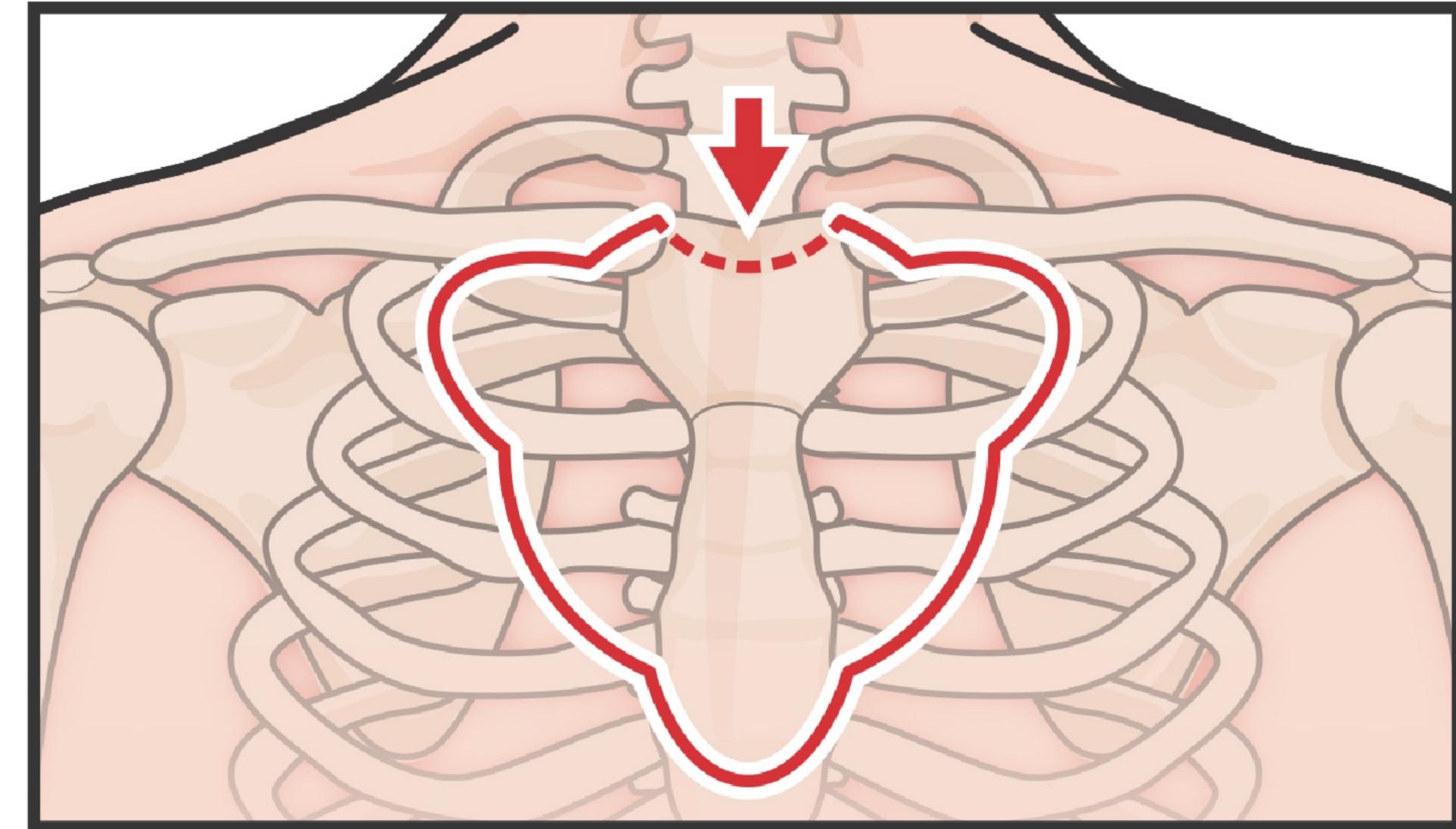


ЗНАЙДІТЬ орієнтир – яремну

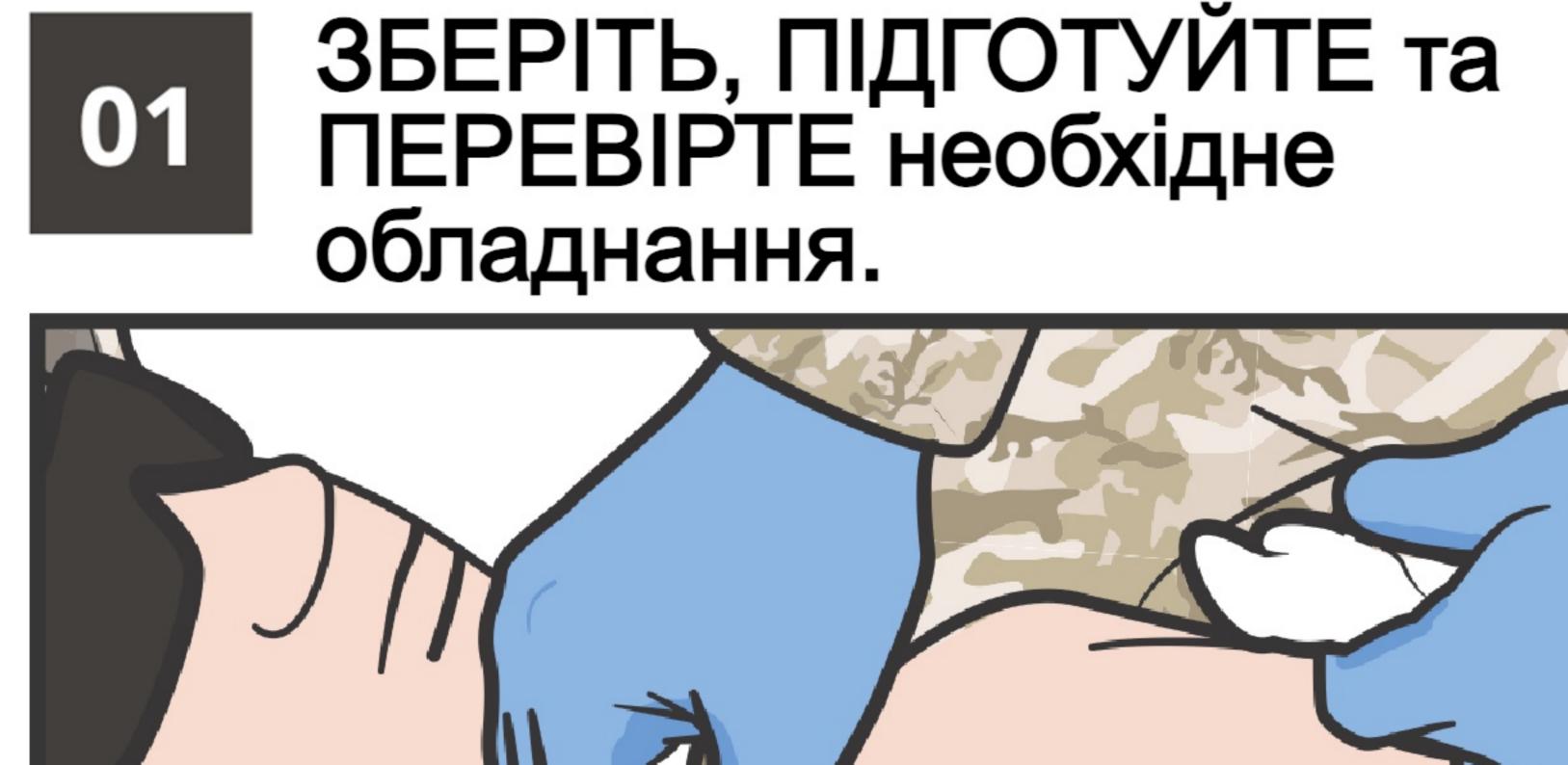

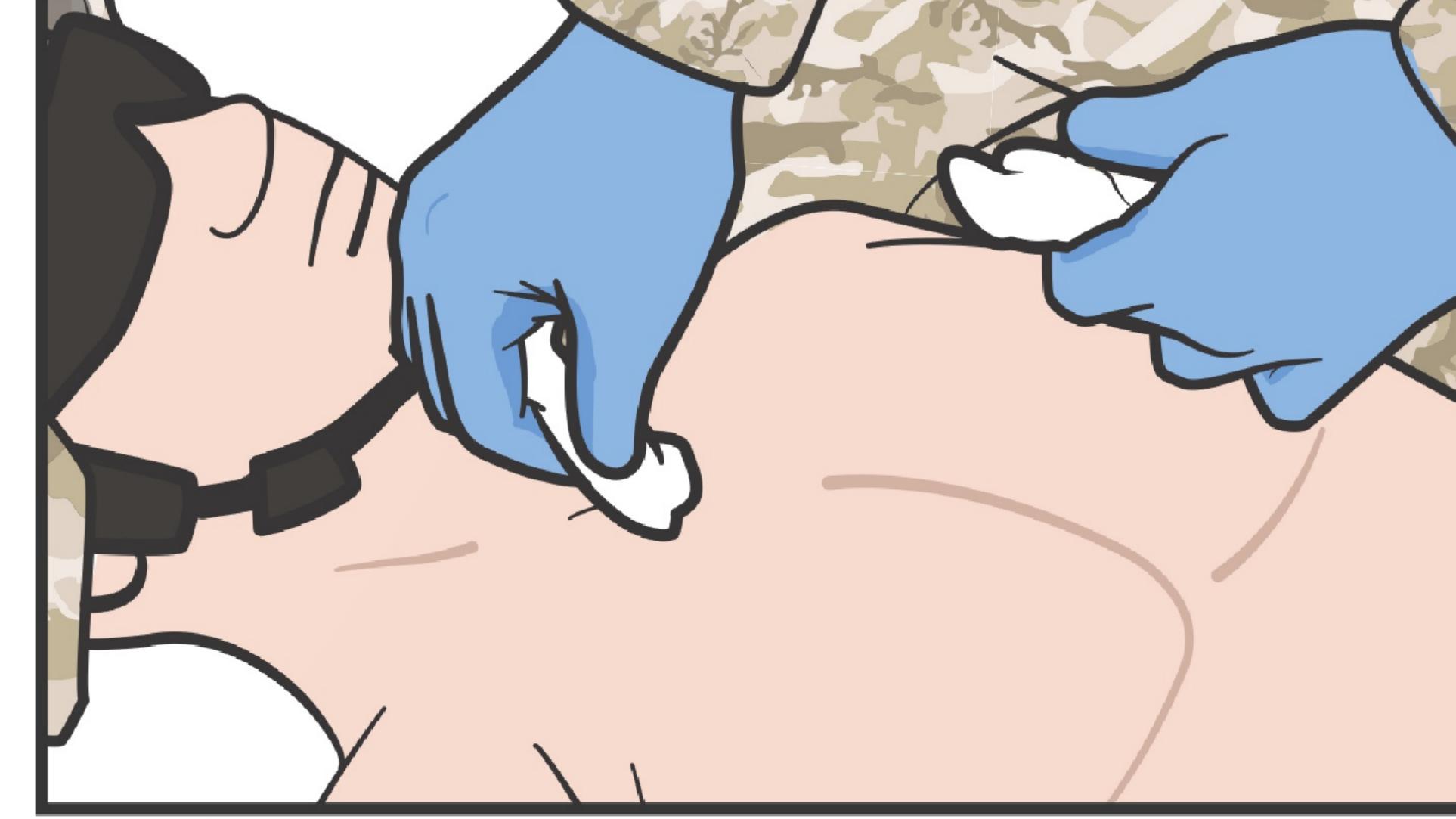


ПРОТРІТЬ ділянку серветкою, змоченою спиртом або повідон-йодом.

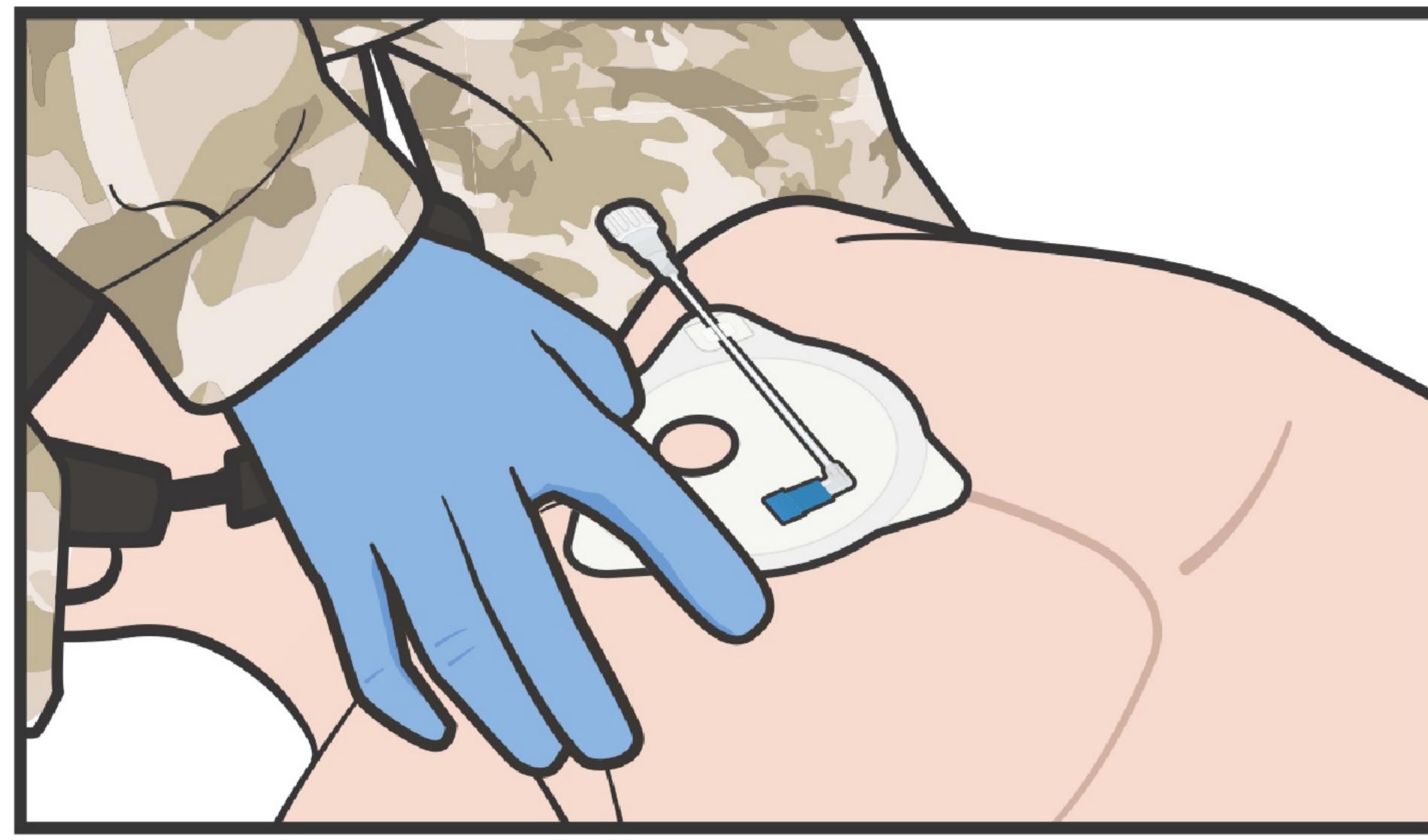


Спочатку ЗНІМІТЬ верхню частину захисного покриття наліпки-орієнтира, прикладіть наліпку-орієнтир до яремної вирізки та зніміть нижню половину захисного покриття наліпки, повністю приклеївши її.




ПЕРЕВІРТЕ розташування наліпки-орієнтира, переконавшись, що цільова зона знаходиться по серединній лінії над рукояткою груднини.

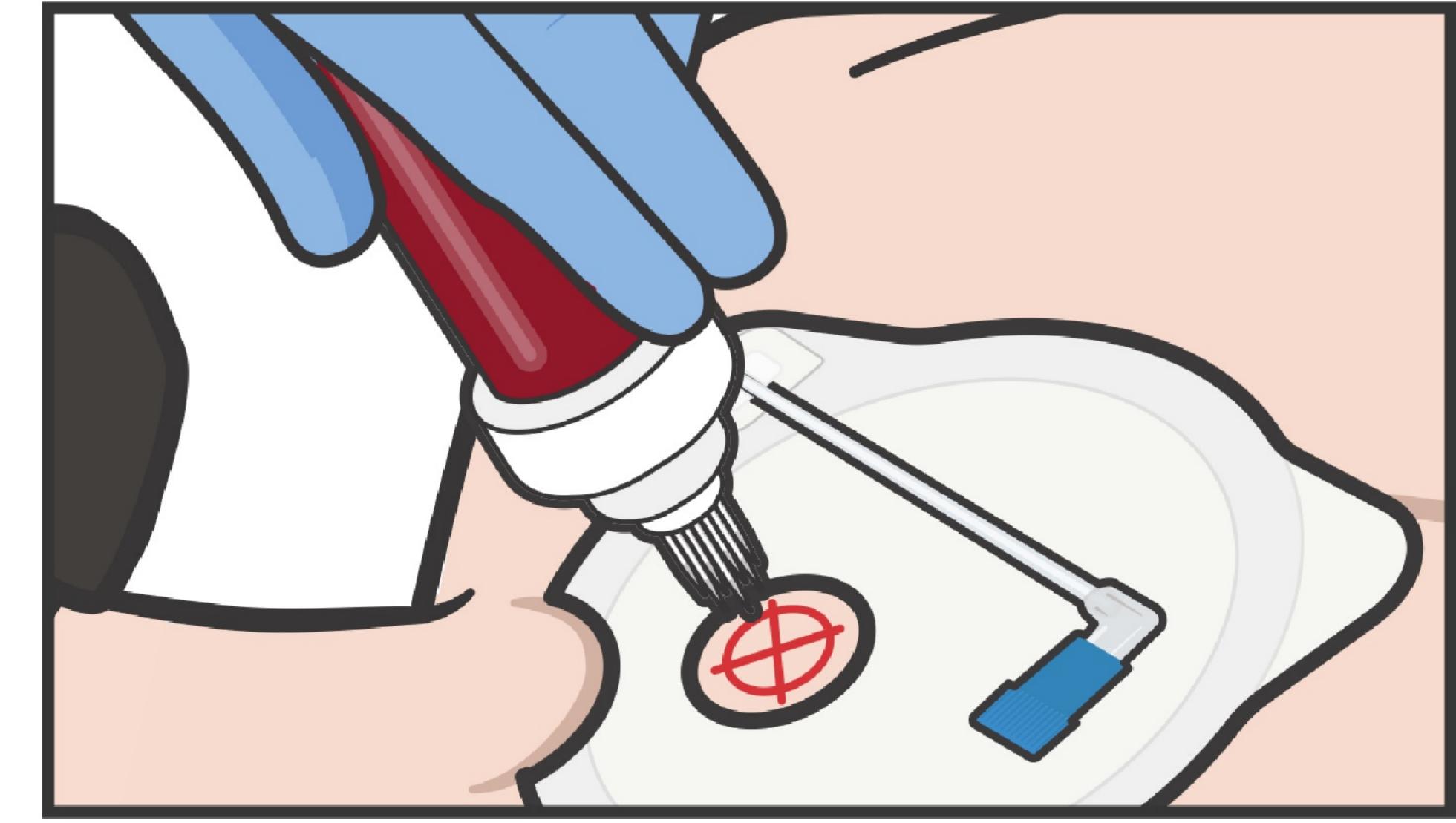


ЗНІМІТЬ ковпачок із пристрою FAST1 і розташуйте пристрій, спрямувавши кінець з голками в цільову зону наліпки-орієнтира.

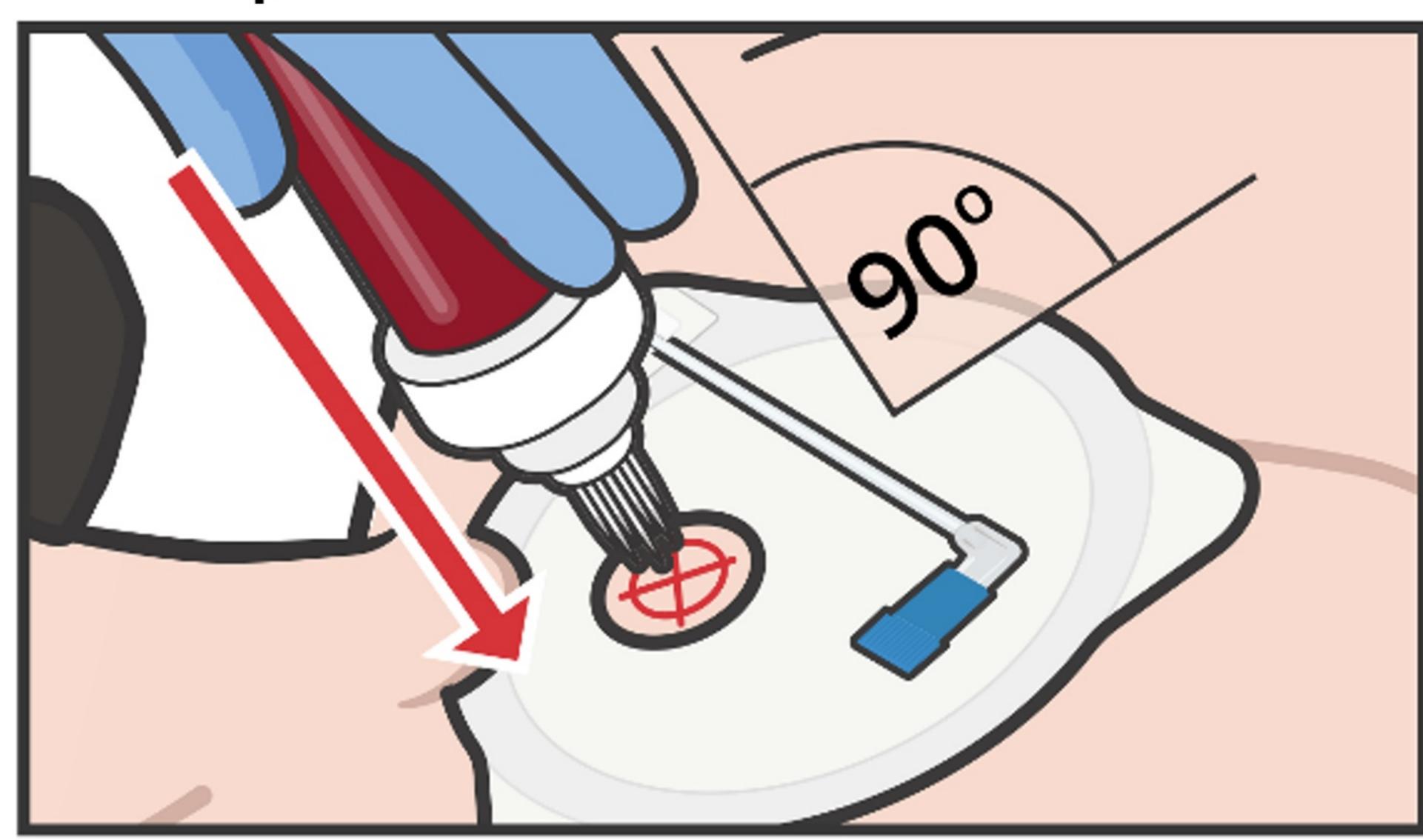


ТРИМАЙТЕ пристрій перпендикулярно до поверхні груднини.

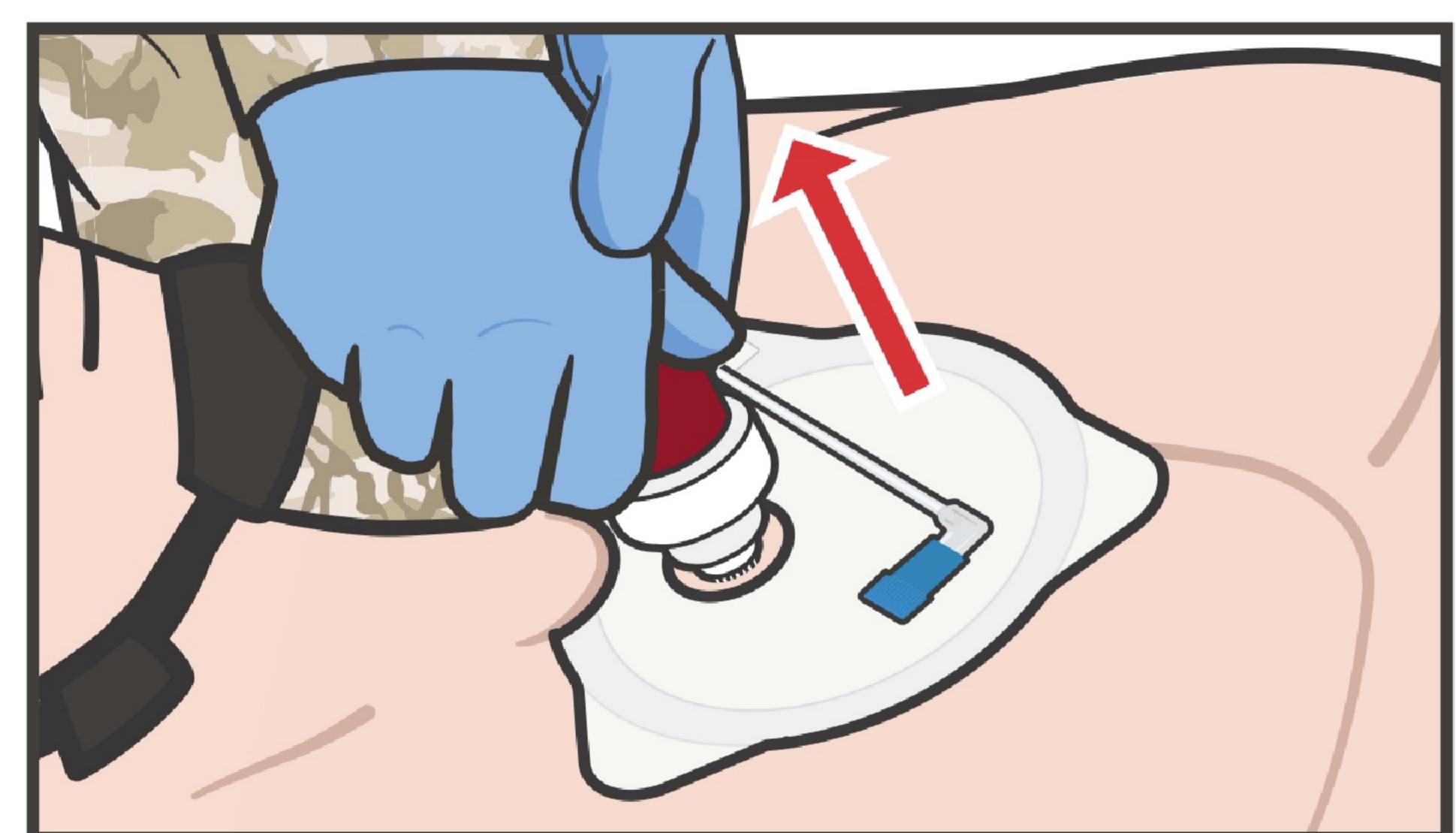


ЗАСТОСУЙТЕ наростаючий тиск вздовж осі введення, доки не відчуєте та не почуєте втрату опору.

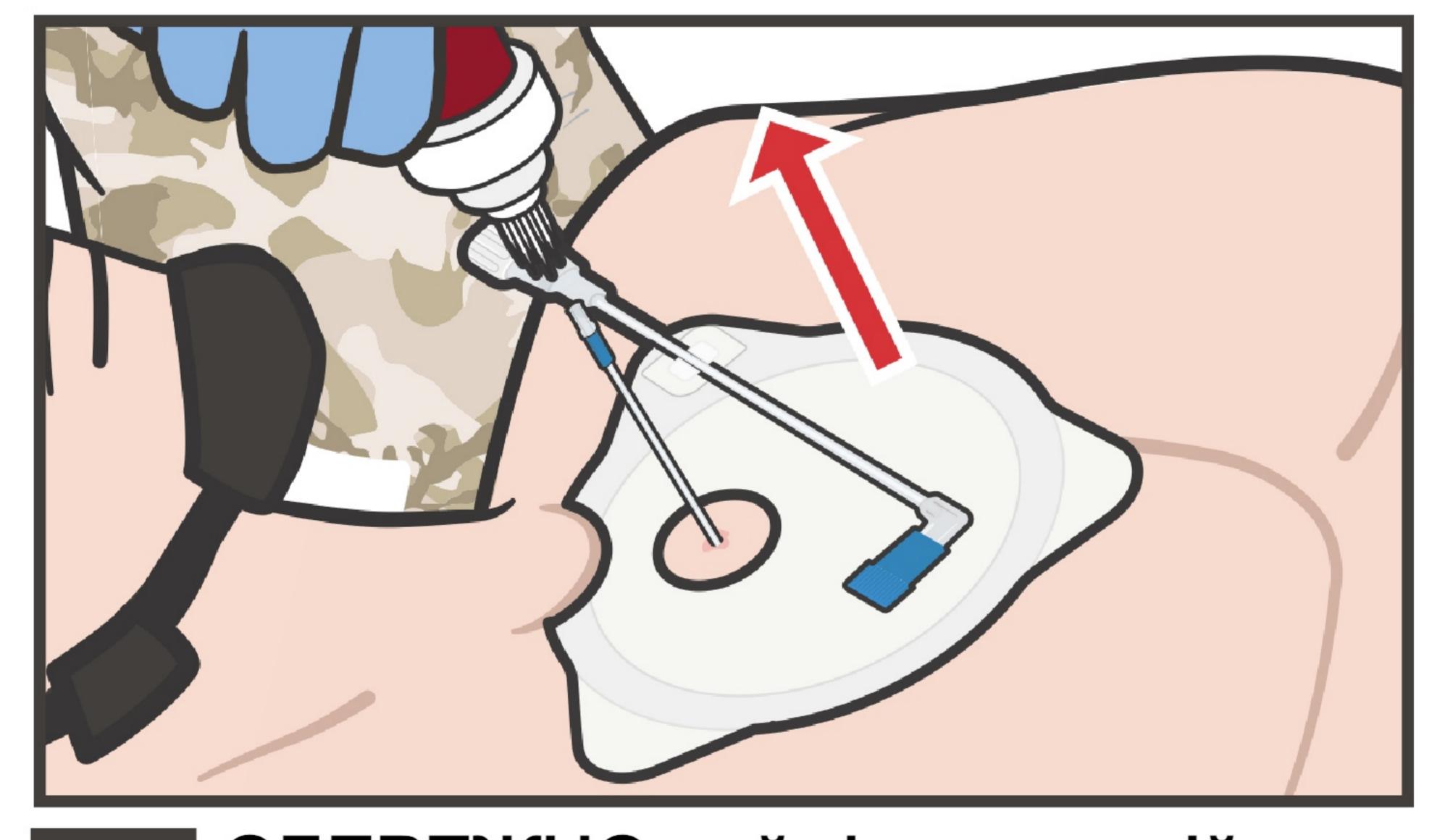

ОБЕРЕЖНО вийміть пристрій, потягнувши його прямо назад.

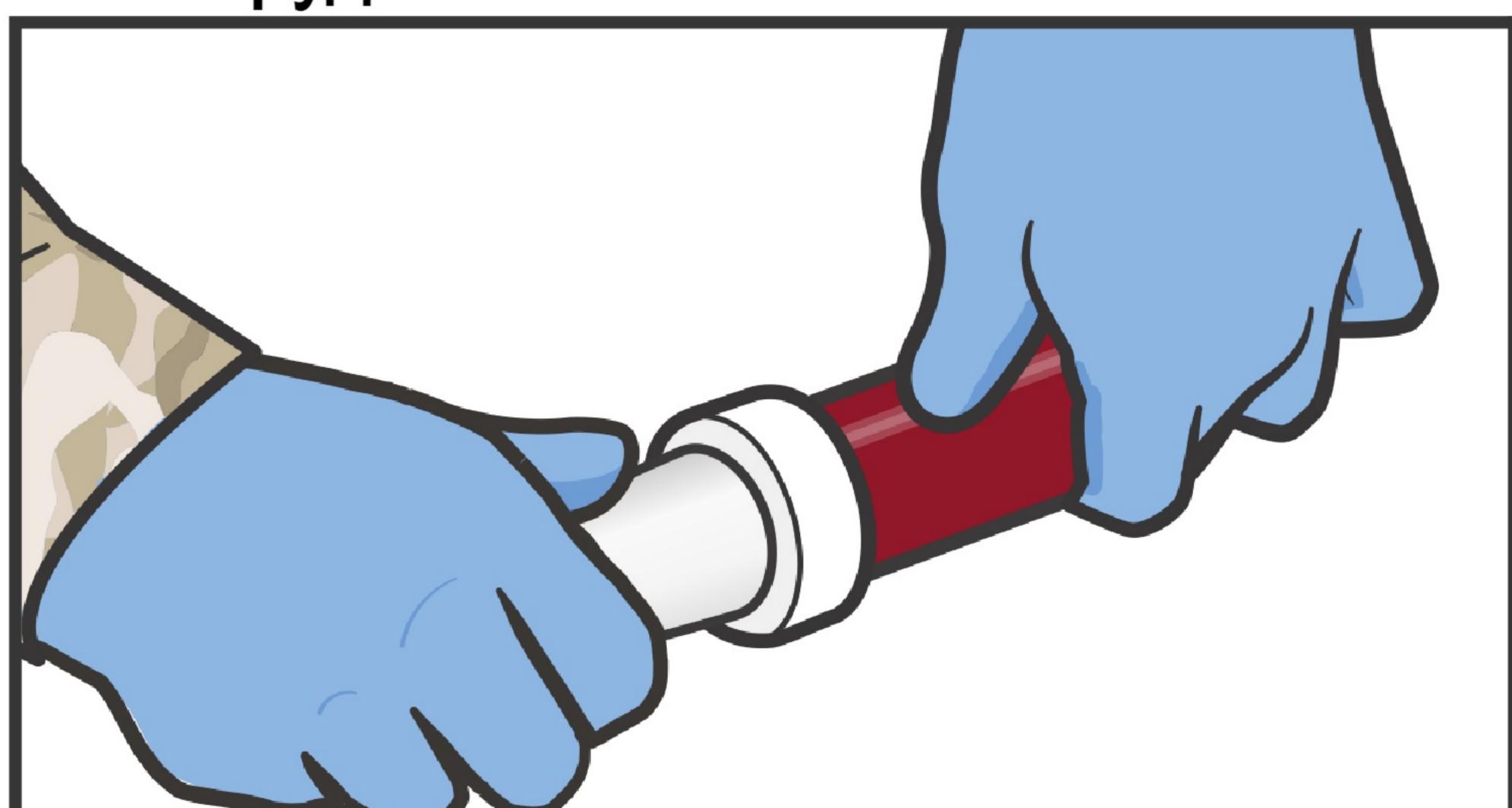

ВСТАВТЕ голки пристрою в пінопластову заглушку, яка додається до набору, одягніть захисний ковпачок для запобігання контакту з голками. Викиньте у контейнер для утилізації гострих предметів.

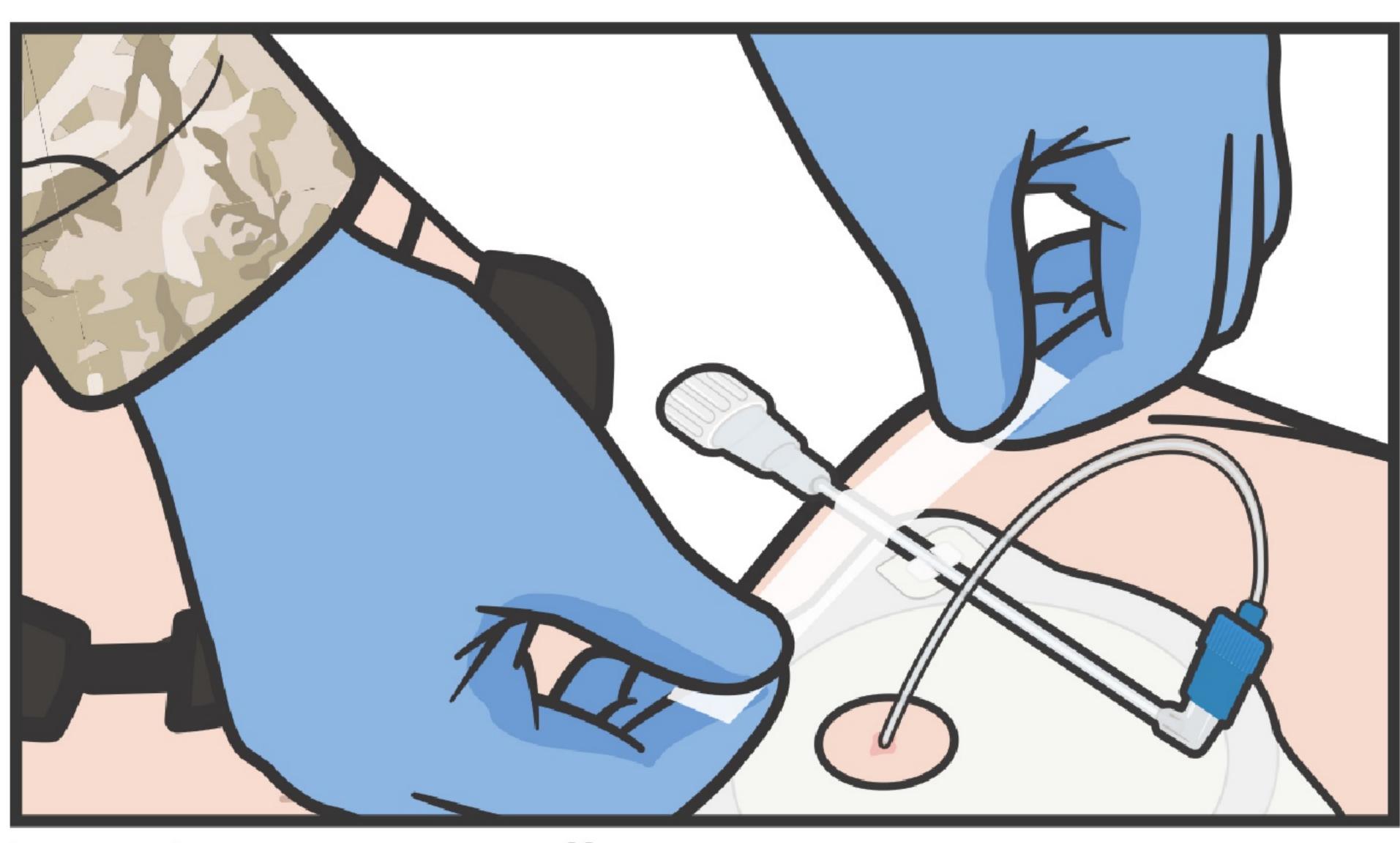

ПІД'ЄДНАЙТЕ подовжувач для інфузії до прямокутного перехідника на наліпці-орієнтирі.