


мішок Амбу - один чоловік



Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.

Bag Valve Mask (BVM)

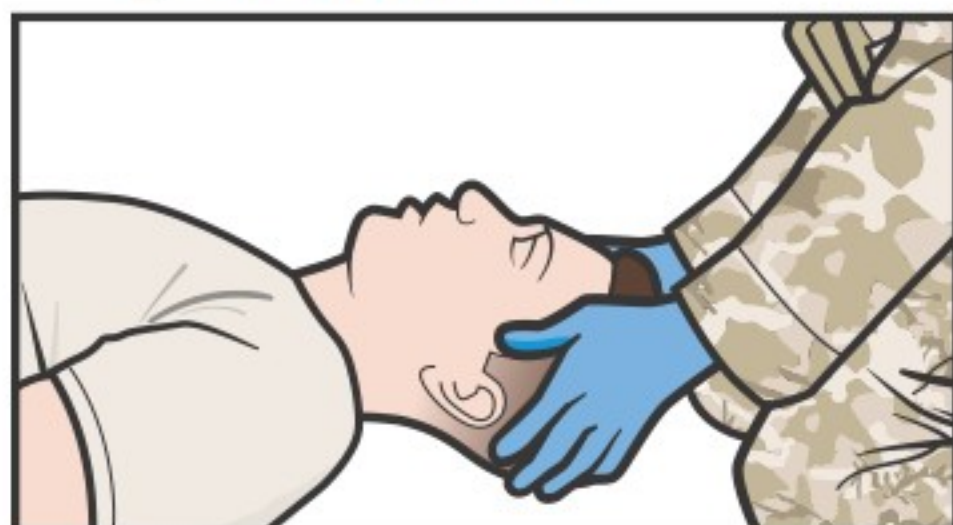

01 Розмістіть себе над головою пораненого.



02 ВСТАВТЕ назофарингеальний дихальний шлях.



03 З'єднайте частини мішок Амбу. Підключіть маску до мішок Амбу.



04 ВИКОРИСТОВУЙТЕ форму "Е" і "С", щоб тримати маску на роті пораненого.

ПРИМІТКА - "Е" і "С", одна рука.



ФОРМА "С" великим і верхнім пальцями навколо стрижня маски.



Маска утворює щільне прилягання, натискаючи вниз великим і верхнім пальцями.

Форма букви «Е» утримує щелепи та дихальні шляхи відкритими з нахилом голови та підняттям підборіддя.



05 ПІДТРИМУЙТЕ герметичного ущільнення обличчя пораненого за допомогою тиску.



06 СТИСНІТЬ мішок іншою рукою протягом 1-2 секунд, спостерігайте за грудною кліткою пораненого, щоб переконатися, що легені надуваються.



07 ПРОДОВЖУЙТЕ СТИСНУТИ мішок кожні 5-6 секунд, частота 10-12 вдихів на хвилину.

ПРИМІТКА. мішок Амбу може бути стиснута до вашої ноги, щоб збільшити кількість доставленої суми або зменшити втому.



08 ПРОДОВЖУЙТЕ вентиляцію, стежте за спонтанним диханням, періодично перевіряйте пульс.



09 ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.