










## EMA EZ-10® ДЛЯ ВНУТРІШНЬОКІСТКОВОГО ВВЕДЕННЯ У ВЕЛИКОГОМІЛКОВУ КІСТКУ



ПОДБАЙТЕ про засоби індивідуального захисту. ПРИМІТКА: Якщо доступний боєць-рятувальник, скеруйте




ПІД'ЄДНАЙТЕ контейнер/пакет з розчином для внутрішньовенної (ВВ) інфузії до належно підготовленої системи для ВВ інфузій.

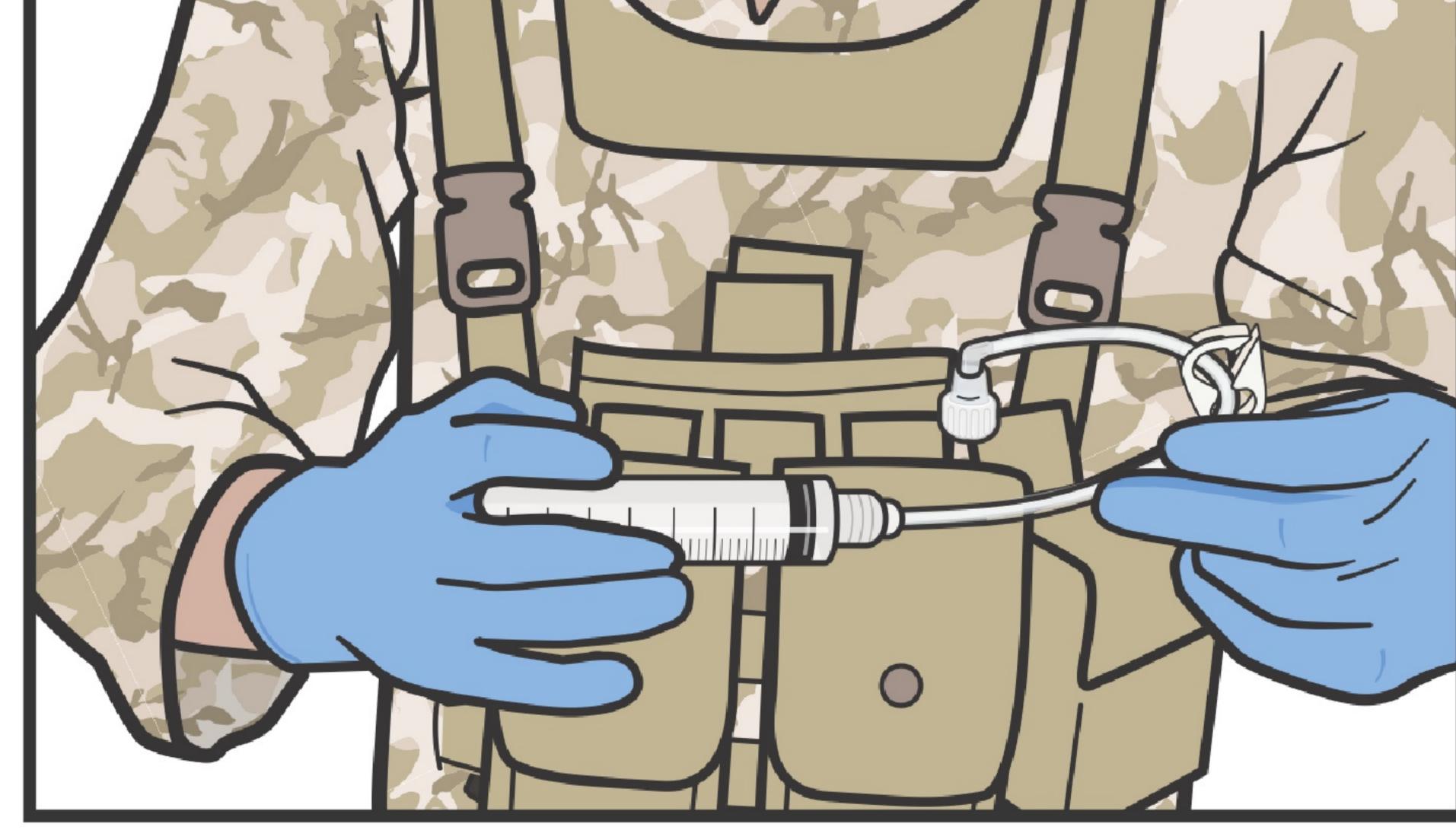


ЗАПОВНІТЬ подовжувач для внутрішньокісткового (ВК) катетера стерильним розчином для ВВ ін'єкцій, дотримуючись правил асептики.


ЗБЕРІТЬ, ПІДГОТУЙТЕ та ПЕРЕВІРТЕ необхідне обладнання.

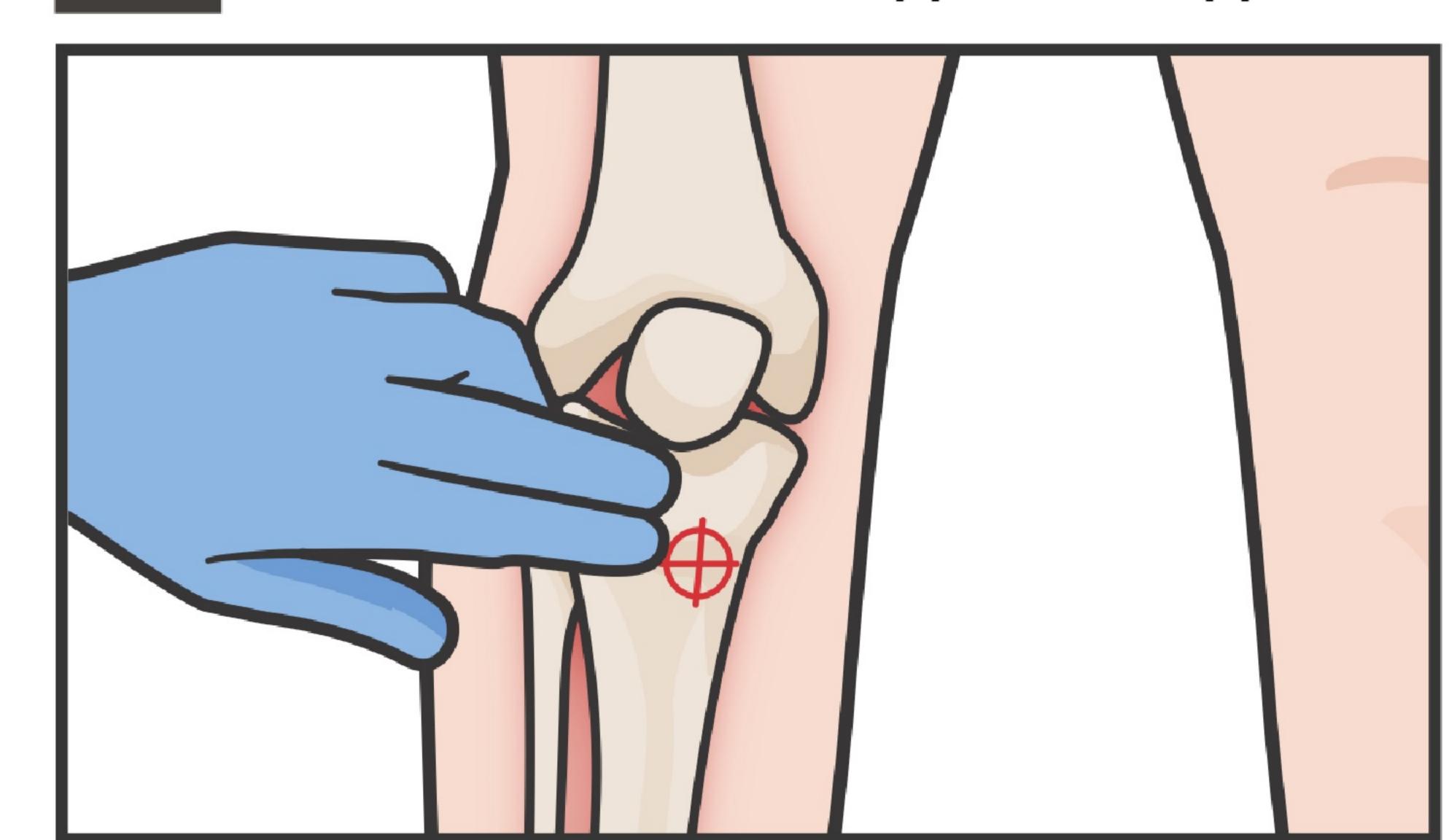

ВИЗНАЧТЕ потрібне місце для введення пристрою ЕZ-IO - на ширину одного пальця медіальніше від проксимальної частини горбистості великогомілкової кістки (зазвичай на 3 см нижче від надколінника).

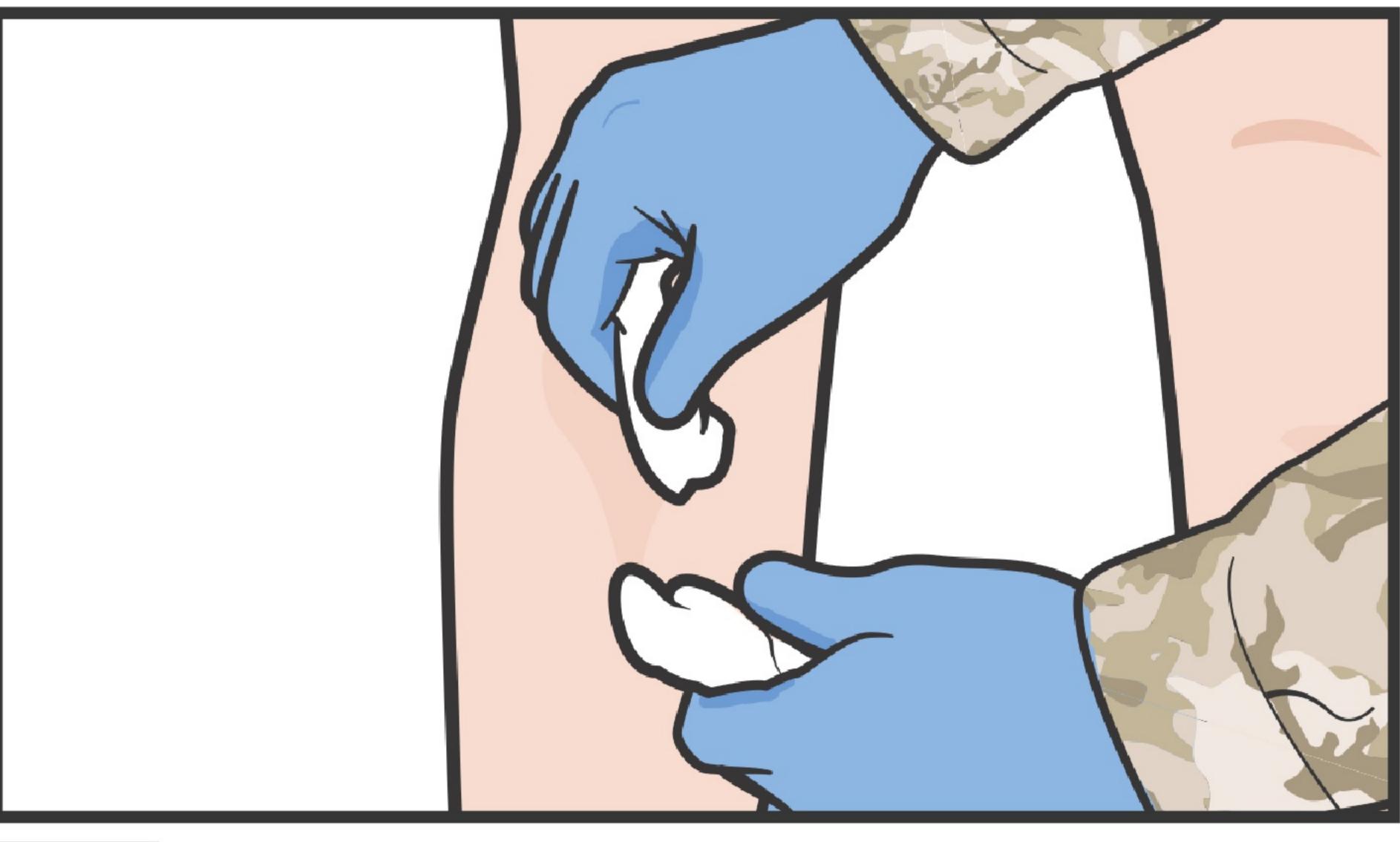


ПРОТРІТЬ ділянку серветкою, змоченою спиртом або ПОВІДОН-ЙОДОМ.

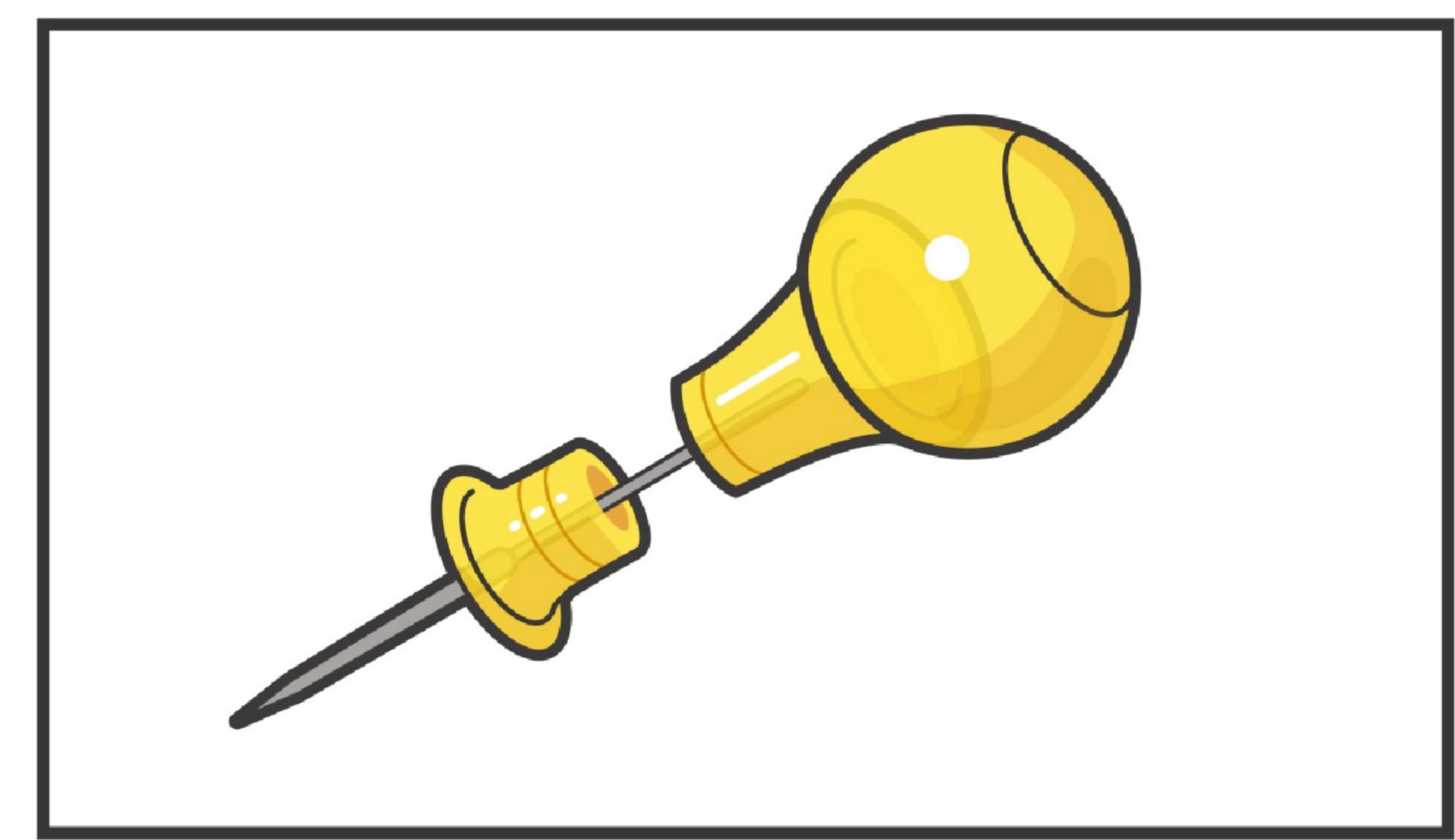


ВІЗЬМІТЬ відповідний картридж EZ-IO. Якщо використовується механічний дриль, відкрийте картридж EZ-IO та приєднайте голку до дриля. Ви повинні відчути характерне клацання при під єднані малого магніту.

ПРИМІТКА: Картридж EZ-IO для дорослих має жовтий колір.

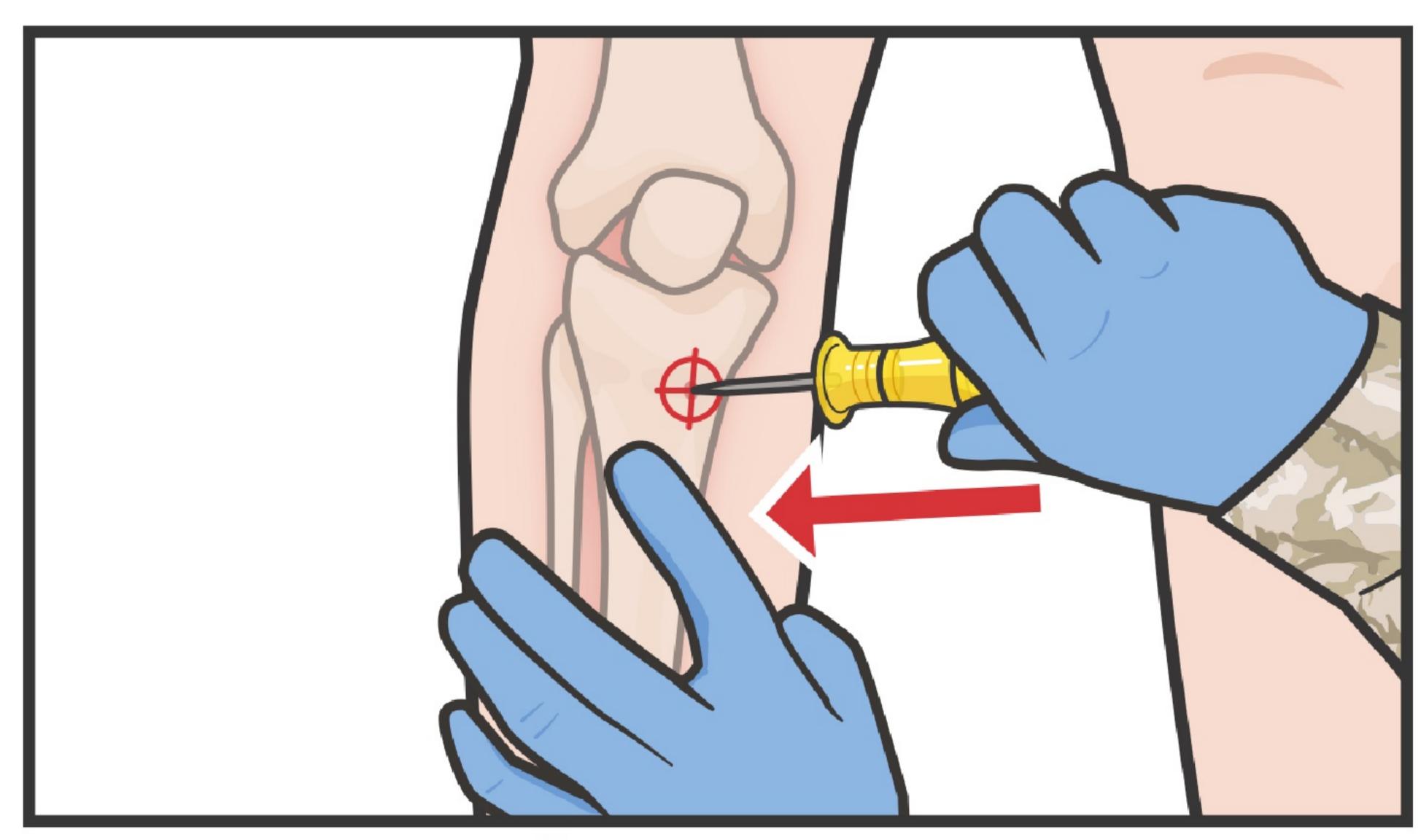


ПІДГОТУЙТЕ голку ЕZ-ІО для ручного введення, знявши захисний ковпачок. Якщо ви використовуєте механічний дриль, зніміть ковпачок швидким включенням дриля, утримуючи ковпачок.

ПРИМІТКА: Тримайте руки та пальці подалі від голки.

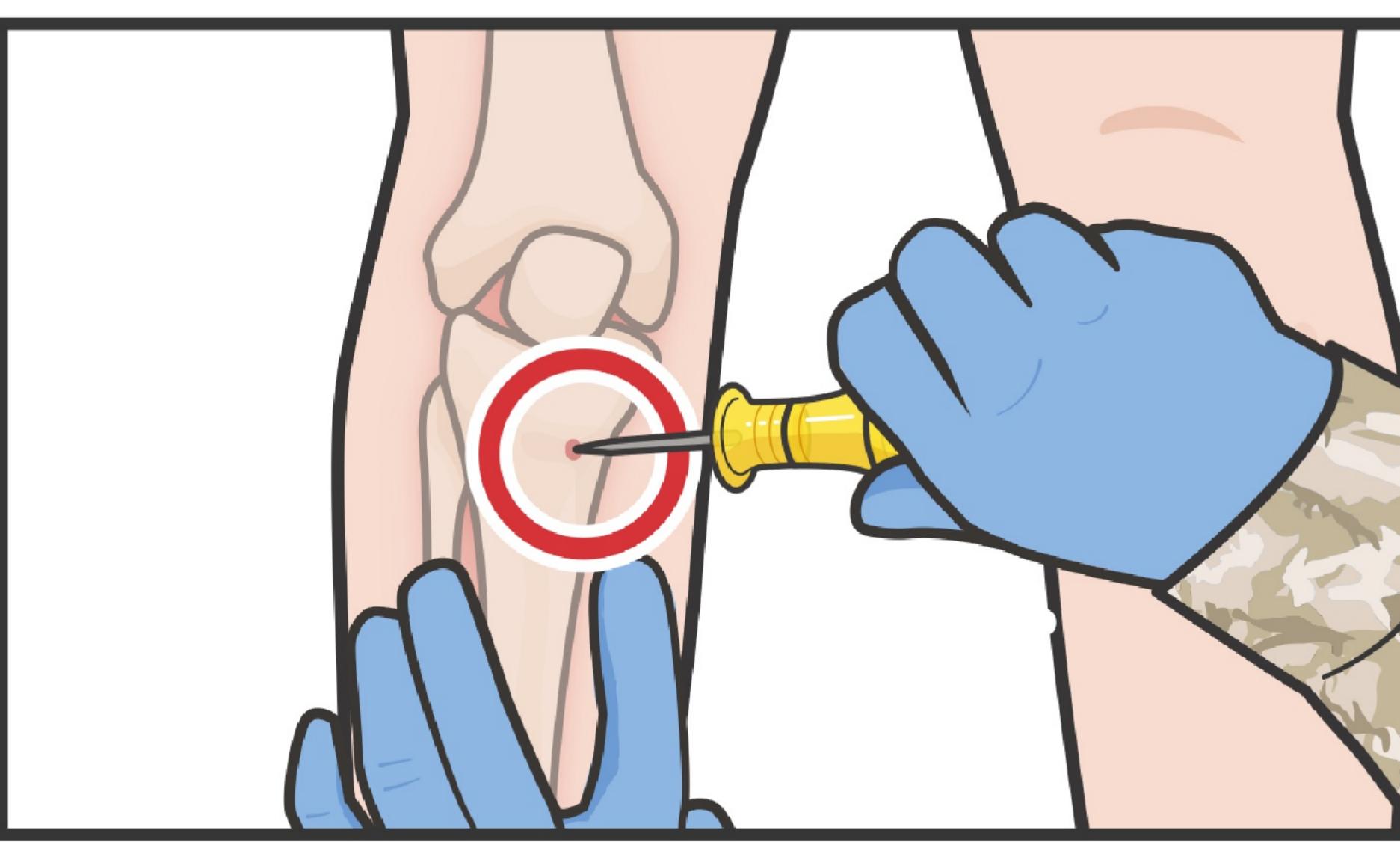

Тримаючи дриль або голку в 08 домінуючій руці, другою рукою ЗАФІКСУИТЕ руку пораненого біля місця введення.


РОЗМІСТІТЬ дриль або голку над місцем введення під кутом 90 градусів до площини кістки.

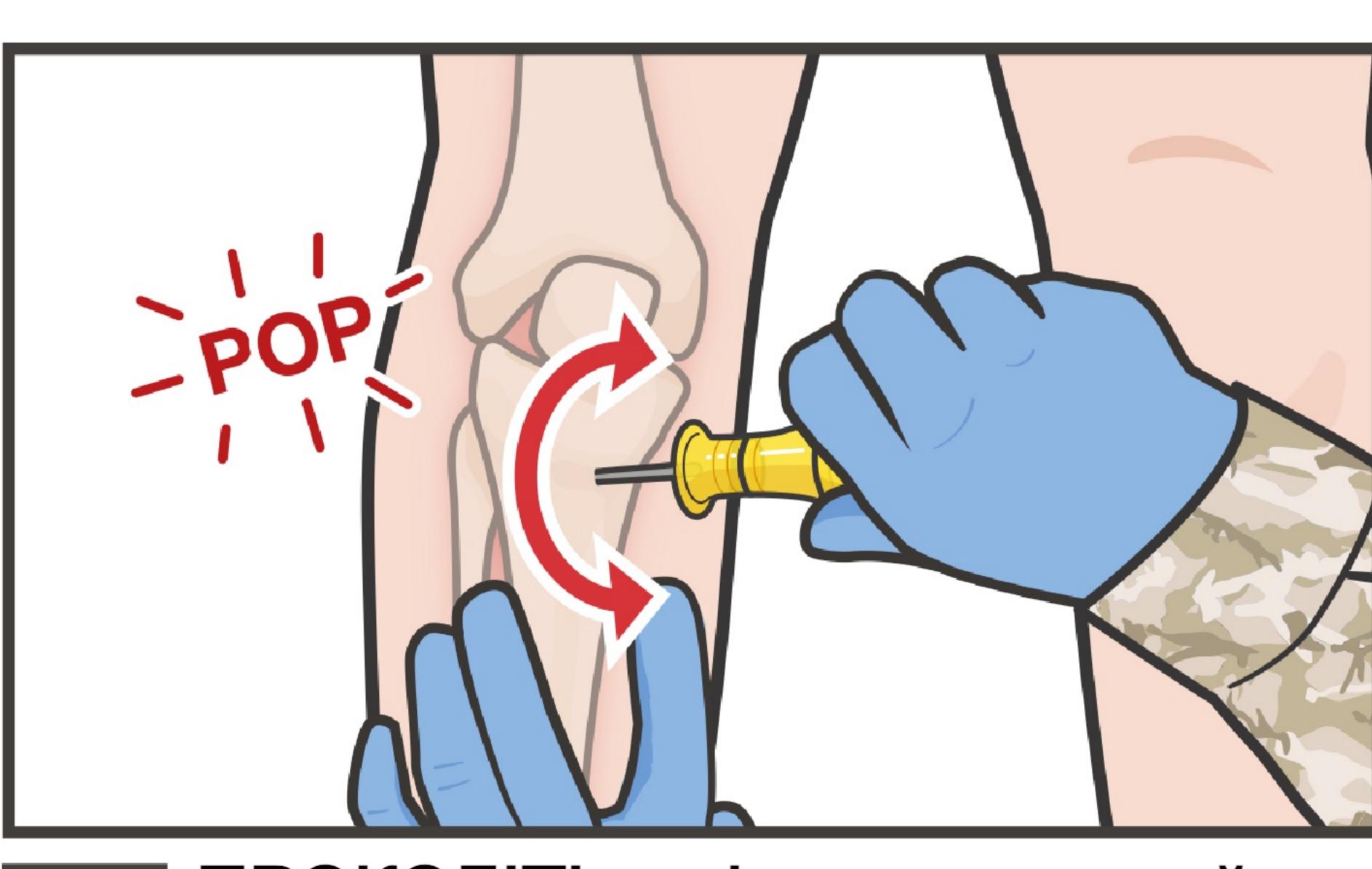

 ПРОКОЛІТЬ шкіру та просувайте голку, поки її кінчик не торкнеться до кістки.

Докладаючи рівномірного постійного тиску вниз, прокручуйте голку рухами туди й назад (або натискайте на пусковий механізм дриля), поки голка не пройде крізь кортикальний шар кістки.

ПРИМІТКА: При досягненні потрібної глибини ви відчуєте втрату опору або легенький звук.

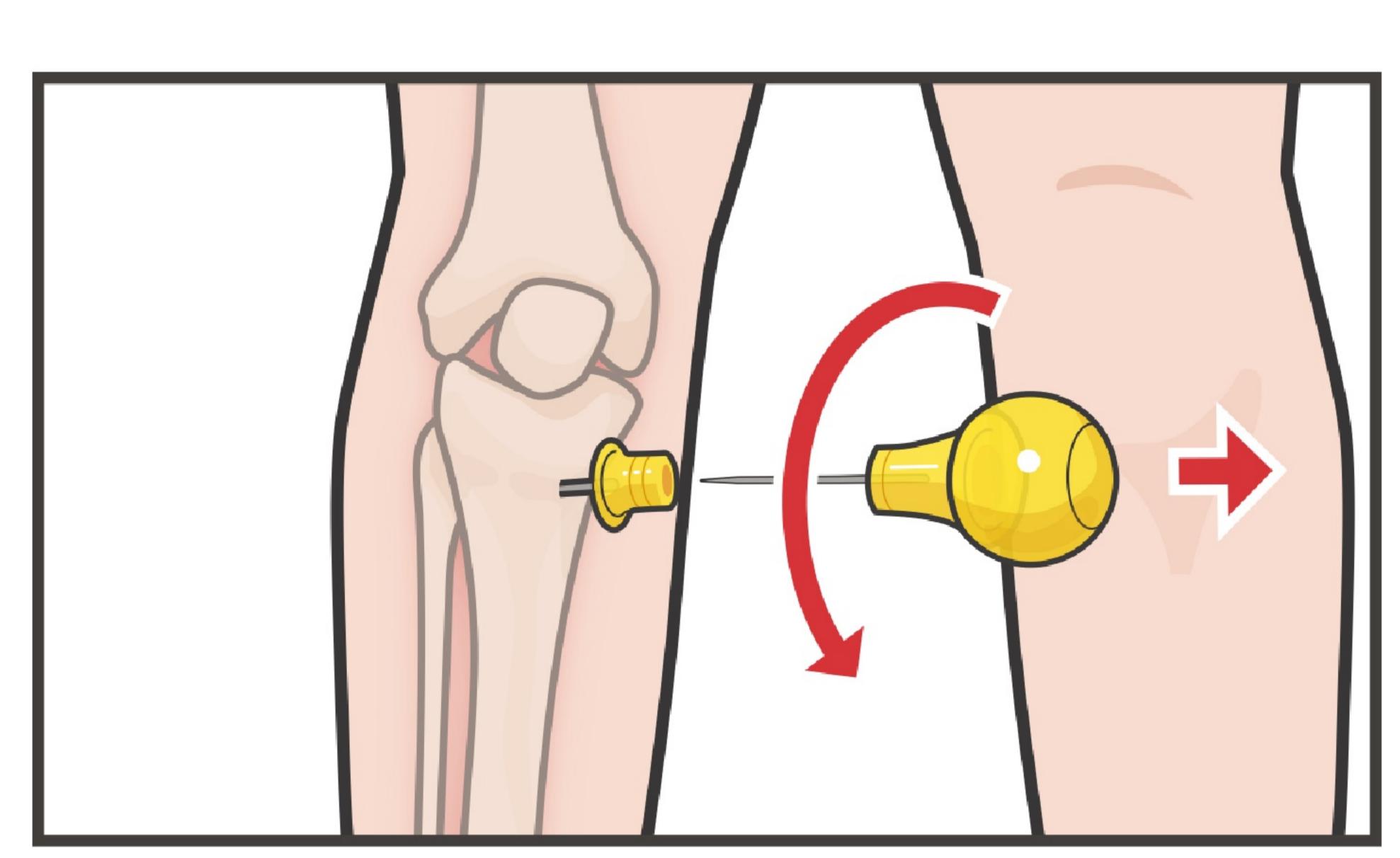

ВІДКРУТІТЬ стилет проти годинникової стрілки та зніміть його з ВК катетера. Якщо використовувався механічний дриль, обережно від'єднайте його.

> Продовження на наступній сторінці...